

braintronics®

Body&Mind syncSystem


CASADA
healthcare



< timetorelax

braintronics®

brainwave
stimulation system



ALPHASONIC II



CASADATM
healthcare

since
2000

< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen AlphaSonic II.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Kontraindikationen	5
Ausstattung / Funktionen	6
Fernbedienung	7
Inbetriebnahme	12
Besonderheiten	17
Störungssuche	22
Lagerung / Pflege	22
Technische Daten	22
EU-Konformitätserklärung	23
Gewährleistungsbestimmungen	23

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel verfügt über beheizte Bereiche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren sollten vor der Benutzung vorsichtig sein. (ICE 60335-2-32)
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckenfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder unter 14 Jahren.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.

Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Bettlägerige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Kinder unter 14 Jahren sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass sie den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.



KONTRAINDIKATIONEN „BRAINTRONICS“

- Psychosen (z.B. Schizophrenie, Bipolare Störung, Endogene Depressionen)
- Persönlichkeitsstörungen
- Epilepsie und ähnliche Anfallserkrankungen
- Herzerkrankungen
- Erkrankungen des zentralen Nervensystems
- Thrombose
- Endogene Depressionen
- ADS (interaktive)
- Kürzlich vorgefallener Herzinfarkt oder Schlaganfall
- Geistige Behinderung
- Suchterkrankung wie Drogen, Alkohol und Medikamentenabhängigkeit
- Regelmäßige Einnahme von Psychopharmaka
- Schwangerschaft

HINWEIS: Aus ethischen und rechtlichen Gründen sollte braintronics nicht bei Kindern und Jugendlichen ohne ausdrückliche Genehmigung des gesetzlichen Vertreters angewandt werden. Personen die durch Meditation in Glaubenskonflikte kommen könnten, sollten von der Anwendung absehen.

Ausstattung / Funktionen

1. Kopfkissen
2. Schulter-Airbag
3. Unterarm-Airbag
4. Sitzkissen
5. Waden-Airbag
6. Fuß-Airbag
7. Fußteil
8. Rückenkissen
9. Dekoleiste
10. Armlehne
11. Seitenabdeckung

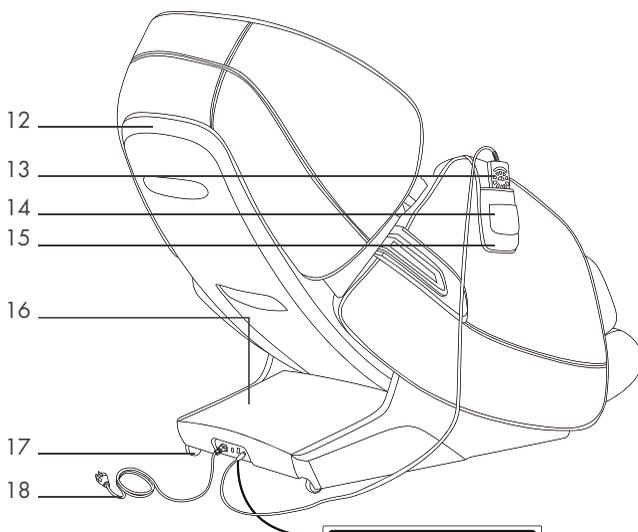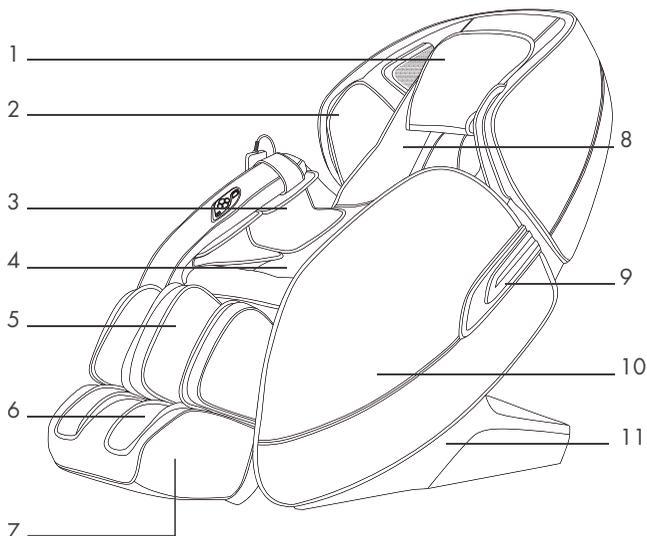

12. Rückenabdeckung
13. Fernbedienung
14. Tasche für Handy
15. Tasche für Fernbedienung
16. Sicherheitsabdeckung
17. Transportrollen
18. Netzkabel und -stecker
19. Netzkabelanschluss
20. Sicherungskasten
21. Power-Schalter
22. Buchse für Fernbedienung



19 20 21 22

Fernbedienung

1. AN / AUS
2. Menü
3. Auto Programme
4. Manuell Einstellung
5. Bewegung der Fußstütze nach oben/nach unten
6. Schwerelos Position
7. Pause
8. Zurück
9. Erweiterte Einstellung
10. Bewegung der Rückenlehne und der Fußstütze nach oben/nach unten

BILDSCHIRM EINSTELLUNG

Schulterhöhe

Einstellung



Fernbedienung



Auto-Programm

Demo	Demoprogramm aller Funktionen
Yoga	Gezielte Dehnungsmassage aktiviert Ihren Körper und hat eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus.
Entspannung	Entspannung für Muskeln und Knochen fördert die Durchblutung.
Schmerzliederung	Eine tiefe Massage der Akupunkturpunkte, die verspannten Stellen Linderung verschafft.
Erholung	Durchdringende Massagetechniken (Druck & Kneten) entlasten Ihre Gelenke. Ideale Massage zur Stärkung und Entlastung Ihres Rückens und Ihrer Beine.
Komplett-Luft	Alle Airbags und der Fußroller sind aktiv
Nacken Schulter	Massageprogramm ausgerichtet auf den Oberkörper
Rücken & Taille	Massageprogramm ausgerichtet auf den Unterkörper





Manuelle Funktion

Massagemodus	Massagemodus
Massagebereich	
Luft	
Mehr	
Stop	Stop aller Massagefunktionen
Kneten AUS	Massagetechnik zum Lösen von Verspannungen mit 3-stufig einstellbarer Geschwindigkeit.
Flattern AUS	Geschwindigkeit und Breite 3-stufig einstellbar.
Kneten & Flattern AUS	Kombination aus Kneten und Flattern. Geschwindigkeit 3-stufig einstellbar.
Shiatsu AUS	Shiatsu stimuliert einzelne Punkte am Körper und mobilisiert die Muskulatur. Geschwindigkeit und Breite 3-stufig einstellbar.
Klopfen AUS	Klopfmassage fördert die Durchblutung und löst angespannte Muskeln. Geschwindigkeit und Breite 3-stufig einstellbar.


Fernbedienung



- Massage an einem festgelegten Punkt
- Partielle Massage in bestimmtem Körperbereich
- Massage im Bereich des gesamten Körpers
- Partielle Massage im Bereich des oberen Rückens
- Partielle Massage im Bereich des unteren Rückens
- Wenn kein anderer Massagemodus aktiviert ist, kann hier die "Rolling"-Funktion ausgewählt werden.

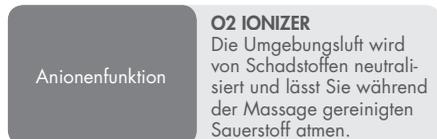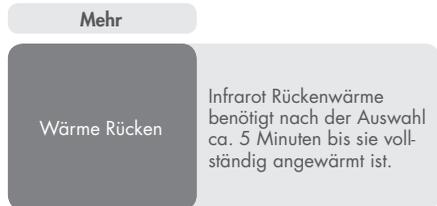

Fernbedienung

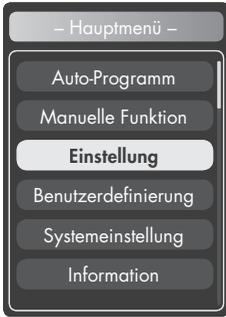

Einstellung

Geschwindigkeit 3 Geschwindigkeitsstufen

Breite 3-fache Breitenverstellung

Massagebereich Anzeige der Position des Massageroboters


Intensität Airbag Intensität:
Intensivität der Airbag-Massage in 3 Stufen einstellbar

Füße Fußroller: 3 Intensitätsstufen

Mehr

Zeiteinstellung


Zeiteinstellung in
5-Minuten Intervallen,
30 Minuten maximal

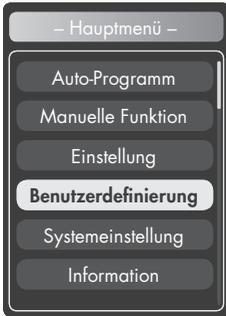

Benutzerdefinierung

Speicher 1 & 2

gespeicherte
Massageprogramme:
M1 & M2

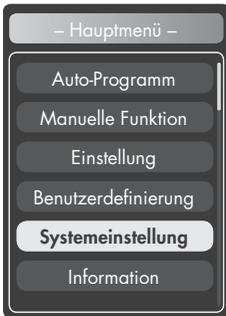

Systemeinstellung

Sprache

Sprache

Englisch

Deutsch

Französisch

Spanisch


Russisch

Polnisch

Hintergrund-
beleuchtung

Displaysperre

Fernbedienung

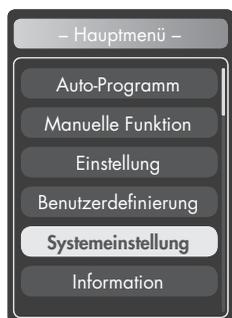

▶ **Systemeinstellung**

Sprache

Hintergrund-
beleuchtung

Standby-By Sperrbildschirm.
Einstellungsmöglichkeiten:

- 15 Sekunden
- 30 Sekunden
- 1 Minute
- 2 Minuten
- 3 Minuten
- Nie

Displaysperre



▶ **Information**

Seriennummer Hier finden Sie die Seriennummer Ihres Sessels.

Inbetriebnahme

1 – ANBRINGEN DER SEITENTEILE

- a) Zunächst nehmen Sie die Verbindungsstecker und den Luftschlauch, welche sich an der Seite des Sitzteils befinden (Abbildung 1).
- b) Nachdem Sie den Verbindungsstecker und den Luftschlauch durch die Metallvorrichtung geführt haben, verbinden Sie nun jeden Anschluss mit dem dazugehörigen Gegenstück der Armlehne. Achten Sie beim Einstecken der Kabel darauf, immer die gleichen Farben zusammenzustecken! (Abbildung 2 & Abbildung 3).

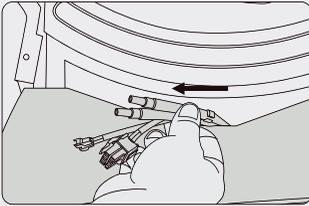


Abbildung 1

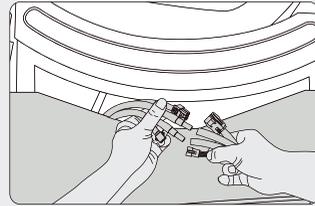


Abbildung 2

- c) Wenn Sie die Anschlüsse miteinander verbunden haben, umhüllen Sie die Verbindungen mit dem Stoffmantel welcher an der Armlehne unter den Verbindungen befestigt ist. Führen Sie den Überstand der Anschlüsse zurück in das Sitzteil. Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Steckverbindungen und den Luftschlauch nicht knicken oder einklemmen. (Abbildung 4)

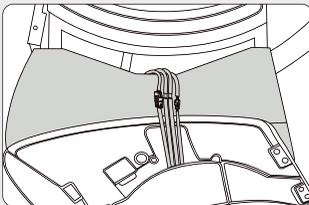


Abbildung 3

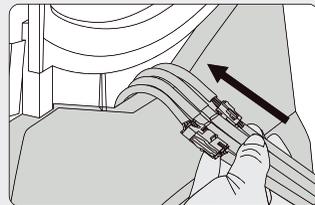


Abbildung 4

- d) Positionieren Sie die Hinterseite des Seitenteils überlappend mit den Löchern am Sessel und befestigen dieses jeweils mit 2 Schrauben welche im Lieferumfang inbegriffen sind. (Abbildung 5)
- e) Anschließend nehmen Sie die Zierde Blende und klippen diese in die Aussparung über die Schrauben. Beachten Sie, dass die Blenden auf der Innenseite mit Rechts und Links markiert sind. (Abbildung 6)

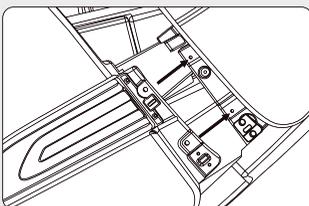


Abbildung 5

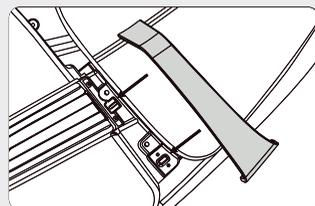


Abbildung 6

Inbetriebnahme

Nun befestigen Sie die beiden Seitenteile an der Vorderseite des Sessels. Hierfür benötigen Sie jeweils zwei Schrauben. Positionieren Sie den Befestigungswinkel vom Seitenteil mit den zwei Löchern an der Vorderseite des Sitzteils, überlappend mit dem Befestigungsstück und schrauben Sie dieses fest. Beachten Sie hier, dass der Haken beim Seitenteil in das Verbindungsstück des Sessels einhakt bevor Sie dieses fest schrauben (Abbildung 7, Abbildung 8 & Abbildung 9).

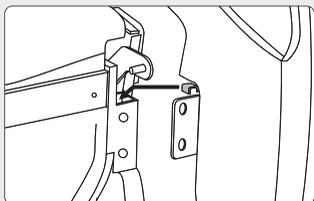


Abbildung 7

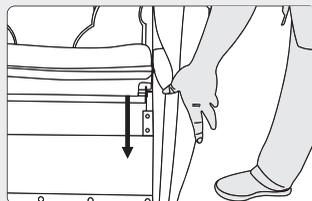


Abbildung 8

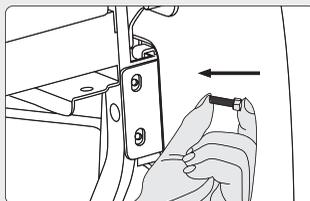


Abbildung 9

Wiederholen Sie diese Schritte auch auf der anderen Seite.

2 – ANBRINGEN DER FUSSTÜTZE

- Installieren Sie zunächst die rotierende Welle in die feste Achse. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung des R-Bolzen. (Abbildung 1)
- Nachdem die feste Achse ausgerichtet und verbunden ist (Abbildung 2), zusammenfügen.

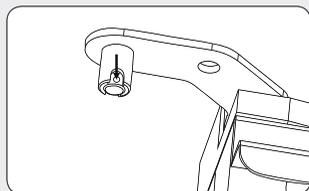


Abbildung 1

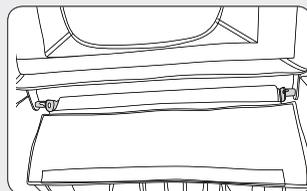


Abbildung 2

Inbetriebnahme

c) Schließen Sie wie in (Abbildung 3) den R-Bolzen auf der anderen Seite der Fußstütze.

d) Abgeschlossene Installation (Abbildung 4)

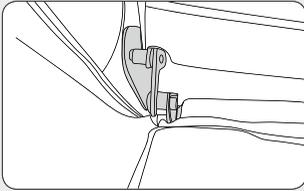


Abbildung 3

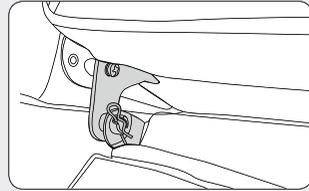


Abbildung 4

HINWEIS

- Um Verletzungen und Produktschäden zu vermeiden, sollte die Fußstütze während des Betriebs nicht von außen angehoben oder runter gedrückt werden. (Abbildung 1)
- Um eine unangenehme Sitzposition zu vermeiden, versichern Sie sich, dass der Massagemechanismus nicht im Sitzpolster stehen geblieben ist. (Abbildung 2)

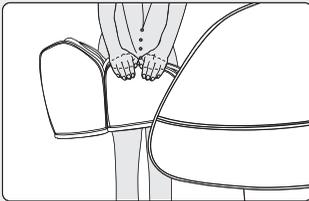


Abbildung 1


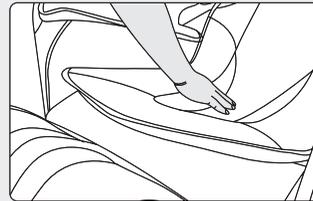


Abbildung 2

3 – ANBRINGUNG UND VERWENDUNG DES KOPF- UND RÜCKENKISSENS


Das Rückenkissen verbinden Sie bitte wie in (Abbildung 1) über dem praktischen Reißverschluss am Massagesessel. Das Kopfkissen befestigen Sie mithilfe der Klettstreifen am oberen Teil des Rückenkissens (Abbildung 2). Um das Rückenkissen zu reinigen, können Sie es problemlos durch den Reißverschluss vom Sessel trennen. Von einer Benutzung des Massagesessels ohne Kopf- und Rückenkissen raten wir dringend ab.

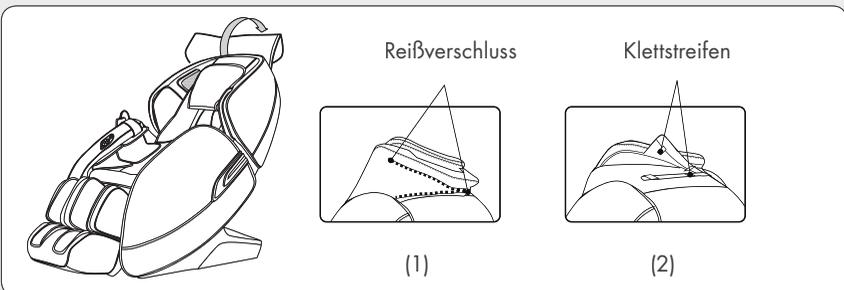

Inbetriebnahme

4 – BODENSCHUTZ

Um eine unmäßige Abnutzung Ihres Bodenbelages durch den gewichtigen Massagesessel abzuwenden, empfehlen wir Ihnen einen Teppich oder ähnliches unterzulegen.

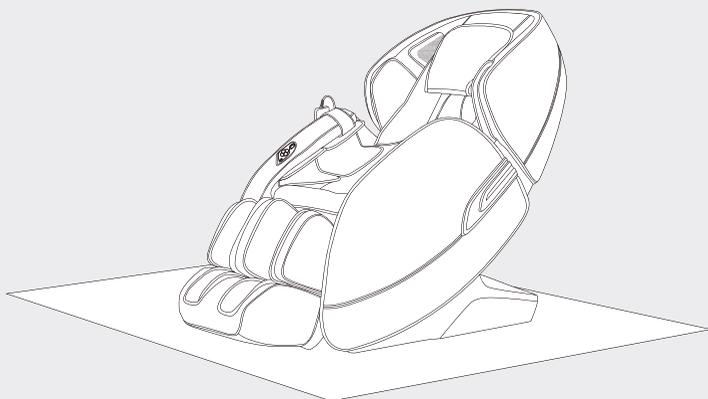


HINWEIS

Auf unebenen oder empfindlichen Bodenbelägen sollte der Massagesessel nicht geschoben, sondern von mindestens 2 Personen getragen werden. Heben Sie hierfür den Sessel an dem Eingriff im Rückenteil und Fußteil hoch, dabei klappt das Fußteil automatisch vollständig hoch.

5 – STROMVERSORGUNG ANSCHALTEN



Anschluss-
vorgehensweise

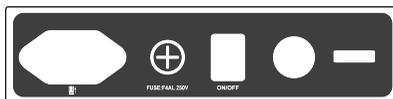

Schalter der Stromversorgung

Inbetriebnahme

6 – MASSAGE BEENDEN

- Beim Betätigen der Power-Taste während der Massage stoppen sämtliche Massagefunktionen, Rückenlehne sowie Fußstütze fahren in ihre Ausgangsposition zurück.
- Trennen Sie den Massagesessel nach der Nutzung von der Stromzufuhr.




Schalterstellung und Stromversorgung



Anschlussvorgehensweise

7 – TRANSPORT

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel weit vom Boden weg sind. Schieben Sie den Stuhl an der Rückenlehne zur gewünschten Position und stellen Sie ihn vorsichtig wieder auf.

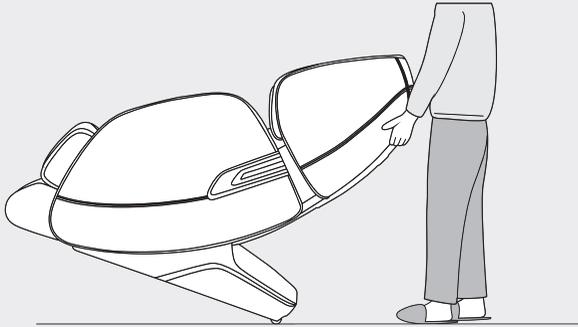

HINWEIS

Vor dem Transport muss die Stromversorgung ausgeschaltet und das Netzkabel mit dem Kabel der Fernbedienung ausgesteckt sein.

Besonderheiten

SHIATSU

SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massage-technik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

2D

2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massage-technik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



FLATTERN

Durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand wird die Durchblutung der Muskulatur und die Straffung des Bindegewebes gefördert, gleichzeitig Verspannungen gemindert.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.



KNETEN UND FLATTERN

Eine Massagekombination aus Kneten und Flattern.



STRECKMASSAGE RÜCKEN

Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat.

Besonderheiten



ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



CARBON WÄRME

Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.



GUA SHA

Das Schaben mit leichtem Druck öffnet die oberflächlichen Blutgefäße und regt die Durchblutung an. GuaSha wird gerne in Kombination mit Akupressur angewendet, um über die „Shu Punkte“ zusätzliche Reize auszulösen, welche zur Linderung von Beschwerden führen.



LUFTDRUCK

Auf- und abschwellige Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich



BLUETOOTH

Kabellose Datenübertragung.



BRAINTRONICS

Die braintronics Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.



L-FORM

Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.

Besonderheiten



S-FORM

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



PLATZSPAREND

Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!



SCHWERELOS POSITION

Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „SchwereLos-Gefühl“.



AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.



SPEICHER

Mit der intelligenten Speicher Funktion erinnert sich Ihr Massagesessel genau an Ihre Lieblingsmassage und startet direkt ohne den Scanvorgang.



RÜCKENBEREICH

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



EINSTELLBARE FUSSTÜTZE

Die Fußstütze kann verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



SCHNELLZUGRIFF

Mit der Schnellstart Bedienung in der Armlehne immer die wichtigsten Funktionen mit einem Griff steuern.

Besonderheiten



EINSTELLBARES KISSEN

Bei Bedarf kann das doppelte Kissen angebracht werden, um die Nacken- und Schultermassageintensität zu reduzieren.



LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.



MASSAGEHÄNDE GEFÜHL

Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hände des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad bis zu 6,5cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust- und Lendenwirbel effektiv massieren.



SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Diese Scanfunktion erfasst Ihre Schulterhöhe. Diese kann manuell nachgestellt werden, sollte der Scan nicht passend sein.



LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.



LUFTBEREICH

Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper / Arme / Beine).



PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

Besonderheiten



WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



MUSIK

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



AKUPRESSURPUNKTE

Entscheidende Akupressurpunkte (an den Oberschenkeln, Waden und Knöcheln) werden massiert.



O₂ IONIZER

Die Umgebungsluft wird von Schadstoffen neutralisiert und lässt Sie während der Massage gereinigten Sauerstoff atmen.



USB LADEGERÄT

Während Sie sich entspannt massieren lassen, kann der integrierte USB-Anschluss z. B. Ihr Smartphone mit Strom versorgen.

Störungssuche

STÖRUNG

- Bei Betrieb ertönt das Geräusch des Motors.
- Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig
- Das Gerät stellt den Betrieb ein.
- Braintronics-Programme lassen sich nicht starten.

ERKLÄRUNG

- Es ist ein normales Betriebsgeräusch.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig in die Steckdose gesteckt und dass der Stromschalter angeschaltet wurde. Überprüfen Sie das Kabel der Fernbedienung.
- Nach Erreichen der voreingestellten Laufzeit oder nach zu langer Nutzungsdauer schaltet sich der Sessel automatisch ab. So wird die längere Lebensdauer des Sessels gesichert.
- Vergewissern Sie sich, dass die braintronics-App installiert und Ihr Konto aktiviert ist. Kontrollieren Sie außerdem, ob eine Bluetooth®-Verbindung zwischen Smartphone und Massagesessel besteht.

Lagerung / Pflege

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, dann sollte das Stromkabel aufgewickelt werden und das Gerät sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie das Gerät niemals bei hoher Temperatur oder in der Nähe von offenem Feuer auf, vermeiden Sie eine langfristige Aussetzung unter Sonnenlicht.
- Verwenden Sie bei der Reinigung bitte nur handelsübliche Kunstlederpflege. Reinigen Sie es zu keiner Zeit mit Verdünnern, Benzole oder Alkohole.
- Steht das Gerät auf einer ungeraden Flächen, dann rollen oder schieben Sie es nicht; heben Sie es, um es zu bewegen.
- Bitte machen Sie nach der Benutzung Pausen und benutzen Sie das Gerät nicht mehrere Male ohne Unterbrechung hintereinander.

Technische Daten

Maße:	aufrecht: 81 x 119 x 147 cm liegend: 81 x 92 x 176 cm
Gewicht:	96 kg
Spannung:	220-240V ~ 50/60Hz
Nennleistung:	150 W
Laufzeit:	20 Minuten
braintronics:	21 Minuten
Zertifikate:	



EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.