

< relax in style

  
**CASADA**  
health & beauty



*Tade*  
with heating

**QUATTROMED III**





## < relax in style

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA -Geräte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

## *WIR GRATULIEREN*

---

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Quattromed III.

## *INHALTSVERZEICHNIS*

---

4	Sicherheitshinweise
4	Inbetriebnahme
5	Technische Daten
5	Ausstattung / Funktionen
7	Fernbedienung
8	Massagetechniken
8	Störungssuche
9	Pflegehinweise
9	Lagerung
9	EU-Konformitätserklärung
9	Gewährleistungsbestimmungen

# SICHERHEITSHINWEISE

---



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

- Dieses Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsach-gemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden. Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr. Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Min. nicht überschreiten.
- Verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: junge Verletzungen, trombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Das Gerät nicht während der Autofahrt verwenden.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln wie z.B. Herzschrittmachern sein, konsultieren Sie auf jeden Fall **vor der Massage** ärztlichen Rat.

## INBETRIEBNAHME

---

### ENTFERNEN DER SICHERUNGSSCHRAUBE

Lösen Sie vorsichtig mit dem beigelegten Imbusschlüssel die Schraube auf der Rückseite des Massagegerätes. Entfernen Sie die Schutzhülle und verbinden Sie den Stecker mit dem Adapter. Achtung! Die Schraube wird nicht wieder eingesetzt!

### ANSCHLIESSEN DES KABELS

Verbinden Sie den Adapter mit dem Massagegerät und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie nun das Massagegerät über die Fernbedienung ein.

# TECHNISCHE DATEN

**Maße:** 75 x 46 x 8 cm  
**Gewicht:** 7,8 kg  
**Spannung:** Eingang: AC 100-240V ~ 50/60Hz  
Ausgang: DC 12V 3500 mA  
**Nennleistung:** 42 Watt  
**Laufzeit automatisch:** 15 Minuten  
**Zertifikate:**



## AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN



Im neuen Quattromed III wurden die sonst üblichen Kunststoff-Massageköpfe durch solche aus echter Jade ersetzt. Die natürlichen Kräfte der Jade werden durch eine integrierte Tiefenwärme noch verstärkt, die Massage wird intensiviert. Die Wärme durchdringt nur langsam den Stein, erst nach wenigen Minuten wird Sie spürbar.

Während dieser Aufheizphase lockert die rotierende Bewegung der Massageköpfe bereits das Gewebe und löst die oberflächlichen Verhärtungen und Verspannungen. Die zuschaltbare Vibration ermöglicht zusätzlich, den Kreislauf und das Lymphsystem anzuregen. Die Durchblutung wird nachhaltig verbessert, die Entschlackung erleichtert.

Bitte positionieren Sie ihr Quattromed III für die Massage auf einem stabilen Stuhl oder Sessel. Die Belastung durch das Körpergewicht intensiviert die Massagewirkung. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich mit dem gesamten Körper zentrieren, damit die Massageköpfe parallel zur Wirbelsäule laufen. Bei der Rollmassage können Sie den Abstand der Massageköpfe zur Wirbelsäule per Fernbedienung einstellen.



# AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Nach 15 Minuten schaltet sich der Massagebetrieb selbsttätig ab. Um die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen, schalten Sie die Massageköpfe erst wieder ein, wenn mindestens 30 Minuten vergangen sind. So haben die Motoren Zeit, wieder abzukühlen. Auch Ihrem Körper sollten Sie eine solche Ruhepause gönnen. Wir empfehlen, die Massage nur zwei-, höchstens dreimal am Tag durchzuführen, um auch die Muskulatur nicht zu stark zu beanspruchen.




Zu Ihrer Sicherheit statten wir alle Geräte mit einem Überhitzungsschutz aus. Unter starker Belastung und hohem Anpressdruck entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, schalten sich die Geräte automatisch aus und lassen sich auch erst nach einer angemessenen Wartezeit, die zwischen 30 und 40 Minuten liegt, wieder einschalten.

## FÜR DEN MOBILEN GEBRAUCH:



Sie erhalten zusätzlich zum Quattromed III einen 12 V Adapter für den mobilen Gebrauch.



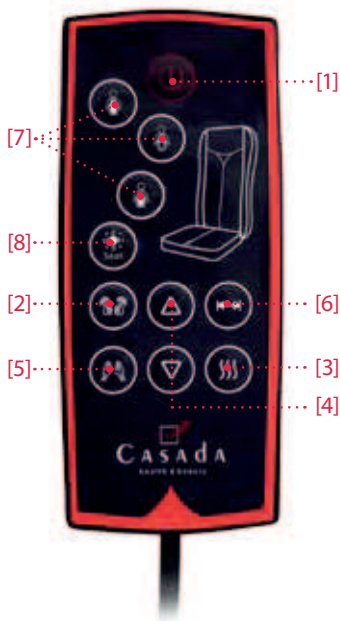

## [1] Start/Stop (ON/OFF)

Durch Betätigen der Power Taste starten Sie die 15-minütige Massage. Für das vorzeitige Beenden der Massage, drücken Sie nochmals Power – der Mechanismus fährt automatisch in die untere Ruheposition zurück.

## [2] Shiatsu

Betätigen Sie die Taste Shiatsu um diese Massage-technik ein-, bzw. auszuschalten.

## [3] Heat

Bei eingeschalteter Shiatsu-Massage werden die Massageköpfe durch drücken der Heat-Taste beheizt.

## [4] Spot

Diese Funktion steht nur während der Shiatsu-Massage zur Verfügung. Durch drücken der Tasten Spot up und Spot down können Sie die Massageköpfe aufwärts und abwärts bewegen. Nochmaliges betätigen der jeweiligen Taste stoppt den Mechanismus an der gewünschten Stelle.

## [5] Rolling

Rolling startet bzw. stoppt die auf- und abwärts laufende Rollenmassage.

## [6] Width

Mit der Taste WIDTH verändern Sie während der Rollenmassage den Abstand der Massageköpfe. (Nur im Rollingmodus möglich).

## [7] Full/Upper/Lower

Die Taste FULL ermöglicht eine Massage im gesamten Rückenbereich. Mit upper wird die Massage auf den Schulter-, Nackenbereich begrenzt. Lower lässt die Massage im Rücken-, Lendenbereich erfolgen.

## [8] Seat Vibration

Seat startet bzw. stoppt die Vibrationsmassage im Sitz.

# MASSAGETECHNIKEN

## SHIATSU/KNEADING

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massage-technik besteht aus sanften rhythmischen tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel, einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



## VIBRATION

Die Vibration versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.



## ROLLING

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



## HEATING

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



## STÖRUNGSSUCHE

### Störung

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Bedienfeld funktionieren.

### Behebung

- Kontrollieren Sie die Verbindung zum Adapter.
- Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie deshalb es aus und lassen es 30-50 Minuten abkühlen.



Durch regelmäßige Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Quadromed III und sorgen gleichzeitig für allzeit sicheren Betrieb.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flamme vom Quadromed III fern.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
4. Trennen Sie das Quadromed III, wenn es nicht im Gebrauch ist, vom Stromnetz.

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---

Entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/EC.

## GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

---

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit. Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind. Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0  
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright (c) 2014 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

