



Wir gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Eve.

Sicherheitsbestimmungen

Dieses Gerät ist wartungsfrei. Eventuell erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.

Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 15 Min. nicht überschreiten.


Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: akute Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.

Lieferumfang

- Massagegerät Eve
- Batterien 3 x 1,5 V AAA

Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Abdeckung wie unten beschrieben gegen den Uhrzeigersinn und setzen Sie die Batterien ein. Schließen Sie die Abdeckung.

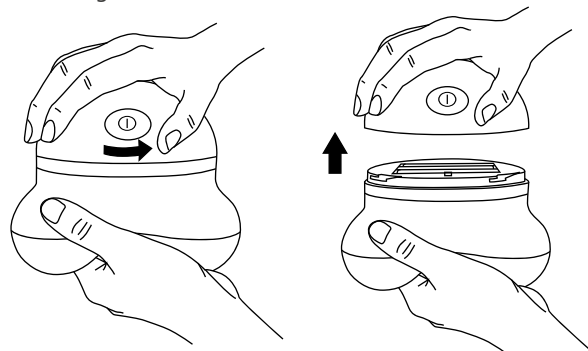

Technische Daten

Maße: 97 x 99 x 91 mm
 Gewicht: 172 g
 Nennleistung: 1,8 W
 Batterien: 3 x 1,5 V AAA
 Spritzwassergeschützt nach IPX5
 Zertifikate:



VIBRATION

Ausstattung / Funktionen


Modernes Design, eine angenehme Haptik und überall einsetzbar. Ein kleines Massagegerät mit großer Wirkung. – Das ist Eve!

Durch die drei beleuchteten Massagearme und der gezielten Vibration wird eine punktgenaue und angenehme Massage erzielt. Das Gerät lässt sich einfach und sicher an individuellen Körperpartien wie Rücken, Nacken, Arme und Beine anwenden. Die Massage regt den Blutkreislauf an, löst Verspannungen und fördert die Durchblutung. Das belebt den Körper und aktiviert neue Energie.

Aufgrund seiner Größe und ergonomischen Form passt „Eve“ in jede Handtasche und kann so als ständiger Begleiter für eine Massage zwischendurch bspw. im Büro, im Flugzeug oder auch unterwegs, eingesetzt werden.



Bedienfeld

Betätigen Sie die  Taste um das Eve zu starten. Um die Massage zu beenden die Taste nochmals drücken.

Störungssuche

Fehler
 Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden

Die Massage ist zu „schwach“

Behebung
 Prüfen Sie ob die Batterien richtig herum eingelegt sind.

Wechseln Sie die Batterien.

Wechseln Sie die Batterien.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Garantiebestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH
 Obermeiers Feld 3
 33104 Paderborn, Germany
 info@casada.com
 www.casada.com



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.
 Alle Rechte vorbehalten.