

# MAXIWELL






# INHALTSVERZEICHNIS

---

- 5 Sicherheitshinweise
- 6 Medizinische Hinweise
- 7 Pflegehinweise
- 7 Garantiebestimmungen
- 7 Technische Daten
- 8 Anwendungsbereiche
- 9 Steuerung durch die Fernbedienung
- 9 Für den mobilen Gebrauch
- 10 Funktion
- 11 EU-Konformitätserklärung

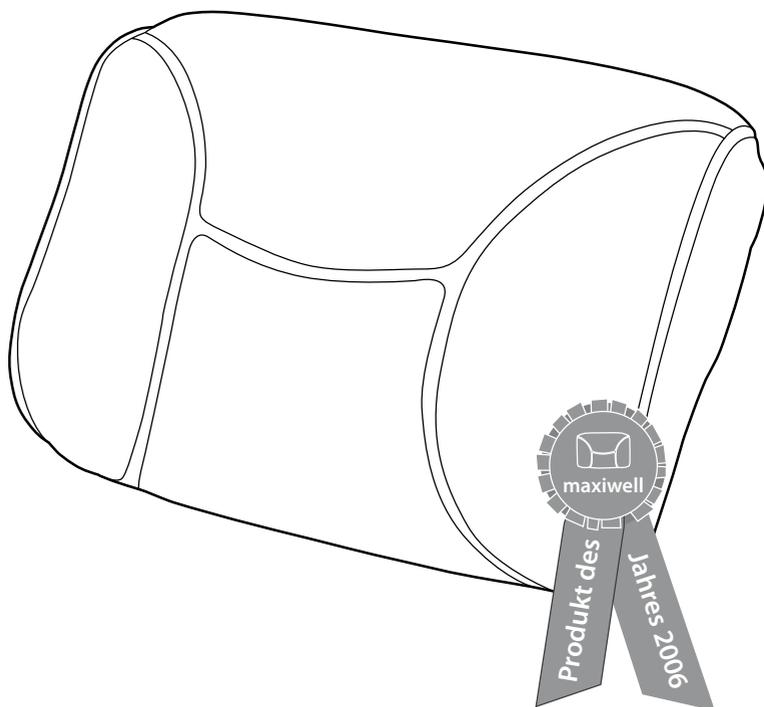



## WIR GRATULIEREN

---

Mit dem Kauf dieses Massagegeräts haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorteile dieses Systems nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **MAXIWELL**.

# SICHERHEITSHINWEISE

---

Lesen Sie die Sicherheitsvorschriften sehr sorgfältig, bevor Sie dieses Massagegerät für eine sinngemäße Funktion verwenden. Wenn Sie irgendwelche dieser gesundheitlichen Zustände betreffen sollte, die nachstehend aufgeführt werden, suchen Sie bitte Beratung bei den jeweiligen Ärzten, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.

## **Wenn Sie:**

- an einer akuten Krankheit leiden
- an einer Herzkrankheit leiden
- an Osteoporose leiden
- sich in einer Schwangerschaft befinden
- einen bösartigen Tumor haben
- Wahrnehmungsstörung haben
- unter ärztlicher Behandlung stehen
- körperbehindert sind

**ACHTUNG!** Greifen Sie nicht mit Ihren Fingern in die Massageköpfe, um Unfälle zu vermeiden.

Das selbständige Öffnen des Gerätes ist aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt.

Wenn Beschwerden während des Gebrauchs des Gerätes auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, erlauben Sie nicht Ihren Kindern das Gerät unbeaufsichtigt zu bedienen.

Stellen und benutzen Sie das Gerät nicht an Orten, die Wasser und Höchsttemperaturen ausgesetzt sind.

Benutzen Sie keine beschädigte Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.

Vermeiden Sie das Ziehen, Verdrehen oder Treten gegen das Gerät. Außerdem vermeiden Sie das Platzieren von Schweren Gegenstände auf ihm.

Vergewissern Sie sich nach Gebrauch oder nach längerer Nichtinbetriebnahme, ob die Verbindung getrennt ist, um eine Gefahr eines elektrischen Schlags, Kurzschlusses oder Feuers zu vermeiden.

# SICHERHEITSHINWEISE

---

Bei Disfunktion des Gerätes trennen Sie sofort die Verbindung.

Vermeiden Sie das Berühren des Steckers mit nassen Händen.

Bedienen Sie das Gerät nicht direkt nach dem Essen, es könnte Übelkeit hervorgerufen werden.

Die Massagezeit sollte die empfohlene Zeit von 30 Minuten nicht überschreiten, um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden.

# MEDIZINISCHE HINWEISE

---

Wenn Ihnen Ihr Arzt/Orthopäde die Rückenmassage nicht ausdrücklich verboten hat, können Sie ohne Bedenken die Massage des Massagegerätes genießen.

Massieren sollte niemals als unangenehm empfunden werden.

Übertriebene Massagen können den Körper auch schädigen.

Schwangere, Kranke und Kinder sollten das Gerät nicht benutzen. Bei Verletzungen der Wirbelsäule oder nach Operationen kann eine Massage gefährlich sein. Im Zweifelsfall sprechen sie vorher mit Ihrem Arzt.



# PFLEGEHINWEISE

---

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Vermeiden Sie direkte Sonneneinwirkung und Feuchtigkeit. Behandeln Sie das Massagegerät regelmäßig mit geeigneten Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem Gerät haben.

# GARANTIEBESTIMMUNGEN

---

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Garantiezeit.

Der Garantieanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Garantie beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Garantie übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Garantieverlangen einen nicht von der Garantie erfassten Fehler betrifft oder dass die Garantiefrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

# TECHNISCHE DATEN

---

Spannung: AC ~ 230 V 50 Hz, 14,4 Watt

empfohlene Laufzeit: manuell 15 Minuten

Maß: 32 x 45 x 11 cm

Gewicht: 4 kg

Zertifikate:




# ANWENDUNGSBEREICHE

- Entlastet Sie bei Schmerzen und Muskelverhärtungen im Rücken.
- Entspannt ermüdete und gestresste Muskeln, besonders nach sportlicher Aktivität.
- Erleichterung bei Verspannungen und Verkrampfungen im Schultern- und Nackenbereich.



# STEUERUNG DURCH DIE FERNBEDIENUNG

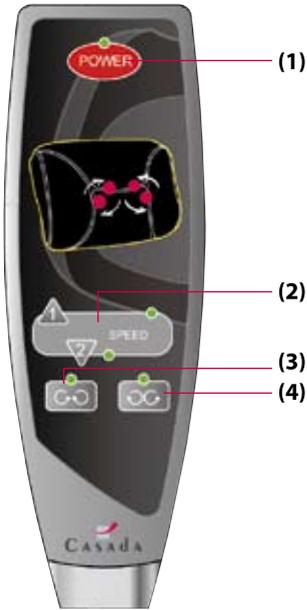

- (1) Massagegerät starten (Power)
- (2) zwei Geschwindigkeitsstufen
- (3) Massagerichtung (Rechts)  
Die Massageköpfe drehen sich von außen nach innen.
- (4) Massagerichtung (Links)  
Die Massageköpfe drehen sich von innen nach außen.

# FÜR DEN MOBILEN GEBRAUCH



Sie erhalten zusätzlich zum Massage Kissen einen 12 V Adapter für den mobilen Gebrauch.



# FUNKTION

Das **MAXIWELL** ist ein eleganter Begleiter auf Ihrem Weg zur Entspannung. Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie zwischen zwei Intensitätsstufen wählen und die Richtung der vier Massageköpfe bestimmen.

Die vier ergonomisch angeordneten Massageköpfe des **MAXIWELL** massieren durch wohltuende, kreisende Bewegungen Ihren Körper. Durch seine praktische Größe kann es nahezu jeden Körperteil effektiv massieren, und findet auch aufgrund seines Adapters problemlos einen Lieblingsplatz in Ihrem Auto, LKW oder im Büro. Lassen Sie sich vom **MAXIWELL** verführen und genießen Sie eine Massage die Sie verzaubern wird.



# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

---

Entspricht den europäischen Richtlinien 89/336/EEC und 93/68/EEC.

---

## **Casada Group GmbH**

Obermeiers Feld 3

33104 Paderborn, Germany

tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0

fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30

Email: [info@casada.de](mailto:info@casada.de)

Internet: [www.casada.de](http://www.casada.de)

[www.casada.com](http://www.casada.com)

## **Copyright**

Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada Group GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

**Copyright (c) 2008 Casada Group GmbH.**

**Alle Rechte vorbehalten.**

# time to *relax*

WITH CASADA

