


# MEDI GUN

**MANUAL**

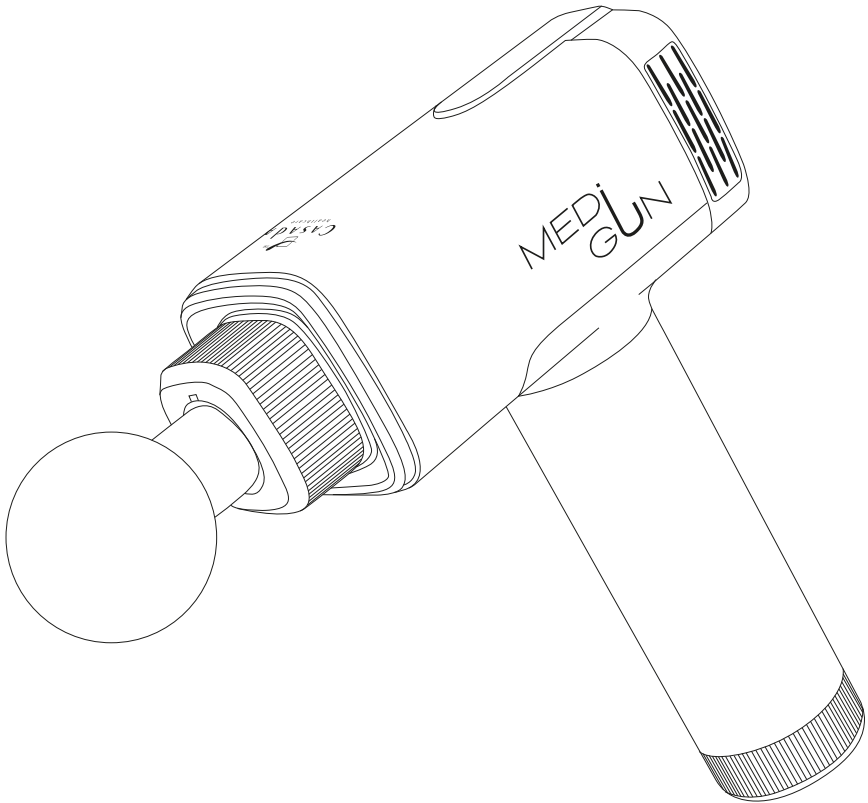

# DAS PRODUKT

MediGun von Casada ist ein kabelloses, hochmodernes Massagegerät, das hilft, Muskelkater und Verspannungen zu reduzieren, die Durchblutung zu fördern, die Beweglichkeit zu optimieren und die allgemeine Verfassung der Bewegungsorgane im Körper zu verbessern.

## AUSSTATTUNG | TECHNISCHE DATEN



- 1 MediGun mit leistungsstarkem bürstenlosem High-Tech-Motor
- 2 Austauschbare Aufsätze für den Kopf (x4) – Gabel, Patrone, Platte, Ball
- 3 Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (mehr als 3 – 4 Stunden bei voller Ladung)
- 4 Geschwindigkeitsanzeige
- 5 Einstellmöglichkeit für den optimalen Druck
- 6 Batterieanzeige
- 7 AC-Schnittstelle
- 8 Ein/Aus-Schalter

### TECHNISCHE DATEN

**Frequenz:** Stufe 1 – 30Hz / Stufe 2 – 40Hz / Stufe 3 – 53Hz

**Gewicht:** 1,0kg

**Spannung:** 110–240V, 50/60Hz – 5A, 26V – DC – 1A

# GEBRAUCHSANWEISUNG



## BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

### LADEN DES AKKUS

- Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung bis zu sechs Stunden lang vollständig auf.
- Verbinden Sie zum Laden das DC-Ende des mitgelieferten 26V-Adapters mit dem Ladeanschluss der Batterie und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose, schalten Sie dann den Netzschalter in die Position ON zum Laden.
- Der Ladezustand der Batterie und der Ladevorgang werden durch Blinken der LEDLeuchte angezeigt.
- Sobald alle LEDs aufhören zu blinken und dauerhaft leuchten, zeigt dies an, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Der Akku kann jederzeit und bei jedem Akkuladezustand aufgeladen werden.
- Wir empfehlen Ihnen jedoch nicht, den Akku bis zur roten LED vollständig zu entladen.
- Die durchschnittliche Laufzeit dieses Geräts beträgt ca. 2 Stunden, abhängig von der Geschwindigkeit und dem Druck während des Betriebs.

### BEDIENUNG

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter an der Unterseite der Batterie auf die Position „ON“, um das Gerät zu starten. Zum Ausschalten stellen Sie den Schalter auf „OFF“.
2. Bei eingeschaltetem Gerät den Geschwindigkeitsknopf einmal kurz drücken, um das Gerät auf Stufe eins zu schalten, zweimal, um das Gerät auf Stufe zwei und dreimal auf Stufe drei zu schalten. Durch erneutes Drücken des Geschwindigkeitsknopfs wird das Gerät ausgeschaltet. Die blauen LED-Leuchten zeigen den entsprechenden Frequenzbereich an.
3. Massieren Sie den gewünschten Körperabschnitt mit der gewünschten Geschwindigkeit und wenden Sie bei Bedarf den entsprechenden Druck an.
4. Wenn Sie das Gerät ausschalten, können Sie den Massagekopf mit der Hand herausziehen und wechseln.

### PFLEGE, REINIGUNG & LAGERUNG

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Lappen und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.

# HAFTUNGSAUSSCHLUSS

## WARNHINWEISE

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fern. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz sind.
- Lösen Sie keine Schrauben und versuchen Sie nicht, diese zu entfernen.
- Bitte überschreiten sie den Dauereinsatz von mehr als einer Stunde nicht. Vor der Wiederinbetriebnahme das Gerät 30 Minuten ruhen lassen.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden oder vor dem Gebrauch vom Geräteakku.
- Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet. Im Verletzungsfall ist der Gebrauch zu unterlassen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

## SICHERHEITSHINWEISE

### WARNUNG

**Um die Risiken von Stromschlag, Feuer und Verletzungen zu vermeiden, darf dieses Produkt nur in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen eingesetzt werden:**

- Ausschließlich nur für den Gebrauch durch Erwachsene.
- Die Anwendung erfolgt ausschließlich auf einer trockenen, sauberen Körperoberfläche über der Kleidung durch leichtes Drücken und Bewegung über den Körper für ca. 60 Sekunden pro Region.
- Verwenden Sie die MediGun nur auf weichem Körpergewebe nach Ihren Wünschen, ohne dabei Schmerzen oder Unannehmlichkeiten zu verursachen. Nicht auf dem Kopf oder an harten oder knöchernen Stellen des Körpers anwenden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Applikatoren, die den gewünschten Effekt erzielen.
- Druckstellen können unabhängig von der Einstellung der Steuerung oder dem angewandten Druck auftreten. Überprüfen Sie die behandelten Stellen regelmäßig und stoppen Sie sie sofort bei ersten Anzeichen von Schmerzen oder Unannehmlichkeiten.
- Achten Sie darauf, dass Finger, Haare oder andere Körperteile von der Spindel und der Rückseite des Applikators fern bleiben, da es zu Quetschungen kommen kann.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen der MediGun.
- Eindringen von Wasser in die Lüftungsöffnungen der MediGun vermeiden.
- Lassen Sie die MediGun nicht fallen und verwenden Sie sie nicht unsachgemäß.
- Nur mit dem mitgelieferten 24VDC MediGun Ladegerät aufladen.
- Prüfen Sie das Gerät und den Akku vor jedem Gebrauch sorgfältig.
- Manipulationen oder Veränderungen an MediGun sind nicht zulässig.
- Lassen Sie die MediGun niemals unbeaufsichtigt in Betrieb oder aufladen.

### KONTRAINDIKATION

**Bitte verwenden Sie die MediGun nicht, ohne vorher die Genehmigung Ihres Arztes einzuholen, wenn eine der folgenden Beschwerden vorliegt:**

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautentzündung, Herzschrittmacher, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfälle, Spondylolisthese oder Spondylose, kürzliche Gelenkersatz oder IUP's, Metallstifte oder -platten oder irgendwelche Bedenken

bezüglich Ihrer körperlichen Gesundheit. Schwache Personen und Kinder sollten bei der Verwendung der MediGun von einem Erwachsenen betreut werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie kein Vibrationsgerät verwenden können, aber wir empfehlen Ihnen, vorab einen Arzt aufzusuchen. Es wird kontinuierlich an den Auswirkungen von Vibrationstraining auf bestimmte medizinische Störungen geforscht. Dies wird voraussichtlich zu einer Kürzung der Liste der Kontraindikationen führen, wie oben gezeigt. Die praktische Erfahrung hat gezeigt, dass die Integration von Vibrationstraining in einen Behandlungsplan in einer Reihe von Fällen sinnvoll ist. Dies muss auf Anraten und in Begleitung eines Arztes, Spezialisten oder Physiotherapeuten geschehen

## GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit.

Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers.

Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

### **Wir Gratulieren!**

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness. Heute sind CASADA-Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.