

relaxmyway



MOODRELAX



CASADATM
healthcare

since
2000

< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir Gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge Ihres Sessels nutzen können, möchten wir Sie bitten die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **MoodRelax**.

Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
5	Kontraindikationen
6	Aufbau
8	Ausstattung / Funktionen
9	Fernbedienung
12	Besonderheiten
14	Technische Daten
14	Störungssuche
14	Lagerung / Pflege
15	EU-Konformitätserklärung
15	Gewährleistungsbestimmungen

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel verfügt über beheizte Bereiche. Personen, die empfindlich auf Wärme reagieren sollten vor der Benutzung vorsichtig sein. (ICE 60335-2-32)
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Reinigung und Wartung darf von Kindern unter 14 Jahren nicht ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder unter 14 Jahren, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.

Sicherheitshinweise

- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass sich darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder unter 14 Jahren.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.


Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt:
Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Ruhebedürftige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessel von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Dieses Produkt ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet.
- Kinder unter 14 Jahren sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass sie den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.

Aufbau

- Achten Sie darauf, dass der Sessel während des Aufbaus vom Stromnetz getrennt ist.
- Entfernen Sie die Schutzfolie nachdem der Sessel vollständig aufgebaut ist, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

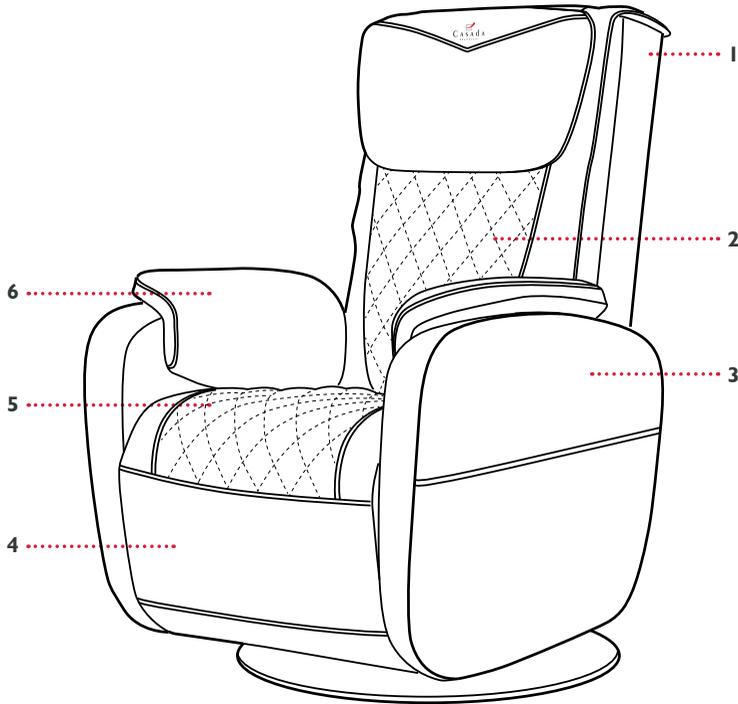

1 Rückenlehne

3 Seitenelement

5 Sitzkissen

2 Rückenpolster


4 Fußstütze

6 Armlehne

Aufbau


VOR DER INSTALLATION

Wenn Sie den Sessel aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass hinter dem Sessel genug Platz ist, um die volle Liegeposition zu erreichen.

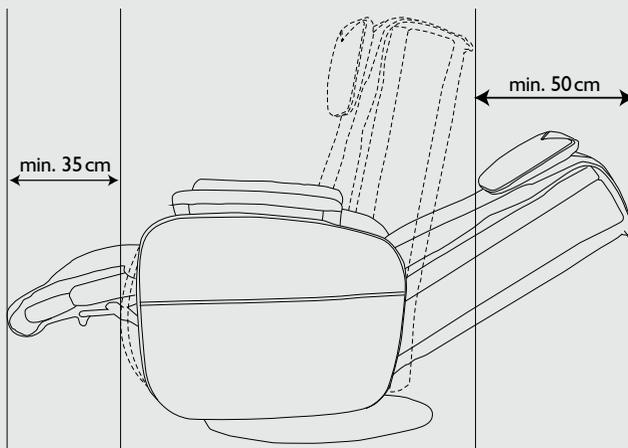

BEFESTIGEN DES RÜCKENPOLSTERS

Befestigen Sie das Rückenpolster (A) anhand des Klett- und Reißverschlusses (B).

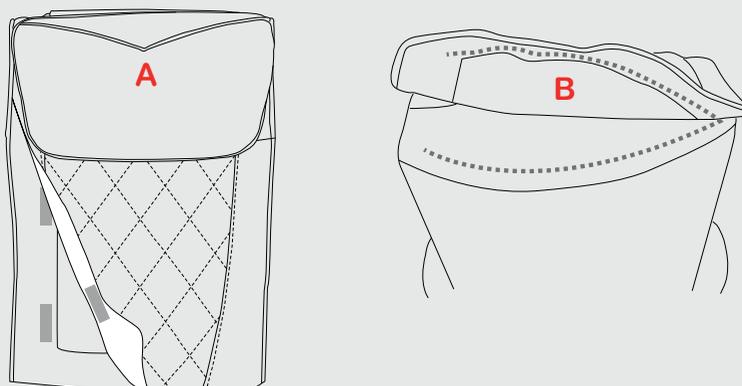


Aufbau

TRANSPORT

Ziehen Sie vor dem Transport des Sessels den Netzstecker! Transportieren Sie den Sessel am besten mit zwei Personen.

HINWEIS:

- Transportieren Sie den Sessel nicht, indem Sie nur an der Rückenlehne ziehen.
- Bewegen Sie den Stuhl niemals, wenn jemand darin sitzt.
- Legen Sie bei empfindlichen Fußböden eine Unterlage unter den Sessel, um Beschädigungen zu vermeiden.

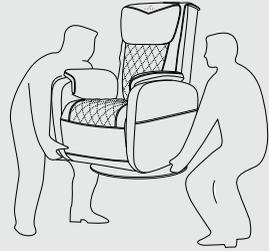

Ausstattung / Funktionen

Die verschiedenen Funktionen des Massagesessels werden von der integrierten Technik gesteuert. Massagetechniken wie Kneten, Klopfen, Schwedisch, Rollen und Vibration fördern die Durchblutung sowie den Stoffwechsel und lindern Ermüdungserscheinungen.


Der Sessel hat 5 verschiedene Massagetechniken die in den Automatikprogrammen kombiniert werden. Ebenso können Sie die diversen Massagefunktionen manuell miteinander kombinieren oder nur eine punktuelle Massage durchführen. Zuschaltbare Funktionen wie Vibration im Sitzpolster sowie im Wadenbereich und die Wärmefunktion im Lendenbereich ermöglichen ein vollendetes Massageerlebnis.

- Der Massagesessel hat eine speziell auf die menschliche Wirbelsäule abgestimmte Massageeinheit.
- Das eigens angepasste Rückenteil des Massagesessels ist von 115° bis 160° automatisch verstellbar. Gleichermaßen lässt sich die Fußstütze von 0° bis 90° verstellen.
- Nach 15 Minuten schaltet sich der Massagebetrieb selbsttätig ab. Um die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen, schalten Sie die Massageköpfe erst wieder ein, wenn mindestens 30 Minuten vergangen sind. So haben die Motoren Zeit, wieder abzukühlen.



Zu Ihrer Sicherheit stellen wir alle Geräte mit einem Überhitzungsschutz aus. Unter starker Belastung und hohem Anpressdruck entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, schalten sich die Geräte automatisch aus und lassen sich auch erst nach einer angemessenen Wartezeit, die zwischen 30 und 40 Minuten liegt, wieder einschalten.

Fernbedienung

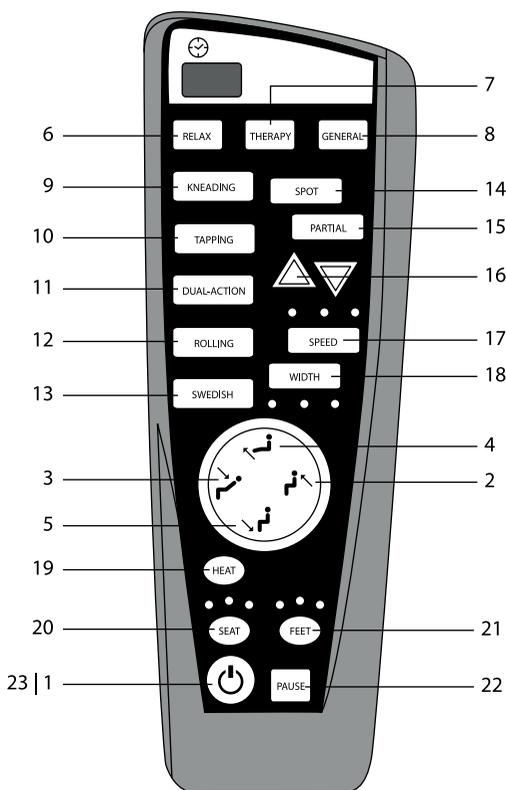

- [1] ON/OFF
- [2 | 3] Zurücklehnen/aufrecht stellen
- [4 | 5] Fußstütze anheben/absenken
- [6 | 7 | 8] Automatik Programme
- [9] Kneten
- [10] Klopfen
- [11] Kneten & Klopfen (Dual Action)
- [12] Rollen
- [13] Schwedisch
- [14] Punktuelle Massage (Spot)
- [15] Bestimmter Körperbereich (Partial)
- [16] Position der Massagerollen
- [17] Geschwindigkeit
- [18] Weite
- [19] Wärme
- [20] Sitz
- [21] Füße
- [22] Pause
- [23] Stop

Fernbedienung

Stecken Sie den Netzstecker in die in die Steckdose und schalten Sie den Hauptschalter auf "I".

[1] ON/OFF

Nach einmaligem Drücken dieser Taste befindet sich der MoodRelax im Bereitschaftsmodus. Wenn Sie jetzt eine beliebige Taste drücken, starten Sie die Massagefunktionen. Durch erneutes Drücken dieser Taste werden alle Massagefunktionen deaktiviert und die Massagerollen fahren in ihre Ausgangsposition zurück. Schalten Sie den Hauptschalter hinten am Sessel auf "O" und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HINWEIS: Der Winkel der Rückenlehne und der Fußstütze kann durch Drücken der  oder  an die gewünschte Position eingestellt werden.

[2 | 3] ZURÜCKLEHNEN/AUFRECHT STELLEN

Mit diesen Tasten können Sie die jeweils gewünschte Liege-, bzw. Sitzposition auswählen. Um Ihre Position festzustellen, drücken Sie diese Taste noch einmal.

[4 | 5] ANHEBEN/ABSSENKEN DES FUSSTEILS

Mit Hilfe dieser Tasten können Sie das Fußteil optimal einstellen. Um Ihre Position festzustellen, drücken Sie diese Taste noch einmal.

AUTOMATIKPROGRAMME FÜR DEN GESAMTEN RÜCKEN:

[6 | 7 | 8] AUTOMATIK PROGRAMME

Je nach Bedürfnis können Sie hier RELAX, THERAPY oder GENERAL als Massageprogramm auswählen.

MANUELLE PROGRAMME FÜR DEN GESAMTEN RÜCKEN:

[9] KNETEN

Starten/stoppen der Kneten Funktion. Hierbei können Sie die Massagegeschwindigkeit (Geschwindigkeit) in 3 Stufen einstellen.

[10] KLOPFEN

Starten/stoppen der Klopfen Funktion. Beim Klopfen können Sie den Abstand (Weite) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen und die Geschwindigkeit (Geschwindigkeit) in 3 Stufen anwählen.

[11] KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Mit dieser Taste starten/stoppen Sie die Kombination aus Knet- und Klopfmassage. Sie haben die Möglichkeit die Geschwindigkeit in 3 Stufen einzustellen.

[12] ROLLEN

Starten/Stoppen der Rollen Funktion. Sie können beim Rollen den Abstand (Weite) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen einstellen.

[13] SCHWEDISCH

Mit dieser Taste starten/stoppen Sie die Kombination aus Rollen- und Klopfmassage. Sie haben die Möglichkeit die Geschwindigkeit in 3 Stufen einzustellen.

Fernbedienung

PARTIELLE MANUELLE MASSAGE:

[14] PUNKTUELLE MASSAGE (SPOT)

Mithilfe dieser Taste können Sie die Massageköpfe auf- und abwärts an die gewünschte Stelle bewegen. Durch wiederholtes Drücken wird die Massage am ganzen Rücken fortgesetzt.

ACHTUNG: Diese Funktion ist beim Rollen nicht möglich.

[15] BESTIMMTER KÖRPERBEREICH (PARTIAL)

Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Abschnitte in einem Bereich von ca. 8 cm massieren lassen: Nacken-, Lendenwirbel- oder Unterkörperbereich.

[16] ▲ / ▼ POSITION DER MASSAGEROLLEN

Mit diesen Tasten können Sie die Massagerollen während der punktuellen bzw. partiellen Massage an dem gewünschten Rückenabschnitt positionieren.

[17] GESCHWINDIGKEIT

Mit der Geschwindigkeit-Taste können Sie die Geschwindigkeit der verschiedenen Massagen nach Ihrem Bedürfnis regulieren.

[18] WEITE

Regulieren Sie den Abstand der Massagerollen während der Klopfen oder Rollen Anwendung. Wählen können Sie zwischen Mittel (M), Schmal (S) oder Breit (B).

[19] WÄRME

Mit dieser Taste schalten Sie die Wärme-Therapie ein. Zum beenden der Anwendung drücken Sie erneut die Taste. Die Wärme-Therapie ist mit anderen Programmen kombinierbar.

[20] SITZ

Hiermit schalten Sie die Sitzflächenvibration ein. Es stehen drei Vibrationsstärken (low-middle-high) zur Verfügung, die durch drücken aktiviert werden. Durch erneutes drücken der Taste beenden Sie die Funktion.

[21] FÜSSE

Hiermit starten Sie die Vibration im Fußbereich. Es stehen drei Vibrationsstärken (low-middle-high) zur Verfügung, die durch drücken aktiviert werden. Durch erneutes drücken der Taste beenden Sie die Funktion.

[22] PAUSE

Mit dieser Taste unterbrechen Sie alle Massage Funktionen. Der Sessel befindet sich nun im Standby-Modus. Durch wiederholtes drücken wird die Massage fortgesetzt.

HINWEIS: Nach dem Betätigen einer Taste leuchtet im Display ein Timer auf. Wird keine weitere Taste betätigt, erlischt das Licht nach 4 Minuten.

[23] STOP

Alle Funktion werden gestoppt. Die Massagerollen fahren in Ihre Ursprungsposition zurück.

Besonderheiten



ROLLEN

Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



WÄRME

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.




VIBRATION

Die Vibration versetzt Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen, die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf im Gewebe.



KLOPFEN

Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.

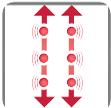

SCHWEDISCH

Hier werden die Techniken des Rollens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.




AUTOMATIK

Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.



GESCHWINDIGKEIT

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.

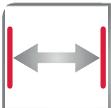

WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).

Besonderheiten




LIEGEPOSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.



PANORAMA BLICK

Mit dem 180° drehbaren Sockel den Überblick behalten und dennoch entspannen.

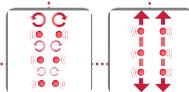

Technische Daten

Massagesessel:	MoodRelax
Maße aufrecht:	73 x 116 x 75 cm
Maße liegend:	73 x 70 x 160 x cm
Gewicht:	66 kg
Spannung:	AC 230 V ~ 50 Hz
Nennleistung:	123 Watt
Laufzeit automatisch:	15 Minuten
Laufzeit manuell:	30 Minuten

Zertifikate:



Störungssuche

STÖRUNG

Der Sessel ist am Stromnetz angeschlossen, aber weder Sessel noch Fernbedienung funktionieren.

Die Fernbedienung funktioniert, aber der Sessel reagiert nicht.

BEHEBUNG

- Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel
- Vergewissern Sie sich, dass der Schalter am Sessel auf „I“ steht.

Bei zu langem Gebrauch kann der Sessel überhitzen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn 30-40 Minuten abkühlen.

Lagerung / Pflege

- Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
- Nicht neben einer Heizung oder offenen Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Behandeln Sie die Oberflächen regelmäßig mit entsprechenden Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem haben.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

