



CASADA  
healthcare

< relaxmyway

QUATTROMED V





CASADA<sup>TM</sup>  
healthcare

since  
2000

## < relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte in den Bereichen Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA – Geräte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

# Wir gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Quattromed V.

## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise .....	4
Lieferumfang.....	5
Aufbau / Inbetriebnahme.....	6
Störungssuche.....	7
Besonderheiten .....	8
Fernbedienung.....	10
Lagerung / Pflege .....	12
Technische Daten .....	12
EU-Konformitätserklärung .....	12
Gewährleistungsbestimmungen .....	13

# Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

- Dieses Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantie- bzw. Gewährleistungsverlust.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose, um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, einem Servicevertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Min. nicht überschreiten.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: junge Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Das Gerät nicht während der Autofahrt verwenden.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln wie z.B. Herzschrittmachern sein, konsultieren Sie auf jeden Fall vor der Massage ärztlichen Rat.
- Das mitgelieferte Verpackungsmaterial sollte nicht als Spielzeug verwendet werden.

# Lieferumfang

- Netzteil 24 Volt
- Bedienungsanleitung
- Sitzteil
- Rückenteil
- Fernbedienung
- Inbusschlüssel




# Aufbau / Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie den Karton, entnehmen Sie das Netzteil und legen Sie es in Reichweite bereit.
2. Ziehen Sie die schwarze Stofftasche vorsichtig aus dem Karton, öffnen Sie den Reißverschluss und entnehmen Sie das in Schutzfolie verpackte Quattromed V und das Sitzkissen.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie.
4. Die Auflage / das Cover ist durch einen Klettverschluss und oben mit einem Reißverschluss trennbar vom Rückenteil. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Schutzkarton zwischen dem Cover und dem Gerät. Die gepolsterte Rückenauflage sorgt für eine sanftere Massage. Für eine intensive Massage, entfernen Sie die Rückenauflage.
5. Rücken- und Sitzteil sind zum Lieferzeitpunkt nicht miteinander verbunden. Für die parallele Nutzung nehmen Sie die Fernbedienung aus der Tasche am Sitzteil und befestigen Sie jetzt die beiden Teile über den angebrachten Reißverschluss. (Abbildung 1)
6. Stecken Sie anschließend die Kabel wie abgebildet zusammen. (Abbildung 2)
7. Positionieren Sie das Quattromed V auf einem geeigneten Stuhl oder Sessel. Das Massagerät ist mit einem Rückenriemen ausgestattet. Dieses ermöglicht Ihnen das Gerät fest an Ihrem Stuhl oder Sessel zu platzieren. Stellen Sie hierfür das Rückenteil des Massagerätes an die Lehne Ihrer Sitzgelegenheit, wickeln Sie den Rückenriemen darum herum und fixieren den Stand mit Hilfe des Klettverschlusses.
8. Verbinden Sie abschließend das Netzteil mit dem Anschlusskabel (Abbildung 3) am Rückenteil, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Quattromed V über die rote „ON/OFF“ – Taste ein.


## ENTFERNEN DER SICHERUNGSSCHRAUBE

Lösen Sie vorsichtig mit dem beigelegten Inbusschlüssel die Schraube auf der Rückseite des Massagerätes. Auf der Rückseite befindet sich eine Sicherheitsschraube um das Quattromed V während des Transports zu schützen. Bitte entfernen Sie diese vor dem ersten Gebrauch.


**ACHTUNG!** Die Schraube wird nicht wieder eingesetzt!

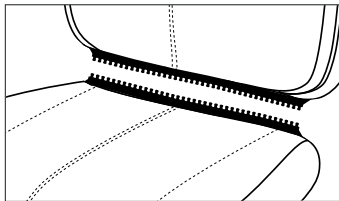

(Illustration 1)

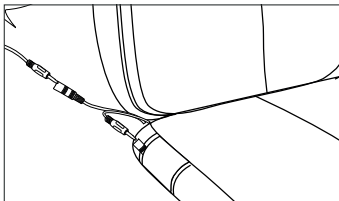

(Illustration 2)

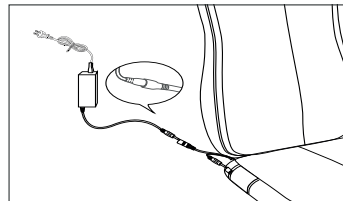

(Illustration 3)

# Störungssuche


## STÖRUNG

- Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, jedoch funktionieren weder Gerät noch Fernbedienung.
- Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen. Die Vibration im Sitzteil läuft und lässt sich nicht abstellen. Fernbedienung und Massage funktionieren nicht.
- Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen. Vibrationsmassage funktioniert nicht.


## BEHEBUNG

- Kontrollieren Sie, ob alle Steckverbindungen korrekt gepaart sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil vollständig verbunden ist.
- Bei dauerhaftem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie es deshalb ab, trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Kontrollieren Sie, ob die Steckverbindungen für die Vibration und Netzteil korrekt gepaart sind.
- Kontrollieren Sie, ob die Steckverbindung für die Vibration korrekt gepaart ist.


# Besonderheiten

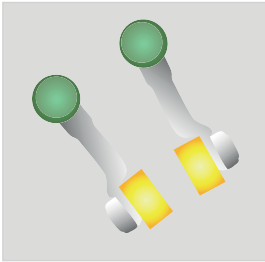

Das Quattromed V massiert Sie mit insgesamt vier Massageköpfen und den Massagetechniken „Shiatsu, Tapping, Kneading und Rolling“. Bewegliche Silikonmassageköpfe sowie zwei weitere feststehende Massageköpfe kümmern sich um die Entlastung und mineralisierende Versorgung der Bandscheiben. Für eine wohltuend entspannende Tiefenwärme, sorgen die mit zertifizierter Jade veredelten Massageköpfe.

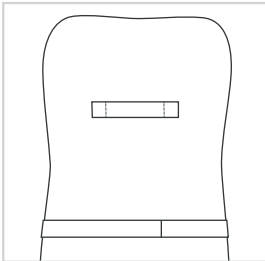

Die obere rückwärtig angebrachte Schlaufe dient als Unterstützung beim Aufstellen und positionieren Ihres Quattromed V und ist nicht zum Tragen geeignet. Bitte achten Sie beim Transport unbedingt darauf Ihr Massagegerät fest mit beiden Händen zu tragen. Die unteren Klettbinden dienen zur Fixierung des Quattromed V an der gewünschten Sitzgelegenheit und bieten einen sicheren Stand während der Massageanwendung.

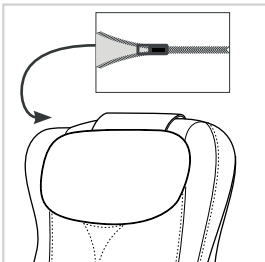

Praktisch und einfach lässt sich die Auflage/das Cover Ihres Quattromed V zur Reinigung oder zur intensiveren Massage über den Reiß- und Klettverschluss am Rückenteil entfernen.



Für eine Vibrationsmassage an den Fußsohlen lösen Sie das Sitzteil über den Reißverschluss und platzieren Sie es bequem unter die Füße.



# Besonderheiten



## ROLLEN

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewandt.



## KNETEN

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



## VIBRATION

Die Vibration versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf und entspannend für die Muskulatur.



## JADE WÄRME

Jade gehört zu den natürlichen Wärmespeichern und -leitern. Zielgerecht integriert in die Massageköpfe spendet sie Tiefenwärme und wirkt entspannend.



## AUTOMATIK

3 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.



## PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



## SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



## WEITE

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



## HÖHE

Regulierung der Höhenbegrenzung der Massagetechnik in 2 Stufen.



## 3D MASSAGE

Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück.

# Fernbedienung

## 1| **POWER**

Ein- und Ausschalten des Geräts.

## 2| **HÖHENREGULIERUNG**

Wenn Sie [Area] / [Program] gewählt haben, drücken Sie [Height], um die Höhenbegrenzungsfunktion zu aktivieren. Um zur maximalen Höhe zurückzukehren drücken Sie [Height] erneut.

## 3| **AUTOMATIKPROGRAMME**

Das Massagegerät ist mit 3 Automatikprogrammen ausgestattet. Drücken Sie [Program] und wählen Sie zwischen Modus 1 (LED blau) Modus 2 (LED grün) Modus 3 (LED rot). Nach jeder Auswahl setzt sich der Motor zurück. Das Massagegerät startet das Automatikprogramm erst danach.

## 4| **WÄRME**

Die [Heating] Funktion ist zu Beginn der Programme [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area] aktiv. Um die Wärme während der Massage ab- oder erneut zuschalten drücken Sie die Taste abermals.

## 5| **VIBRATION**

Die [Vibration] ist bei den Funktion [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area] jederzeit zu- und abschaltbar. Drücken Sie die Taste [Vibration], um die Vibrationsfunktion zu starten. Die Vibration läuft im 1,5 Minuten Rhythmus.

## 6| **SHIATSU**

Drücken Sie die Taste [Shiatsu], um die Shiatsu-Funktion zu starten. Die Standardgeschwindigkeit ist mittel. Wenn das Massagegerät im Auto-Modus läuft wird der Auto-Modus hierdurch gestoppt. Zum Beenden drücken Sie [Shiatsu] erneut.

## 7| **TAPPING**

Drücken Sie die Taste [Tapping], um die Shiatsu-Funktion zu starten. Die Standardintensität ist mittel. Wenn das Massagegerät im Auto-Modus läuft wird der Auto-Modus hierdurch gestoppt. Zum Beenden drücken Sie [Tapping]erneut.

## 8| **SLOW – FAST**

Die Funktion [Slow – Fast] funktioniert nur, wenn [Tapping] ausgewählt ist. Drücken Sie die [Slow – Fast] Taste und die Intensität wechselt automatisch für die Massagedauer von langsam zu schnell.

## 9| **FAST – SLOW**

Die Funktion [Fast – Slow] funktioniert nur, wenn [Tapping] ausgewählt ist. Drücken Sie die [Fast – Slow] Taste und die Intensität wechselt automatisch für die Massagedauer von schnell zu langsam.

## 10| **WIDTH**

Die Funktion [Width] funktioniert nur, wenn [Tapping] ausgewählt ist. Bei der [Shiatsu] Funktion ist [Width] nicht möglich. Mit jedem Drücken der Taste [Width] verstellt sich die Weite der Massagerollen in 3 Schritten von schmal nach weit. Beim vierten Betätigen der Taste [Width] aktivieren Sie einen automatischen Durchlauf aller Weiteneinstellungen.

## 11| **FAST**

Die Klopfgeschwindigkeit ist dreistufig einstellbar: Schnell-Mittel-Langsam. Die [Fast] Funktion läuft nur wenn [Tapping] ausgewählt ist. Drücken Sie die [Fast] Taste um die Klopfgeschwindigkeit zu erhöhen.

# Fernbedienung

## 12| SLOW

Die Klopfgeschwindigkeit ist dreistufig einstellbar: Schnell-Mittel-Langsam. Die [Slow] Funktion läuft nur wenn [Tapping] ausgewählt ist. Drücken Sie die [Slow] Taste um die Klopfgeschwindigkeit abzusenken.

## 13| LO

Die Shiatsu Intensität ist dreistufig einstellbar: Schnell-Mittel-Langsam. Die [LO Shiatsu Speed] Funktion läuft nur wenn [Shiatsu] ausgewählt ist. Drücken Sie die [LO Shiatsu Speed] Taste um die Shiatsu Intensität abzusenken.

## 14| HI

Die Shiatsu Intensität ist dreistufig einstellbar: Schnell-Mittel-Langsam. Die [HI Shiatsu Speed] Funktion läuft nur wenn [Shiatsu] ausgewählt ist. Drücken Sie die [HI Shiatsu Speed] Taste um die Shiatsu Intensität zu erhöhen.

## 15| UP/DOWN

Steuerungstasten der Massagerollen für die exakte Positionierung an Ihrem Rücken. Während der punktuellen Massage können Sie durch gedrückt halten dieser Tasten den Massagebereich nach oben oder nach unten verändern.

## 16| FULLBACK

Automatikprogramm für den gesamten Rücken. Das Programm massiert mit der Massagetechnik „Rolling“ die einzelnen Rückenpartien. Die Funktionen [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] sind wahlweise zuschaltbar.

## 17| UPPER

Automatikprogramm für den oberen Rücken. Das Programm massiert mit der Massagetechnik „Rolling“ die einzelnen Rückenpartien. Die Funktionen [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] sind wahlweise zuschaltbar.

## 18| LOWER

Automatikprogramm für den unteren Rücken. Das Programm massiert mit der Massagetechnik „Rolling“ die unteren Rückenpartien. Die Funktionen [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] sind wahlweise zuschaltbar.




# Lagerung / Pflege

Durch regelmäßige Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Quattromed V und sorgen gleichzeitig für allzeit sicheren Betrieb.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flammen vom Quattromed V fern.
3. Reinigen Sie das Gerät mit handelsüblicher Kunstlederpflege und einem trockenen, weichen Tuch.
4. Bitte tauchen Sie Ihr Quattromed V während der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Lassen Sie das Quattromed V nach der Reinigung vollständig trocknen.
6. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit über die Tasten in die Fernbedienung dringen kann.
7. Trennen Sie das Quattromed V, wenn es nicht im Gebrauch ist, vom Stromnetz.

## Technische Daten Quattromed V

Maße Rückenteil:	75 x 45 x 20 cm
Maße Sitzteil:	7,5 x 45 x 42 cm
Gewicht:	8,5 kg
Spannung:	
Eingang:	110-240V~, 50/60 Hz
Ausgang:	24V  , 2500 mA
Nennleistung:	
im Betrieb:	60 Watt
Laufzeit automatisch:	15 Minuten

Zertifikate:



## Eu-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

# Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungs- oder Garantiezeit. Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

## **Folgende Punkte sind nicht Teil der Gewährleistung:**

- Verschleißteile, wie z.B. Abriebstoffe, arbeitende Kunststoffteile, Stoffabdeckungen, Auflagen / Cover
- Motorgeräusche bis 72 db auf 30 cm
- Abnutzung durch unsachgemäßen Gebrauch
- Gewerbliche Nutzung z.B. Messenutzung, mehrmalige Nutzung ohne zwischenzeitliche Ruhepausen von 40 Minuten
- Aussetzen des Gerätes in Hitze, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten
- Schäden durch spitze und/oder scharfkantige Gegenstände
- Mutwillige Zerstörung, Zweckentfremdung, Überlastung oder Unfallschäden
- Schäden und Verschmutzung durch Haustiere
- Verschmutzungen durch z.B. Körper- oder Haarpflegemittel
- Schäden durch Nutzung säure-, lösungs-, oder alkoholhaltiger Mittel

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden welche durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada garantiert als Hersteller die Auslieferung einwandfreier Ware an den Käufer/Partner. Nachgewiesene Produktionsfehler sind nach Anmeldung und Bestätigung zum Austausch berechtigt.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Arztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2017 CASADA International GmbH.  
Alle Rechte vorbehalten.