

time**to**relax



ATLAS



< timetorelax

Od momentu powstania w 2000 roku, nazwa CASADA stała się synonimem wysokiej jakości produktów w sektorze wellness i fitness.

Dzisiaj, urządzenia marki CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny design i skupienie się na poprawie jakości życia są tak samo charakterystyczne dla produktów CASADA, jak ich niezawodna jakość.

Gratulacje!

Dziękujemy za wybranie fotela do masażu marki Casada. Cieszymy się, że możemy wspierać Twoje zdrowie.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby dokładnie zapoznać się z prawidłową obsługą urządzenia.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy fotel do masażu **Atlas**.

Spis treści

Wskazówki bezpieczeństwa	60
Przeciwwskazania	61
Montaż terminalu.....	62
Umieszczenie fotela	63
Budowa urządzenia.....	66
Instrukcja użytkowania	68
Czyszczenie i konserwacja	69
Rozwiązywanie problemów	70
Europejska deklaracja	71
Warunki gwarancji	71

Wskazówki bezpieczeństwa



Przed użyciem fotela masującego prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i optymalną wydajność pracy. Prosimy zachować niniejszą instrukcję!

- Fotel masujący został wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami technicznymi i jest zgodny z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa.
- Fotel masujący nie wymaga konserwacji. Wszelkie konieczne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Niewłaściwe użytkowanie lub nieautoryzowane naprawy spowodują utratę gwarancji.
- Nie należy dotykać wtyczki kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Nie dopuszczaj do kontaktu fotela masującego z wodą, nie narażaj go na wysokie temperatury ani bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj fotela masującego w środowisku o dużej wilgotności, np. w łazience.
- Nie używaj fotela masującego w miejscu o niewystarczającej ilości miejsca lub w miejscu, w którym wentylacja jest zakryta, a dopływ świeżego powietrza nie jest gwarantowany.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia, odłącz fotel masujący od zasilania, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas
- Nie używaj mokrych ani uszkodzonych kabli, wtyczek lub luźnych gniazd.
- Jeśli kable/wtyczki są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.
- Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania produktu.
- Nie przekraczaj zalecanego dziennego czasu trwania masażu 30 minut, aby uniknąć nadmiernego przeciążenia mięśni i nerwów.
- Aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego, nigdy nie używaj spiczastych lub ostrych przedmiotów.
- Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru, należy używać wyłącznie gniazd pasujących do wtyczki i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
- Odłącz fotel masujący od zasilania po użyciu i przed czyszczeniem.
- Nie pozwalaj dzieciom poniżej 14 roku życia na czyszczenie lub konserwację produktu bez nadzoru osób dorosłych.
- Jeśli podczas użytkowania wystąpi nieoczekiwana awaria zasilania, natychmiast ustaw przełącznik w pozycji OFF i odłącz wtyczkę, aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego.
- Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby niepełnosprawne i osoby słabe muszą być nadzorowane przez cały czas przebywania w pobliżu fotela masującego lub podczas korzystania z fotela masującego.
- Nie używaj fotela masującego bezpośrednio po spożyciu posiłku lub pod wpływem alkoholu.
- Używaj produktu tylko do celu opisanego w instrukcji obsługi.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez dostawcę.
- Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy stawiać, siadać ani wskakiwać na podnóżek.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, nie siadaj na podłokietnikach ani oparciu.
- Należy regularnie czyścić fotel masujący i zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do jego szczelin.
- Nie wolno nie ciągnąć bezpośrednio za kabel sieciowy.
- Podczas regulacji położenia podnóżka lub oparcia należy upewnić się, że pod spodem nie znajdują się żadne inne przedmioty, a w szczególności dzieci poniżej 14 roku życia.
- Jeśli elastyczny kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy zakupić odpowiedni kabel zastępczy u producenta lub w jego punkcie serwisowym.

Przeciwwskazania

Jeśli nie masz pewności, co do możliwości korzystania z fotela masującego, skonsultuj się z lekarzem.

- Korzystanie z fotela masującego jest zabronione w czasie ciąży lub w przypadku jednej lub kilku z następujących dolegliwości: niedawno przebyte urazy, choroby zakrzepowe, wszelkiego rodzaju stany zapalne i obrzęki oraz nowotwory. W przypadku trwającego leczenia tych chorób lub stanów zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem masażu.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, poznawczymi lub umysłowymi oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z tego fotela wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Aby uniknąć dyskomfortu lub niebezpieczeństwa podczas korzystania z fotela masującego, prosimy następujące osoby o skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem produktu:
 - Osoby z niepełnosprawnością ruchową
 - Osoby w trakcie leczenia
 - Osoby z bólami pleców oraz problemami z kręgosłupem (np. skrzywieniami)
 - Osoby z rozrusznikami serca
- Jeśli odczuwasz ból podczas masażu, natychmiast przestań używać produktu.
- Jeśli doznasz urazu podczas korzystania z fotela, natychmiast poszukaj pomocy medycznej
- Nie należy masować zaczerwienionych, opuchniętych lub zaognionych obszarów skóry.
- Ten fotel masujący jest przeznaczony do użytku domowego i nie jest medycznym urządzeniem do masażu, dlatego nie może być stosowany jako substytut specjalistycznego leczenia medycznego.
- Zalecamy codzienne korzystanie z fotela masującego przez 30 minut.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia.



Dane techniczne

Model:	CMS-301
Nazwa:	Atlas
Wymiary:	Złożony: 79 x 142 x 123,5 cm Rozłożony: 79 x 158,5 x 112 cm
Waga:	86,5 kg
Napięcie:	100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Moc znamionowa:	80 W
Bezpieczeństwo:	Klasa I
Czas pracy:	20 minut (zgodnie z pobraną opłatą)
Certyfikaty:	EMC  



Montaż terminalu

Instrukcja instalacji czytnika kart lub jego wymiany


1. Za pomocą śrubokrętu odkręć cztery śruby zabezpieczające z łbem stożkowym, a następnie zdejmij pokrywę panelu sterowania (Rysunek 1 - Rysunek 2).

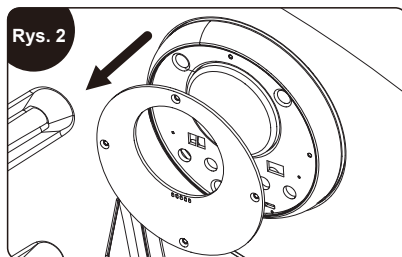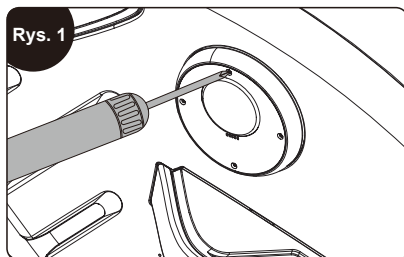

2. Odkręć trzy śruby krzyżakowe za pomocą śrubokrętu, a następnie zdejmij zespół panelu sterowania (Rysunek 3 - Rysunek 4).

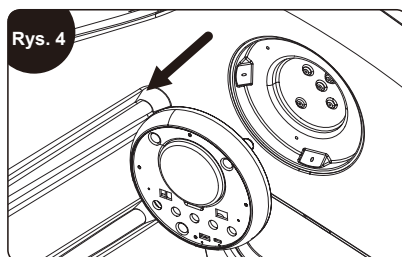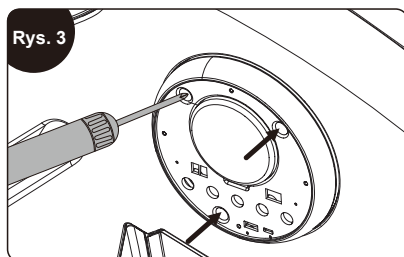

3. Zainstaluj zakupione urządzenie Nayax (Rysunek 5).

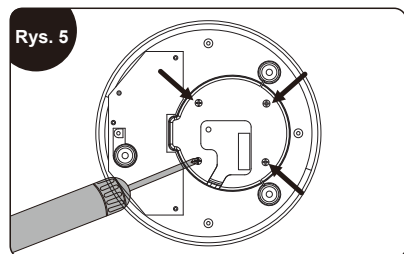


Umiejscowienie fotela

Umiejscowienie

Upewnij się, że za fotelem jest co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, aby mógł się swobodnie rozłożyć.



Chroń fotel przed wysokimi temperaturami w pomieszczeniu. Ustaw je tak, aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i zapewnij odpowiednią odległość od urządzeń grzewczych. Aby chronić podłogę przed ewentualnym uszkodzeniem, zalecamy postawienie fotela na dywaniku.

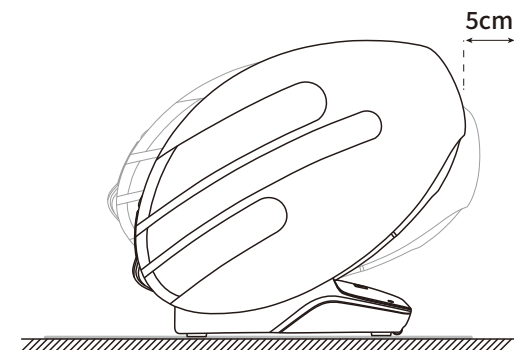


Przenoszenie fotela


Dla bezpieczeństwa należy skorzystać z pomocy drugiej osoby przy podnoszeniu i przesuwaniu fotela.




Aby uniknąć uszkodzenia delikatnych powierzchni, jak np. podłogi drewniane, fotel należy przenosić, a nie przesuwać. Podczas przemieszczania fotela należy zachować ostrożność, by chronić dłonie i stopy przed zgnieciem. Fotel należy postawić na równej powierzchni. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, zalecamy podłożenie pod fotel maty lub dywanika.


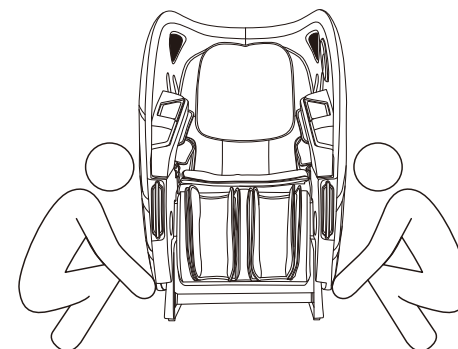




Umieszczenie fotela

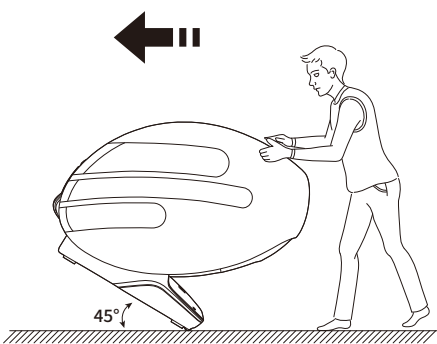Zmiana położenia fotela do masażu	
Aby przesunąć fotel masujący skorzystaj z kółek, znajdujących się z tyłu fotela. Odchyl fotel do tyłu o ok. 45° (patrz ilustracja), a następnie popchnij do przodu. Uwaga: Nadmierna siła spowoduje przewrócenie się fotela i jego uszkodzenie.	 Uwaga
Przed przesunięciem lub przeniesieniem fotela należy go ustawić w pozycji wyjściowej i odłączyć od zasilania. Fotel należy przemieszczać tylko wtedy, gdy jest pusty (ludzie, zwierzęta domowe lub przedmioty nie mogą pozostawać na siedzisku). Nie przesuwaj fotela przez przeszkody wyższe niż 2 mm lub szczeliny szersze niż 5 mm. Podczas przesuwania fotela na kółkach, pojedynczy ciągły ruch nie jest możliwy, jeśli odległość jest większa niż 50 metrów, urządzenie należy przesunąć powoli i płynnie, aby zapobiec uszkodzeniom podłoża.	

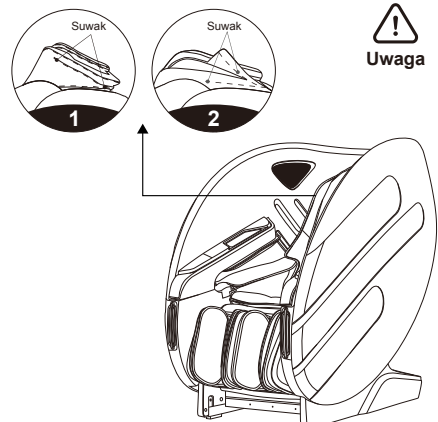Demontaż zagłówka i poduszki oparcia	
Intensywność masażu ugniatającego w okolicy szyi i ramion można złagodzić, stosując poduszkę. Zalecamy stosowanie poduszki.	 Uwaga
Poduszka oparcia i oparcia (1) oraz poduszka zagłówka i poduszka oparcia (2) połączone są zamkiem błyskawicznym.	


Umieszczenie fotela

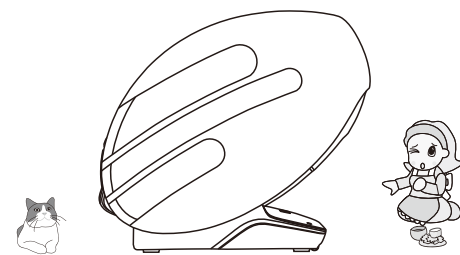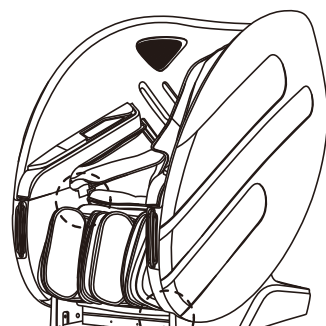Sprawdź otoczenie	
 Uwaga	Upewnij się, że w pobliżu urządzenia nie ma ludzi, zwierząt ani innych przedmiotów. 
 Uwaga	Przed rozpoczęciem masażu upewnij się, że w jednostce podnóżka itd. nie znajdują się żadne przedmioty. Pod żadnym pozorem nie należy wkładać dłoni, stóp ani głowy w przestrzeń między mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub między podłokietnikiem a urządzeniem. Nie należy wkładać dłoni, stóp ani głowy pod poszycie fotela. 

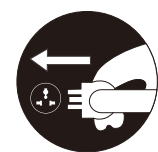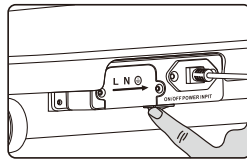Włączanie fotela	
 Uwaga	  Schemat połączenia Naciśnij wyłącznik zasilania znajdujący się pod skrzynką zasilającą
 Uwaga	• Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. • Zasilaj ten produkt zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi zasilania. • Nie używaj innego zasilacza niż przeznaczony dla tego produktu. • Nie podłączaj do urządzenia żadnych nieautoryzowanych urządzeń do konwersji zasilania.

Budowa urządzenia


Elementy fotela masującego

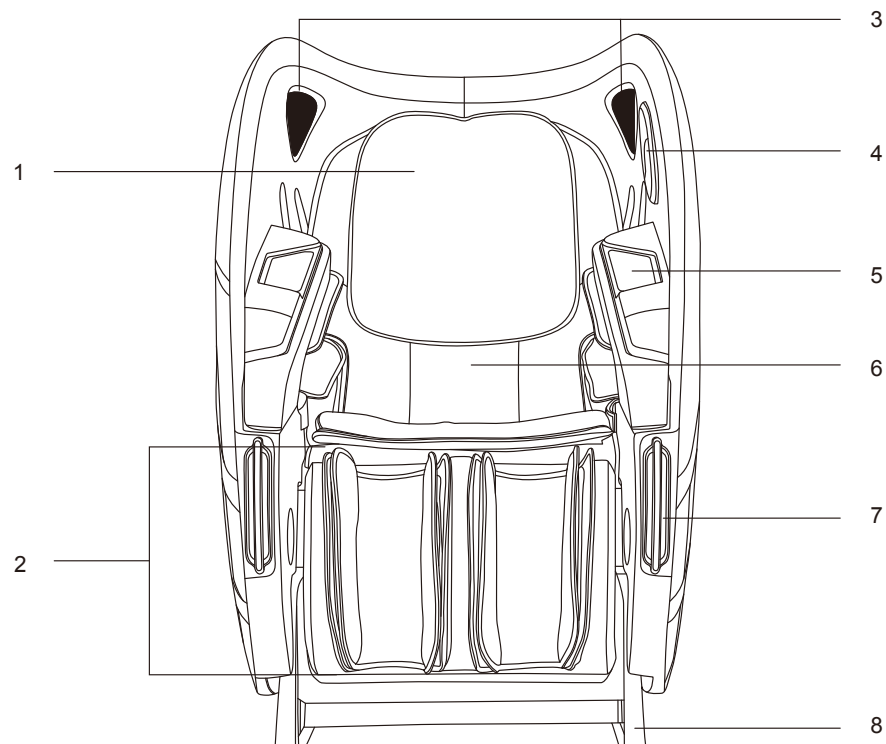

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Poduszka zagłówka | 5. Ładowarka bezprzewodowa |
| 2. Jednostka masażu nóg | 6. Poduszka oparcia |
| 3. Głośnik | 7. Oświetlenie ambient |
| 4. Panel sterujący | 8. Osłona boczna |


Budowa urządzenia

Schemat funkcjonalności fotela masującego

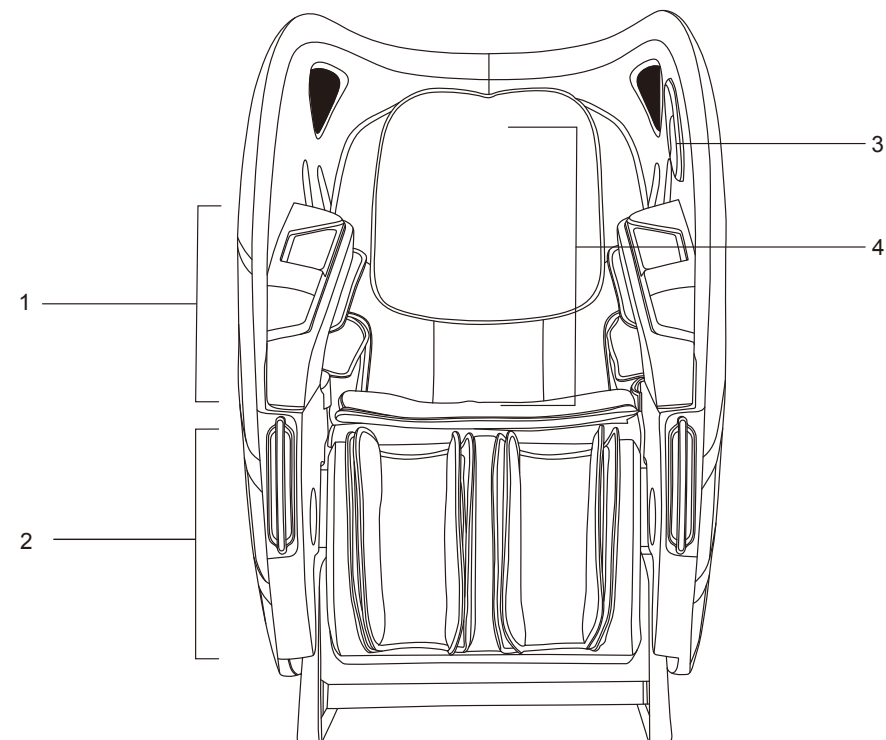

- | |
|--|
| 1. Poduszka powietrzna obszaru przedramienia |
| 2. Poduszka powietrzna obszaru łydek |
| 3. Głośnik |
| 4. Masaż górnych partii ciała |

Instrukcja użytkowania

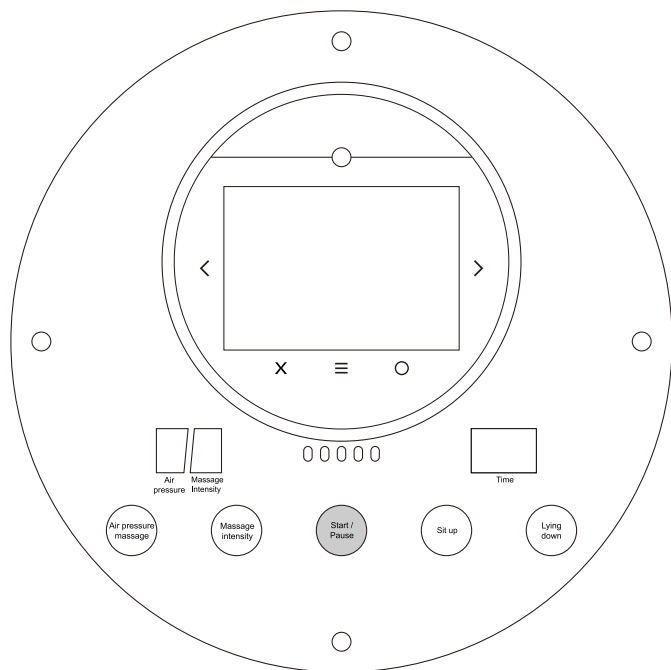

Start/Pauza

Krótkie naciśnięcie wstrzymuje lub ponownie uruchamia masaż.

Intensywność kompresji

Regulacja intensywności masażu poduszkami kompresyjnymi. Do wyboru są 3 poziomy intensywności. Najniższy poziom jest najslabszy, a najwyższy – najmocniejszy. Wyświetlacz pokazuje wybraną intensywność.

Intensywność masażu

Regulacja intensywności masażu. Do wyboru są 3 poziomy intensywności. Najniższy poziom jest najslabszy, a najwyższy – najmocniejszy. Wyświetlacz pokazuje wybraną intensywność.

Składanie fotela

Naciśnij ten przycisk, a mechanizm oparcia zacznie powoli się podnosić. Naciśnij ponownie, aby go zatrzymać.

Rozkładanie fotela

Naciśnij ten przycisk, a mechanizm oparcia zacznie powoli się opuszczać. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Czas


Wyświetla czas pozostały do końca masażu

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie części ze skóry syntetycznej i plastiku

Przetrzyj skórę ekologiczną miękką, suchą szmatką.

- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków chemicznych takich jak rozpuszczalniki, benzyna, alkohol itp.
- W przypadku stosowania dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry należy postępować zgodnie z instrukcją ich użycia.
- Jeżeli skóra syntetyczna jest szczególnie mocno zabrudzona, należy ją czyścić w następujący sposób:
 - Zanurz miękką ściereczkę w wodzie lub w ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją wykręć.
 - Przetrzyj zabrudzoną powierzchnię.
 - Wypłucz i dokładnie wykręć szmatkę, a następnie zetrzyj roztwór czyszczący z powierzchni fotela.
 - Ponownie wytrzyj fotel wypłukaną i dobrze wykręconą ściereczką.
 - Zostaw fotel do wyschnięcia.
- Jeśli plamy są trudne do usunięcia, należy zanurzyć dostępną w sprzedaży gąbkę melaminową w neutralnym detergencie a następnie przetrzeć poszycie fotela.
- Nie należy suszyć poszycia za pomocą suszarki.
- Zachowaj ostrożność podczas pocierania maszyny tkaninami dżinsowymi i kolorowymi, ponieważ może to spowodować przebarwienia skóry syntetycznej.
- Nie należy pozostawiać tych rzeczy w kontakcie z plastikiem przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować jego odbarwienie.
- Skóra syntetyczna może ulec odbarwieniu w kontakcie z farbą do włosów, dlatego podczas stosowania farby do włosów należy przykryć miejsca kontaktu ręcznikiem.

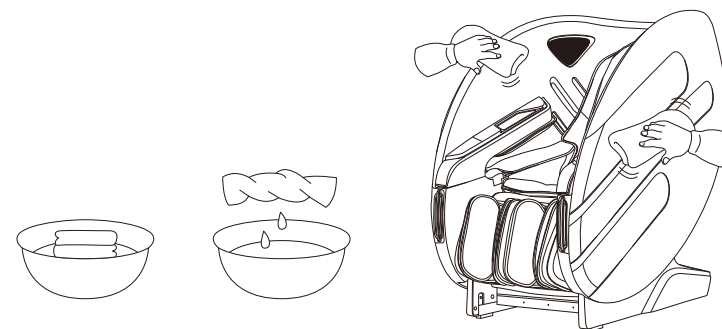

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Co zrobić, gdy podczas regulacji mechanizmu łydek lub oparcia słychać przeciągły sygnał dźwiękowy?
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję produktu i wymagania ergonomiczne, produkt ma określony zakres pozycji złożenia i rozłożenia. Sygnał dźwiękowy emitowany jest, gdy osiągnięta zostanie maksymalna pozycja.

Usterka	Podczas zmiany pozycji fotel wydaje dźwięk ocierania skóry.
Rozwiązanie	Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości skóry syntetycznej, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych, podczas pocierania wydają one dźwięki i jest to całkowicie naturalne. Uwaga: Jeśli podczas pracy urządzenia usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast wyłącz fotel i skontaktuj się z serwisem.

Usterka	Mechanizm masujący nie dosięga do ramion lub karku
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka zagłówka lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania. Usiądź najgłębiej, jak to możliwe, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij masaż od nowa.

Usterka	Urządzenie jest uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
Rozwiązanie	Wyłącz fotel i odłącz zasilacz. Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących tego urządzenia, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem dystrybutora lub autoryzowanym serwisem.

Europejska deklaracja

Produkt zgodny z europejskimi normami regulacyjnymi EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE i przepisami RohS.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.


Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy.

Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość

i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn
Germany
info@casada.de | www.casada.de

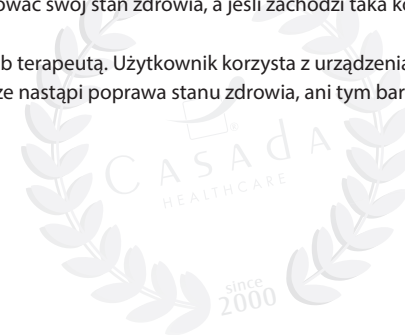

Copyright Images and text are subject to the copyright of CASADA Deutschland GmbH and may not be used without express consent.

Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH. All rights reserved

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

