



Привнесите расслабление в свою повседневную жизнь. Современные технологии сочетают приятные массажные программы с интеллектуальной аудиостимуляцией мозговых волн. Подарите своему телу и разуму время для отдыха и мечтаний, чтобы восстановить силы и наполниться новой энергией.



BETASONIC III

Поздравляем!

Приобретая это массажное кресло, вы демонстрируете свою осведомленность о здоровье, и мы просим вас внимательно прочитать и соблюдать инструкции по безопасности, чтобы вы могли долгое время наслаждаться преимуществами этого устройства,

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции по безопасности и следуйте им **BetaSonicIII**.

Оглавление

1. Инструкции по безопасности	84
2. Сборка изделия	87
3. Перед использованием	90
4. Особенности/Функции массажного кресла	92
5. Пульт дистанционного управления	94
6. Инструкция по эксплуатации	98
7. Чистка и уход за изделием	116
8. Устранение возможных неполадок	117
9. Технические данные	118
10. Специальные функции	119
11. Юридические вопросы	121
11.1 Декларация соответствия ЕС	121
11.2 Гарантийные обязательства	121

< timetorelax

С момента основания в 2000 году имя CASADA означает высококачественную продукцию в области велнеса и фитнеса, и сегодня устройства CASADA доступны по всему миру. Непрерывное развитие, оригинальный дизайн и строгая ориентация на улучшение качества жизни характеризуют продукцию CASADA, как и ее надежное и превосходное качество.

1. Инструкции по безопасности

- Перед использованием внимательно прочтите все соответствующие инструкции.
- Информация, отмеченная здесь, поможет вам безопасно и правильно использовать продукт.
- Предупреждения находятся в „Предупреждение“ и „Осторожность“ чтобы проиллюстрировать масштабы опасностей и ущерба, которые могут возникнуть при неправильном использовании. Оба важны для безопасности и должны быть приняты во внимание.
- Обратите внимание на символы перед инструкциями по технике безопасности.

 **Предупреждение:** Означает, что неправильное использование может привести к серьезной травме или смерти.

 **Внимание:** Указывает на то, что неправильное использование может привести к легким травмам или материальному ущербу.

 **Недопустимо:** Строго запрещено

Продукт не должен использоваться следующими группами людей

 **Недопустимо**

- Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или неврологическими нарушениями или лицами, которым не хватает опыта или рассудительности, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром и инструктируются по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Люди, страдающие остеопорозом.
- Люди с заболеваниями сердца или пользователи электронных медицинских устройств, таких как кардиостимулятор.
- Люди, с повышенной температурой.
- Беременные женщины и женщины в период менструации.
- Люди, имеющие травмы или имеющие кожные заболевания.
- Запрещено использование данного устройства детям до 14 лет без присмотра взрослых.
- При плохом самочувствии или если доктор не рекомендует массаж.
- Недопустимо использование после процедур, связанных с водой: бассейн, сауна, душ и тп до полного высыхания поверхностей тела и волос.
- Людям, чувствительным к теплу, следует соблюдать осторожность при использовании этого устройства.
- Если шнур питания поврежден, обратитесь к техническому специалисту. Самостоятельная замена запрещена во избежание несчастного случая.

Важные предупреждения по безопасности

 **Предупреждение**

- Следите за тем, чтобы дети поместили руки или другие части тела в подвижные части устройства.
- Используйте устройство только с хорошо заземленным источником питания, подходящим для этого продукта.
- Отключайте устройство от сети после использования или перед очисткой, чтобы избежать травм или повреждения изделия.
- Устройство должно эксплуатироваться в соответствии с инструкциями настоящего руководства.
- Не используйте неавторизованные запасные части или аксессуары.
- Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Никогда не используйте этот продукт для целей, не указанных здесь.
- Рекомендуемая длительность массажа 20 минут.
- Не используйте этот продукт, если поверхность изделия повреждена или порвана.
- Следите за тем, чтобы в устройство не попадали посторонние предметы.
- Не используйте этот продукт перед сном.

1. Инструкции по безопасности

- Не используйте этот продукт, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или чувствуете себя плохо.
- Не используйте устройство в течение часа после еды.
- Во избежание травм не следует использовать этот продукт с применением силы.

 **Внимание**

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на изделии.
- Никогда не подключайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или повреждения устройства не допускайте попадания воды в устройство.
- Будьте осторожны, не тяните за шнур питания при подключении и отключении. Грубая сила запрещена.
- Защищайте кабель от повреждений и не изменяйте схему устройства.
- Очистка находящихся под напряжением элементов этого продукта, таких как: В. Выключатель питания и вилку нельзя протирать влажной тканью.
- Обратите внимание, что существует риск получения травмы в случае прерывания электропитания. Поэтому мы рекомендуем вам держаться подальше от продукта, пока питание не будет восстановлено.
- Если вы заметили необычное рабочее состояние устройства, немедленно выключите его и обратитесь к местному дилеру.
- Если вы почувствуете недомогание, прекратите использование устройства и обратитесь к врачу.

Противопоказания Брейнтроникс®

- Психозы (например, шизофрения, биполярное расстройство, эндогенная депрессия)
- Расстройства личности
- Эпилепсия и подобные судорожные расстройства.
- Заболевания сердца
- Расстройства центральной нервной системы
- Тромбоз
- Эндогенная депрессия
- Приобретенный демиелинизирующий синдром центральной нервной системы (ADS)
- Недавний сердечный приступ или инсульт.
- Умственная отсталость
- Аддитивные расстройства, такие как зависимость от наркотиков, алкоголя и лекарств.
- Регулярное употребление психотропных препаратов.
- Беременность

ПРИМЕЧАНИЕ. По этическим и юридическим причинам Braintronics® не следует использовать у детей и подростков без явного согласия их законных опекунов. Людям, которые могут вступить в религиозные конфликты из-за медитации, следует воздерживаться от ее использования.

Условия хранения

 **Внимание**

- Температура помещения для хранения: от 5°C до 40°C.
- Влажность (относительная) от 20% до 80%; вдали от агрессивных газов и в хорошо вентилируемом помещении.

1. Инструкции по безопасности

Техническое обслуживание и обслуживание продукта

⚠ Внимание

- Данное изделие должно обслуживаться только в уполномоченном сервисном центре дилера. Пользователь не имеет права разбирать или обслуживать изделие без разрешения.
- Не забудьте выключить главный выключатель после использования.
- Не используйте устройство, если розетка ослаблена.
- Если устройство не используется в течение длительного периода времени, сверните шнур питания и храните устройство в сухом и защищенном от пыли месте.
- Избегайте размещения устройства при высоких температурах или вблизи открытого огня. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.
- Очищайте данное изделие только сухой тканью. Никогда не используйте растворитель, бензол или спирт.
- Устройство спроектировано и изготовлено таким образом, что не требует специального обслуживания.
- Избегайте манипуляций с этим изделием острыми предметами.
- Не катите и не перетаскивайте данное изделие по неровной поверхности. Поднимите его, прежде чем перемещать.
- Устройство следует использовать только через регулярные промежутки времени. Не оставляйте его включенным непрерывно в течение длительного периода времени.

Среда применения

⚠ Внимание

- Не используйте этот продукт в очень влажных средах, таких как: в ванной, сауне, бассейне.
- Немедленно прекратите использование этого продукта, если температура окружающей среды значительно изменится.
- Не используйте этот продукт в очень пыльной или агрессивной среде.
- Этот продукт не следует размещать в замкнутых пространствах или местах без хорошей вентиляции.

Ответы на возможные вопросы


⚠ Внимание

- Звук двигателя во время работы данного изделия является нормальным рабочим звуком.
- Если пульт дистанционного управления не работает должным образом, проверьте, надежно ли подсоединены вилка и источник питания и включен ли выключатель питания.
- По истечении разрешенного времени использования устройство автоматически выключается. Если устройство используется в течение длительного периода времени, температурная защита автоматически отключает устройство. Через 30 минут устройство можно снова ввести в эксплуатацию.

2. Сборка изделия

Инструкция по сборке икроножного механизма


1. Подключите провод икроножного механизма и трубку компрессии к переднему разъему компрессионной рамы (рис. 1).
2. Затем вставьте подключенный провод и трубку компрессии в отверстие на раме спинки сиденья (рис. 2).
3. После подключения провода откройте крышки крепления голени с обеих сторон стальной рамы (рис. 3).
4. Вставьте икроножный механизм в углубление, закройте монтажные крышки и закрепите 2 винтами (рис. 4).

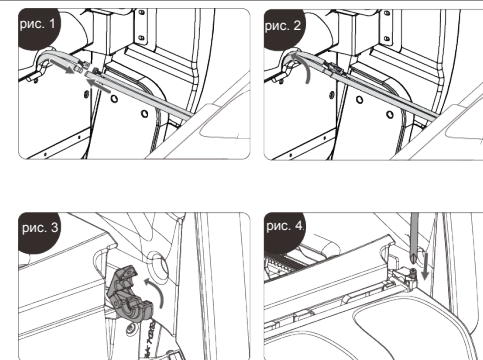

Размещение массажного кресла

Убедитесь, что расстояние от стены составляет не менее 30 см, чтобы кресло могло полностью перейти в положение лежа.

Защищайте кресло от слишком высоких температур в помещении. Следует избегать попадания солнечных лучей на изделие и соблюдать достаточное расстояние от нагревательных приборов. Чтобы защитить пол от повреждений, мы рекомендуем соответствующее покрытие (например, коврик).

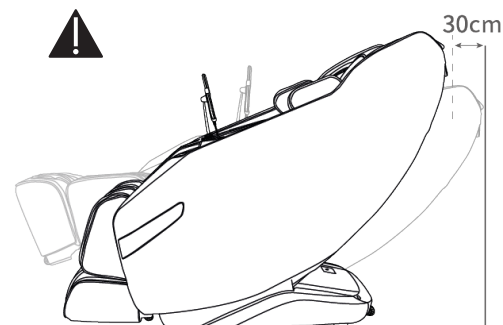

2. Сборка изделия


Подъем массажного кресла

Чтобы избежать повреждений при подъеме и перемещении кресла, лучше это делать вдвоем.

1. Пожалуйста, поднимайте массажное кресло при перемещении его по чувствительным поверхностям, таким как деревянный пол.


2. Когда кресло поднимается и перемещается в заданное положение, следите за тем, чтобы ваши руки и ноги были защищены. Не отпускайте кресло, пока не выровняете его.

Чтобы предотвратить повреждение пола, мы рекомендуем постелить на пол защитные коврики и т.п.

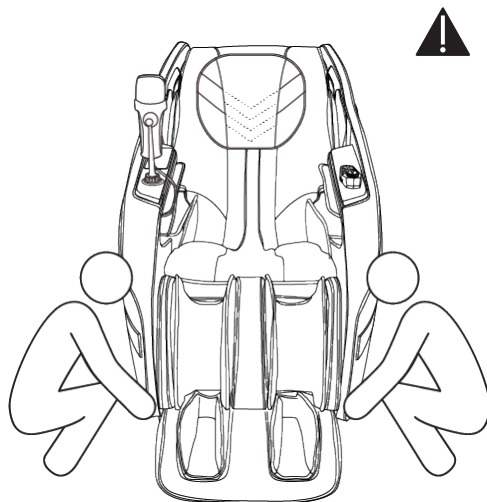

Снятие и установка подушки для головы и спинки

Использование подушки позволяет снизить интенсивность разминающего массажа в области шеи и плеч. Мы рекомендуем вам использовать при высокой чувствительности. Кресло имеет 2 подушки для спины, которые застегиваются на молнию

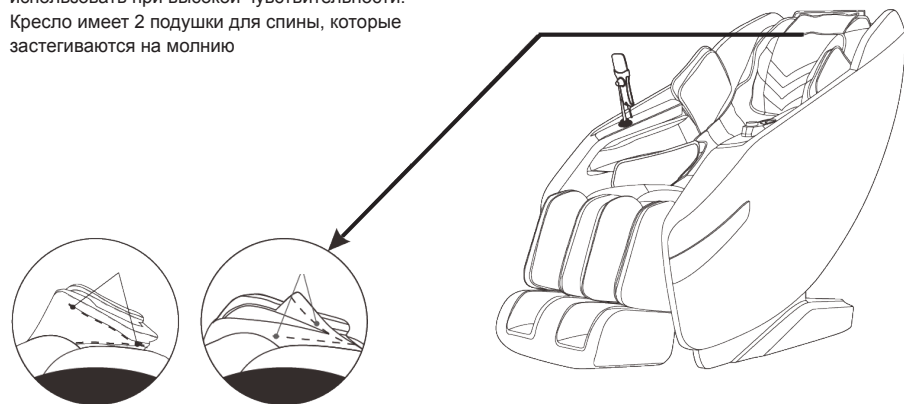

2. Сборка изделия

Massagesessel umstellen

Используйте ролики позади кресла, чтобы перемещать его. Переместите кресло, откинув его назад примерно на 45 ° (см. Рисунок).


Примечание: Чрезмерное усилие может привести к опрокидыванию кресла и к его повреждению.

1. Перед тем как переставить кресло, верните его в исходное положение, а затем отключите питание.

2. Пожалуйста, не перемещайте кресло, если в нем сидит человек или что-то лежит.

3. Не толкайте кресло через препятствия выше 2 мм или щели, которые имеют ширину более 5 мм.


4. Когда вы перемещаете кресло с помощью роликов, перемещение без остановок может быть невозможно; если расстояние больше, чем 50 метров, пожалуйста, перемещайте кресло медленно и равномерно, чтобы избежать повреждений.

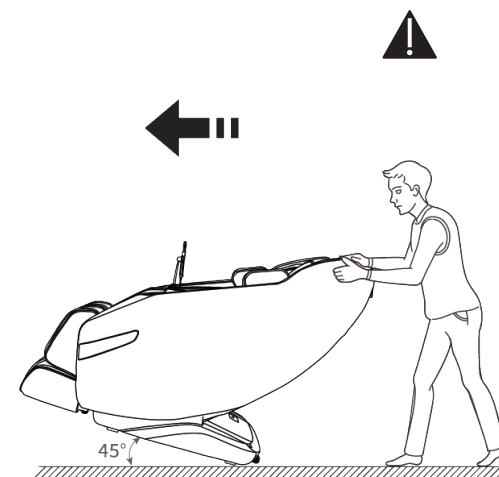

3. Перед использованием

Проверьте кресло и место вокруг него

Убедитесь, что вокруг кресла и за ним нет детей, животных и посторонних предметов.

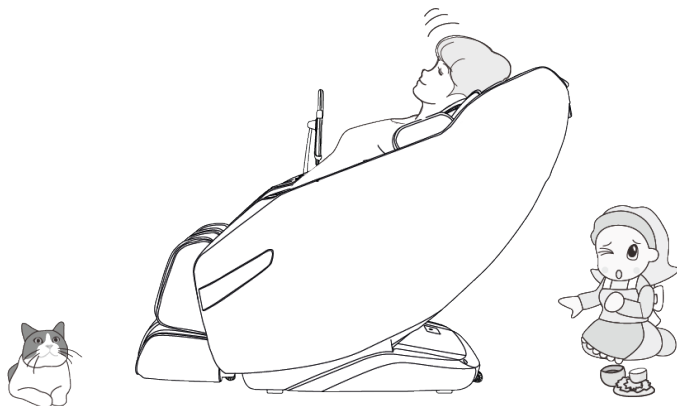


Убедитесь, что в зазорах между устройствами нет посторонних предметов.

Перед массажем убедитесь, что

в области стоп или в других местах между ними нет посторонних предметов. Руки, ноги и голова не должны находиться в области между ножной частью

и основной рамой или в области между подлокотником и массажной капсулой. Руки, ноги и

голова ни в коем случае не должны попадать под тканевое или кожаное покрытие массажной зоны.

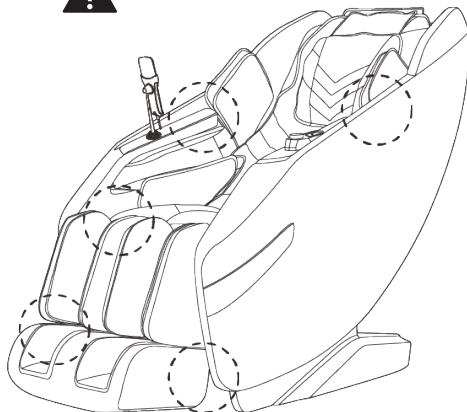


3. Перед использованием


Включите источник питания




Внимание

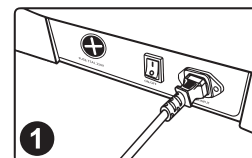

1. Подключите кабель питания

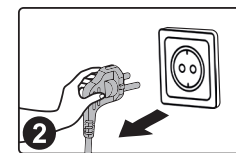

2. Схема включения вилки в розетку

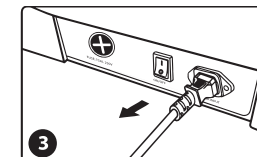


3. Включите выключатель питания на кресле (положение «I»).




Предупреждение

- Перед использованием проверьте, не повреждены ли шнур питания и вилка.
- Источник питания данного изделия должен соответствовать техническим характеристикам рабочих характеристик.
- Категорически запрещается использовать адаптер питания, отличный от предназначенного для данного изделия.
- Категорически запрещается использовать устройство с различными источниками питания, неодобренными для использования.


4. Особенности/Функции массажного кресла

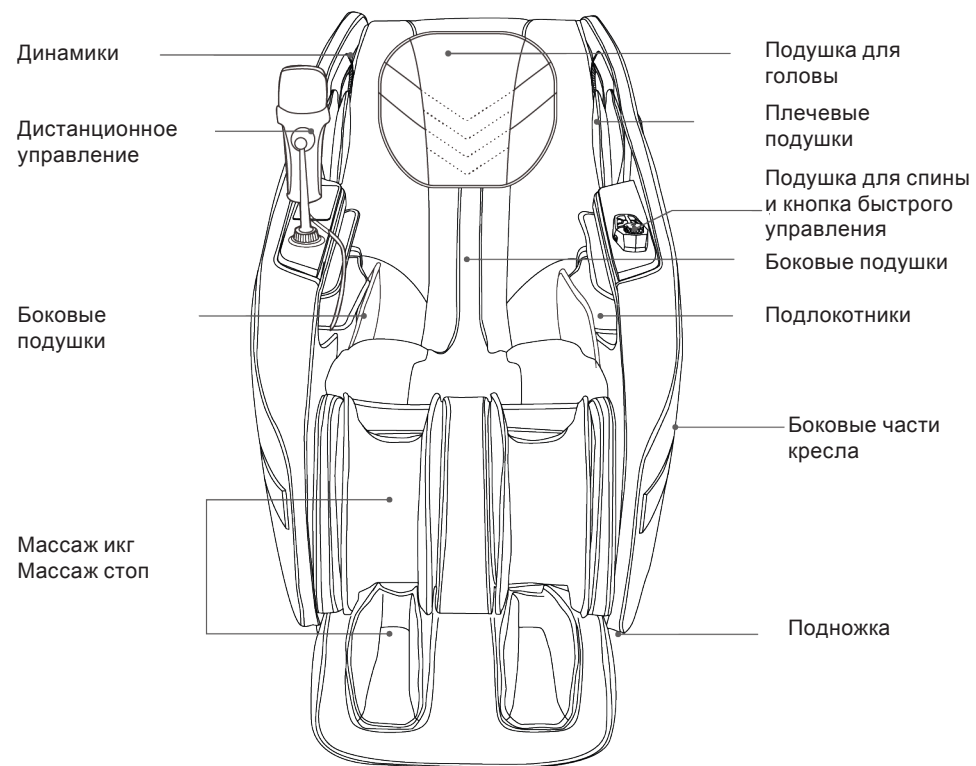

4. Особенности/Функции массажного кресла

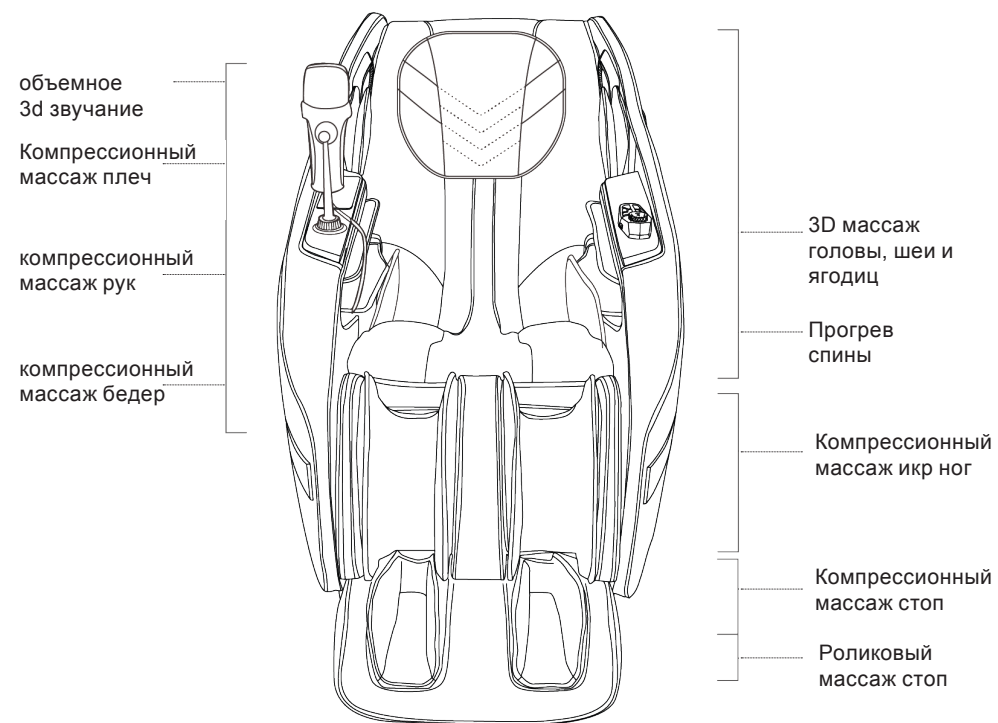

5. Пульт дистанционного управления

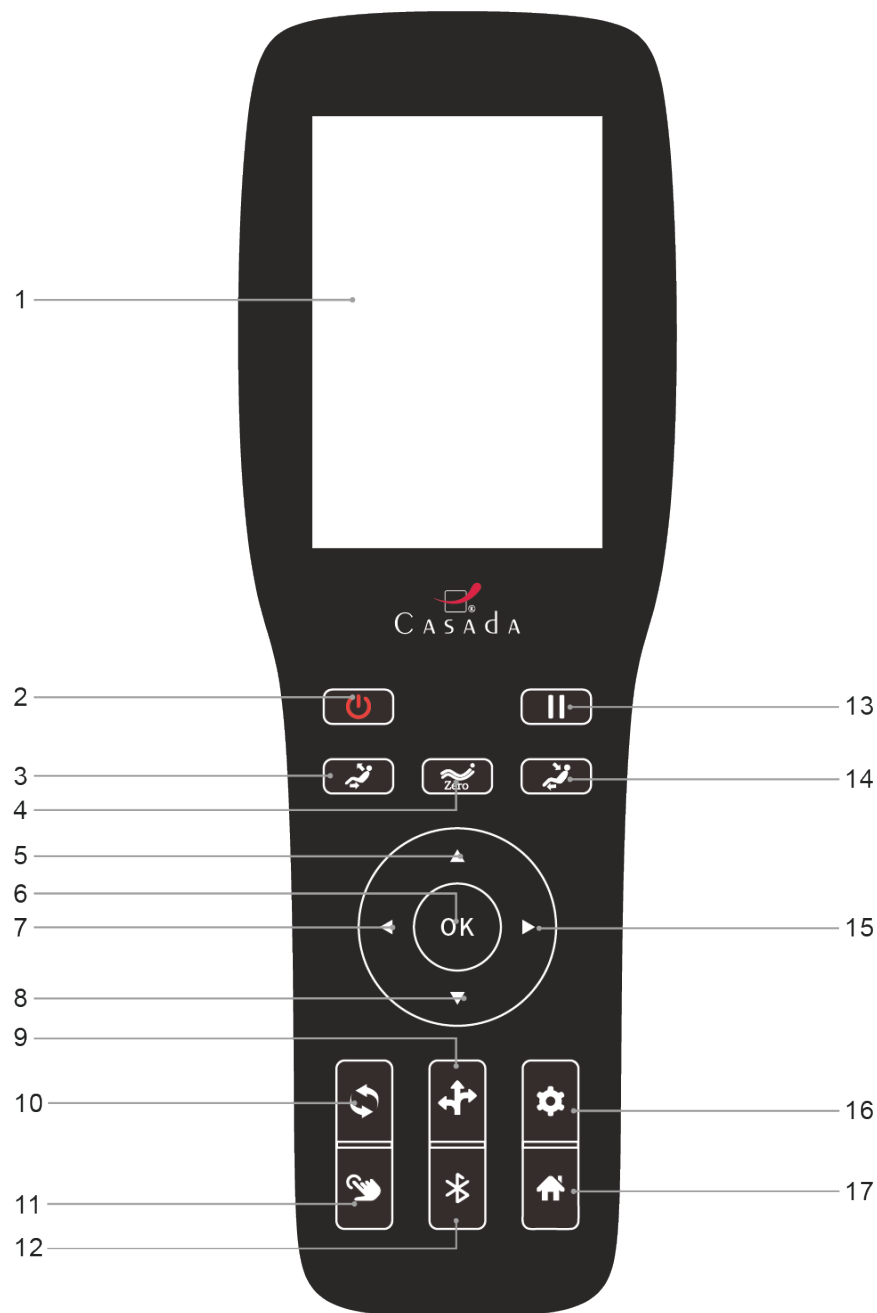


5. Пульт дистанционного управления

1. Дисплей: TFT-дисплей показывает функции массажа во время работы..
2. Вкл/Выкл: Включение/выключение массажного кресла.
3. Регулировка положения массажного кресла: спинку и ножки можно регулировать одновременно, чтобы добиться удобного угла массажа.
4. Кнопка перехода в режим Zero-gravity
Массажное кресло имеет четыре уровня невесомости. Нажмите кнопку один раз, чтобы выбрать первый уровень, дважды — для второго уровня, три раза — для третьего уровня и четыре раза — для возврата в исходное положение.
5. Кнопка навигации вверх: нажмите кнопку вверх, чтобы перейти вверх по меню или отрегулировать положение массажа.
6. Кнопка ОК: подтвердите выбранную функцию массажа или выполните выбранный массаж.
7. Левая навигационная клавиша: возврат в предыдущее меню или выбор опции слева.
8. Кнопка навигации вниз: нажмите кнопку вниз, чтобы перейти вниз по меню или отрегулировать положение массажа.
9. Кнопка быстрого выбора для «дополнительных функций» Эта функция позволяет получить доступ к интерфейсу выбора «дополнительных функций»; Подробное описание можно найти в этом руководстве.
10. Кнопка АВТО: вход в интерфейс выбора автоматического режима работы. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Автоматические программы».
11. Кнопка быстрого доступа к ручному управлению: вход в интерфейс выбора ручного управления. Пожалуйста, обратитесь к данной инструкции для получения подробной информации об этой функции.
12. Кнопка Bluetooth: включает или выключает функцию Bluetooth.
13. Кнопка «Пауза»: приостанавливает все выполняемые в данный момент функции массажа. Повторное нажатие этой кнопки возобновит все функции массажа, существовавшие до паузы.
14. Регулировка положения массажного кресла: спинку и ножки можно регулировать одновременно, чтобы добиться удобного угла массажа.
15. Правая навигационная клавиша: переход в подменю или правую опцию.
16. Клавиша быстрого доступа к функциям настройки: используется для входа в пользовательский интерфейс функций настройки. Подробную информацию о функциях можно найти в этом руководстве.
17. Кнопка меню: открывает интерфейс выбора главного меню. Подробную информацию о функциях можно найти в этом руководстве.

5. Пульт дистанционного управления

Обзор ярлыков на подлокотнике

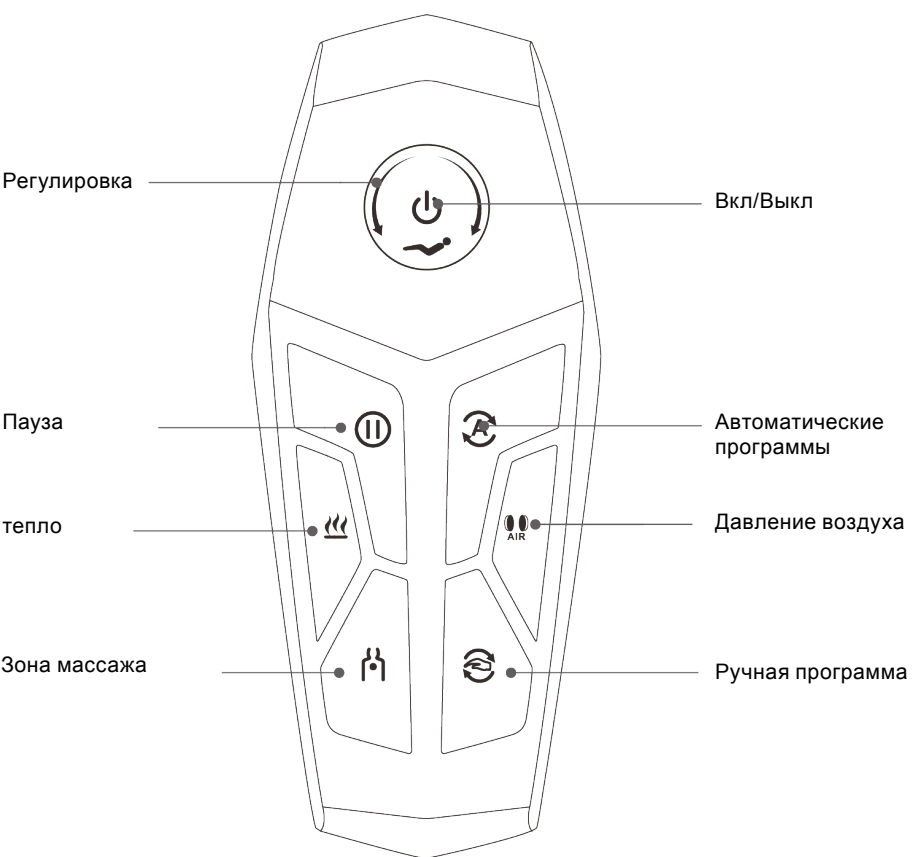


5. Пульт дистанционного управления

функция	Описание
	Кнопка включения/выключения: короткое нажатие на эту кнопку включает и выключает массаж.
	Ручка регулировки сиденья: поверните эту ручку по часовой стрелке, чтобы медленно опустить спинку сиденья и медленно поднять подставку для ног. Когда вы отпустите кнопку, движение спинки и подставки для ног вниз/вверх прекратится.
	Ручка регулировки сиденья: при повороте этой ручки против часовой стрелки спинка медленно поднимается, а подставка для ног медленно опускается; при отпускании останавливается движение спинки и подставки для ног вверх/вниз.
	Если эта кнопка нажата во время массажа, все функции массажа немедленно прерываются. (т. е. массажное кресло выключается через 20 минут). Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы восстановить все предыдущие функции массажа.
	Кнопка автоматического режима: при каждом кратковременном нажатии кнопки переключается на следующую функцию автоматического массажа.
	Кнопка применения тепла: нажмите кнопку, чтобы активировать или деактивировать функцию включения нагрева.
	Кнопка компрессии: каждое нажатие кнопки переключает в режим компрессии: всего четыре режима (включая отключение компрессии), которое можно переключать циклически.
	Кнопка зоны массажа: нажмите эту кнопку, чтобы переключить режим зоны спины.
	Taste für den manuellen Modus: Jedes Mal, wenn die Taste kurz gedrückt wird, wird zur nächsten Massagetechnik gewechselt.

6. Инструкция по эксплуатации

Эксплуатация и контроль функции массажа

1. Режим ожидания




В выключенном состоянии кресло находится в режиме ожидания (светодиод не горит).

2. Начать массаж (кнопка включения/выключения).


Чтобы начать массаж, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Откройте главный экран и выберите автоматическую программу для запуска массажа.

Кресло автоматически выключается, если в течение 5 минут не выбрана ни одна программа.

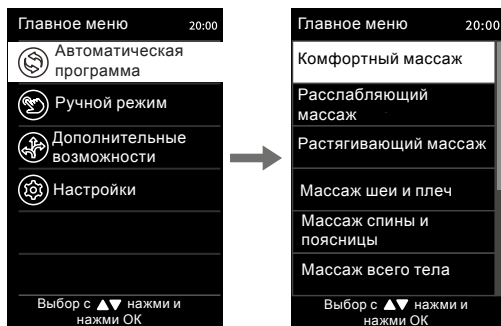

2.1. Регулировка угла наклона и определение формы тела

Угол наклона будет соответствующим образом отрегулирован вместе с определением формы тела (обратите внимание, что вы можете нажать кнопку ОК, чтобы пропустить этот шаг).

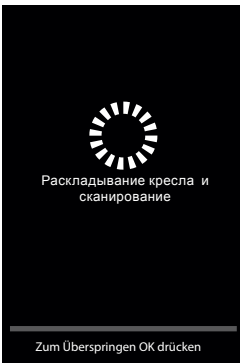

6. Инструкция по эксплуатации

2.2 Регулировка положения плеч


После определения положения плеч прозвучит звуковой сигнал.

Если обнаруженное положение отличается от фактического положения ваших плеч, вы можете отрегулировать его с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз». Положение плеч можно настроить в 11 шагах. Если в течение 10 секунд положение не будет скорректировано, система автоматически перейдёт в режим массажа.

Если вы сразу нажмёте кнопку «ОК», система немедленно перейдёт к массажной функции.

Если положение плеч не удастся определить, массаж будет выполнен с использованием стандартной высоты плеч.

Примечание: Во время массажа вы можете нажать «Вправо» в пользовательском интерфейсе, чтобы открыть меню «Регулировка плеч», нажать «ОК» для перехода к экрану настройки плеч или отрегулировать положение плеч с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз».

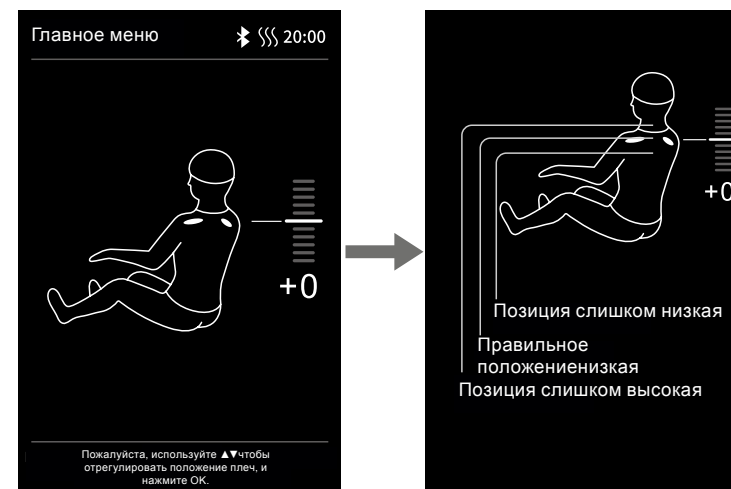

Вкус	Описание
	Отрегулируйте массажные головки вверх так, чтобы они достигли соответствующего положения плеч.
	Отрегулируйте массажные головки вниз так, чтобы они достигли соответствующего положения плеч.

6. Инструкция по эксплуатации




3. Регулировка положения массажных головок.

Если после выбора программы массажа необходимо отрегулировать положение массажной головки, нажмите кнопку «Меню». на пульте дистанционного управления и выберите функцию ручного управления, которую хотите настроить. Вы также можете напрямую нажать кнопку «Ручное управление». Нажмите на пульте дистанционного управления и выберите функции, которые хотите установить. Затем нажмите клавишу «Влево», чтобы вернуться к информационному интерфейсу («ручное управление» становится интерфейсом).

Вы можете нажать кнопку «Вверх» или «Вниз» непосредственно из интерфейса ручного управления, чтобы переместить массажную головку вверх или вниз, когда зона массажа настроена на точечный или частичный массаж.


Если массируемая область не является точечным или частичным массажем, вам необходимо выбрать «Регулировка массажа» в ручном интерфейсе. Найдите область массажа, выберите точечный или частичный массаж, нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться в интерфейс, и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы переместить массажные головки в положение «лежа»: вверх и вниз и адаптироваться.

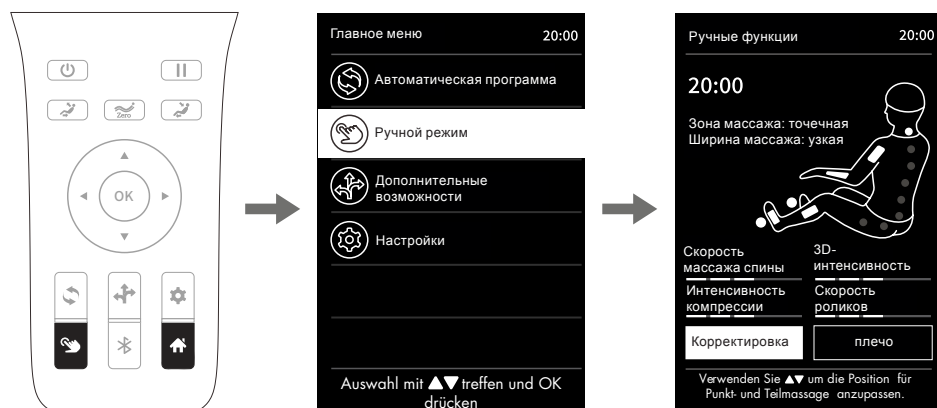

6. Инструкция по эксплуатации

4. Клавиша паузы


Во время продолжающегося процесса массажа вы можете нажать кнопку паузы. временно приостановите все текущие функции массажа. Нажмите кнопку паузы еще раз, чтобы возобновить процесс массажа до паузы. Если перерыв длится более 20 минут, устройство автоматически выключается

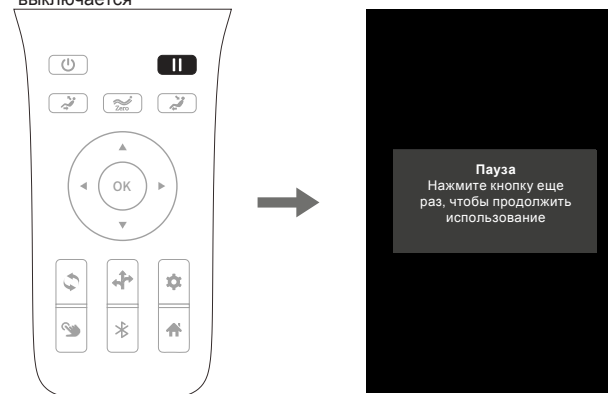

5. Кнопка меню

Нажмите кнопку Кнопка «Меню» для входа в главное меню для выбора функции массажа, включая интерфейсы для автоматической функции, ручной функции, других и других функций.

Откройте меню, нажмите «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать функции, и нажмите «ОК», чтобы перейти на следующий уровень выбора. Нажмите «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.

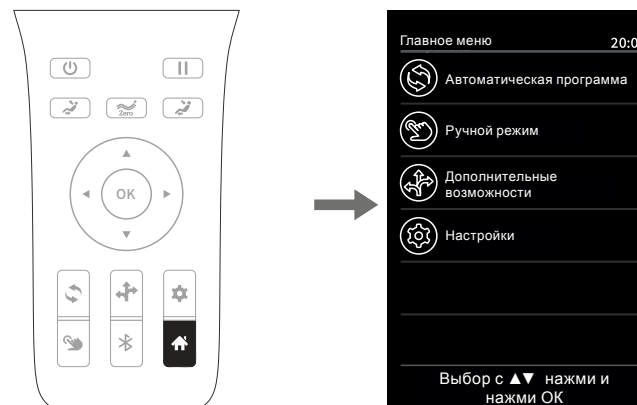


6. Инструкция по эксплуатации

1. Автоматическая функция

Нажимаем кнопку «Меню» [Кнопка входа в главное меню. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать автоматическую функцию, подтвердите кнопкой «ОК». Вы также можете активировать «Автоматическая функция» напрямую.] Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать автоматическую функцию.

На выбор доступны 15 автоматических программ массажа: комфортный массаж, расслабляющий массаж, растягивающий массаж, массаж шеи и плеч, массаж спины и талии, массаж всего тела, массаж позвоночника, восстановительный массаж, меридианный массаж, профессиональный массаж, спокойный массаж, нежный массаж, массаж, бодрящий массаж, массаж нижней части тела и массаж тела-баланс. Откройте интерфейс автоматических функций и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать любую программу массажа с автоматическими функциями и вернуться к интерфейсу управления. Пользовательский интерфейс отображается в виде информационного экрана с автоматическими функциями.

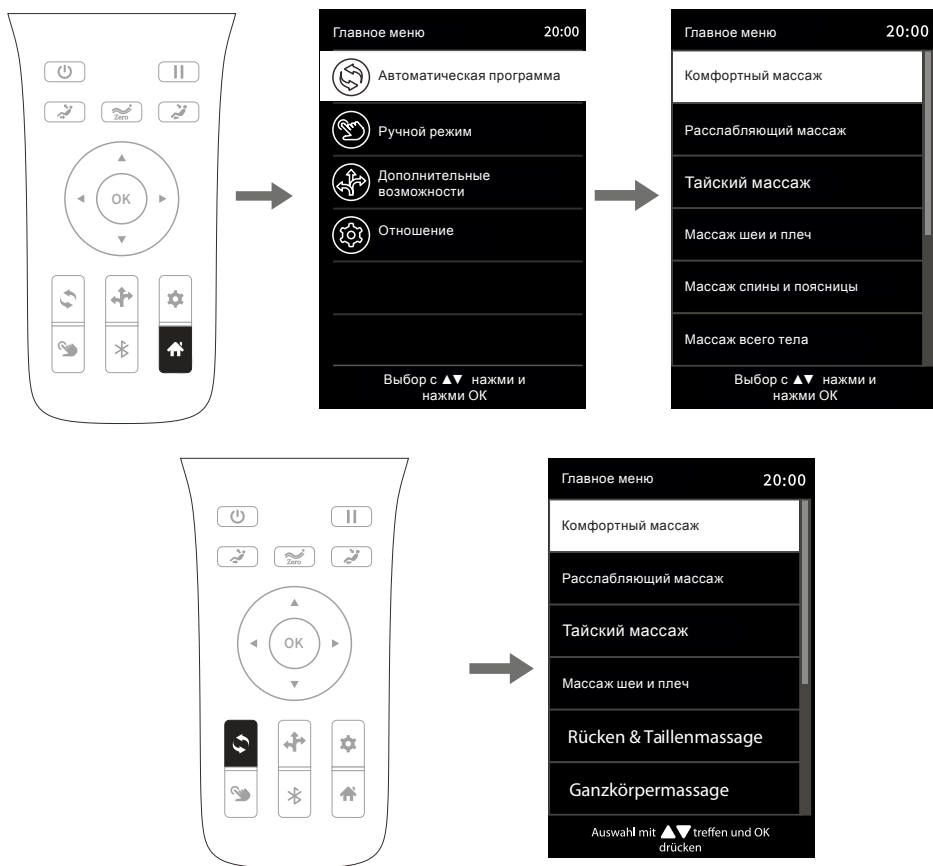

6. Инструкция по эксплуатации

функция	Описание
Комфортный массаж	Самый комфортный массаж.
Расслабляющий массаж	Расслабьте и расслабьте свое тело с помощью нежного и приятного глубокого массажа.
Тайский массаж с покачиванием	Тайский массаж с покачиванием- прекрасный способ растяжки. При этом тело фиксируется с помощью компрессионных подушек так что вы можете полностью погрузиться в расслабляющую атмосферу уникальной массажной программы. Спинка сиденья при этом постоянно поворачивается под новым углом, что обеспечивает особенно интенсивное и эффективное растягивание мышц в процессе массажа.
Массаж шеи и плеч	С помощью уникальной техники массажа шеи и плеч можно провести эффективный массаж шейного отдела позвоночника и лопаток. Он облегчает боль в шее и плечах и уменьшает симптомы усталости.
Массаж спины и поясницы	Массаж спины и талии направлен на облегчение болей в спине и пояснице.
Массаж всего тела	Массаж всех мышц пробуждает различные функциональные зоны тела и позволяет вам начать новый день полным жизненных сил.
Массаж позвоночника	Уникальная техника массажа позвоночника улучшает кровообращение, снимает боли в шее и плечах и обеспечивает лучшее снабжение кислородом области головы.
Восстановительный массаж	Снижает общую усталость и болезненность мышц, расслабляет спину и мышцы, улучшает микроциркуляцию и быстро снимает усталость.
Меридианный массаж	Оказывает очищающее действие на меридианы. Способствует микроциркуляции организма и укрепляет иммунную систему.
Про-Массаж	Физически активные люди могут использовать массаж для повышения подвижности, снятия напряжения и оптимизации общих функций организма.
Спокойной ночи массаж	Массаж двенадцати ключевых точек акупунктуры помогает организму восстановить баланс и обеспечивает быстрое улучшение сна и его качества.
Нежный массаж	Этот массаж подходит всем, особенно людям преклонного возраста. Массаж нежный и нежный. Также рекомендуется для особо напряженных людей.
Бодрящий массаж	Массаж позволяет организму быстро восстановиться после тренировки, обеспечивая оптимальную регенерацию.
Массаж нижней части тела	Эффективный массаж поясницы, ягодиц и бедер помогает расслабить ум и регулирует различные функции организма.
Body-Balance-Massage	Entlastet bei Stress, lindert Müdigkeit, beruhigt den Geist, entspannt die Muskeln, bringt Körper und Geist ins Gleichgewicht, sorgt für ein ausgeglichenes Gemüt und fördert den Schlaf.

6. Инструкция по эксплуатации

2. Ручные функции

Нажмите кнопку «Меню» для доступа в главное меню. Нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать ручные функции, подтвердите кнопкой «ОК». Вы также можете напрямую нажать кнопку «Вручную». Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы войти в интерфейс ручных функций.

В массажном кресле есть 9 функций ручного массажа, включая разминание, постукивание, ритмичное постукивание, разминание и постукивание, шиацу, 3D-разминание, 3D-постукивание, 3D-разминание и постукивание и 3D-шиацу.

После входа в ручной интерфейс выберите желаемую технику ручного массажа с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ и нажмите ОК для подтверждения. После выбора техники вы не вернетесь автоматически к предыдущему интерфейсу. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу. Когда вы вернетесь к предыдущему интерфейсу, вы окажетесь в интерфейсе техник ручного массажа.



6. Инструкция по эксплуатации

функция	Регулировка массажной головки.	
Разминание	Скорость	Скорость регулируется на 5 уровнях. Ширина регулируется в 3-х уровнях.
Стук	Скорость и ширина	
Ритмичское постукивание	Скорость и ширина	
Разминание и постукивание	Скорость	
Шиацу	Ширина	
3D разминание	Скорость	
3D поколачивание	Скорость и ширина	
3D постукивание и разминание	Скорость	
3D Шиацу	Ширина	


6. Инструкция по эксплуатации

3. Дополнительные возможности

Нажмите «Меню» . Чтобы войти в интерфейс меню, нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать значок дополнительных функций, и подтвердите выбор кнопкой «ОК». Или вы можете напрямую нажать кнопку «Дополнительные функции» . Нажмите на пульте дистанционного управления, чтобы войти в пользовательский интерфейс для доступа к дополнительным функциям.

Другие функции включают в себя: верхняя компрессия, нижняя компрессия, нагрев и другие функции массажа.

На экране «Дополнительные функции» используйте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать нужную функцию массажа, и используйте кнопку «Вправо», чтобы включить или отключить ее. Затем нажмите кнопку ОК для подтверждения. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.

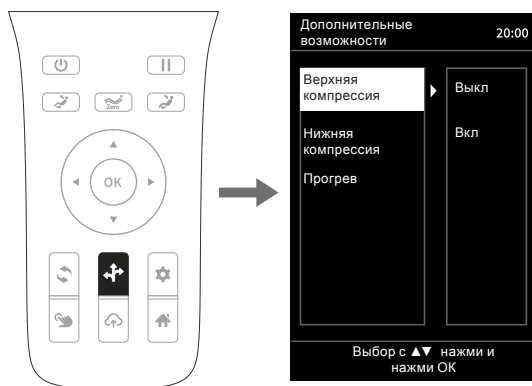


6. Инструкция по эксплуатации

1. Другие функции - Верхняя компрессия

Массаж давлением воздуха: включает функции массажа плеч, рук и талии.


Выберите интерфейс «Дополнительные функции» и нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать верхнюю функцию компрессии. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы включить или выключить верхний воздушный массаж, затем подтвердите выбор кнопкой «ОК». Используйте кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.

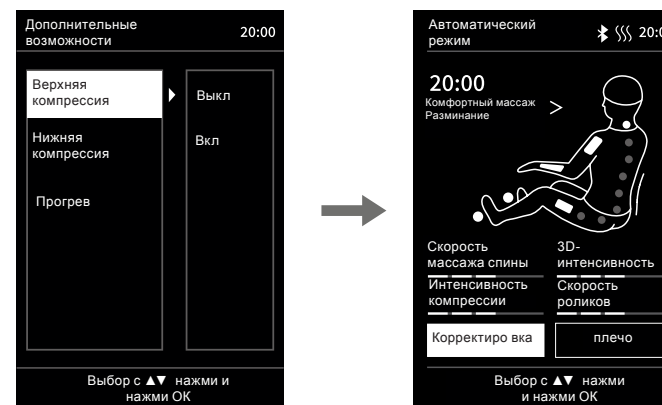

2. Другие функции – нижняя компрессия.

Воздушно-компрессионный массаж нижней части тела: с функциями массажа ног и ступней.

Выберите интерфейс «Дополнительные функции», нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать функцию нижнего воздушного массажа. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы включить или выключить нижний воздушный массаж, затем подтвердите выбор, нажав «ОК». Кнопка «Влево» используется для возврата к предыдущему интерфейсу меню.

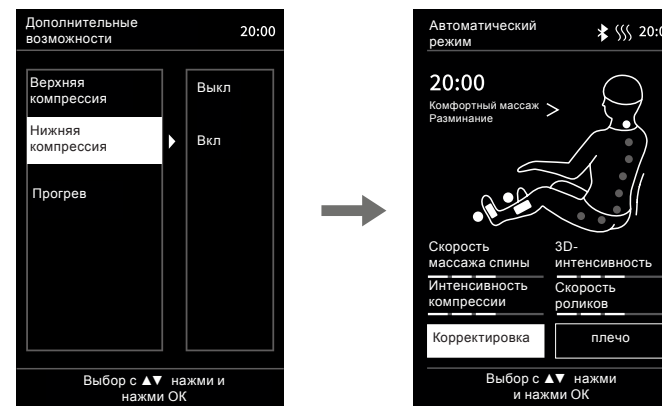

6. Инструкция по эксплуатации

3. Другие функции – Прогрев

Нагрев: включение/выключение нагрева. Нагрев занимает около 3 минут.

Выберите интерфейс «Дополнительные функции», нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать функцию нагрева. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы включить или выключить нагрев, затем подтвердите выбор кнопкой «ОК». кнопкой «Влево» вы вернетесь в предыдущий интерфейс меню.




6. Инструкция по эксплуатации

4. Настройка

Нажмите кнопку «Меню» кнопка входа в главное меню. Выберите кнопкой «Вверх» или «Вниз», либо напрямую через «Настройки» кнопку на пульте дистанционного управления, значок настроек и нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в меню настроек.

Настройки включают в себя: языки, Bluetooth и идентификатор устройства.


После открытия интерфейса настройки нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать нужную функцию настройки. Затем нажмите кнопку «Вправо», чтобы установить выбранную функцию настройки, затем нажмите «ОК» для подтверждения. Используйте клавишу «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню

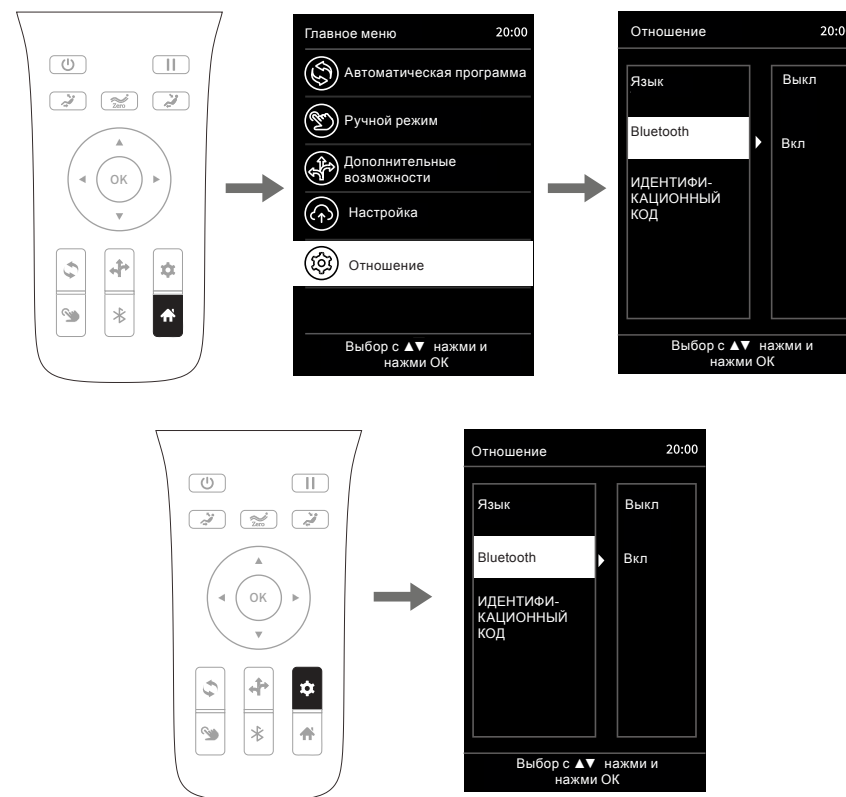

6. Инструкция по эксплуатации

1. Настройка – настройка языка


Откройте меню настроек. Кнопками вверх и вниз выберите язык, подтвердите правой кнопкой. Затем выберите язык с помощью кнопки ОК. Вернуться назад можно с помощью левой кнопки.

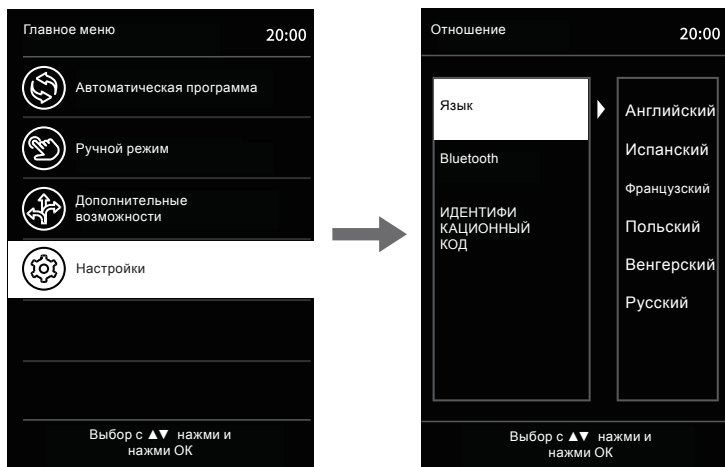

2. Настройка – Bluetooth

Активируйте функцию Bluetooth кресла, чтобы подключить к креслу устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон, планшетный компьютер и т. д.). После сопряжения и подключения к модулю Bluetooth кресла музыка, воспроизводимая с вашего внешнего устройства, может передаваться по беспроводной сети на аудиосистему кресла через Bluetooth.

Откройте интерфейс настроек и выберите Bluetooth с помощью кнопки ВВЕРХ или ВНИЗ. Затем нажмите правую кнопку, чтобы включить или выключить функцию Bluetooth, подтвердите кнопкой ОК. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.

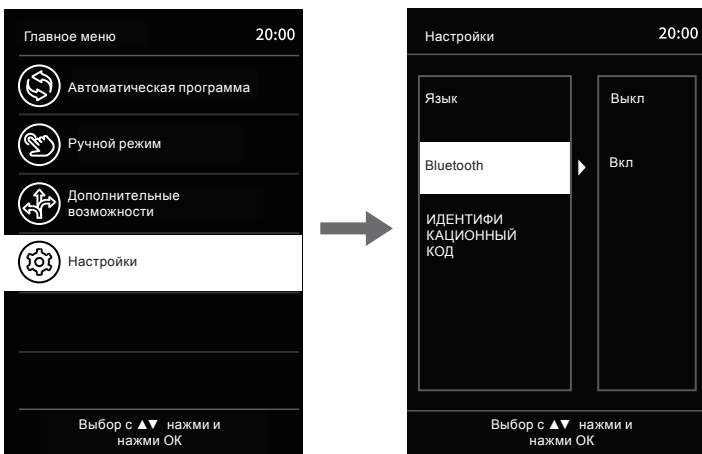


6. Инструкция по эксплуатации

3. Настройка – ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

ID CODE: отображение идентификационного номера устройства.

После входа в интерфейс настройки используйте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы выбрать идентификатор устройства и отобразить номер устройства.

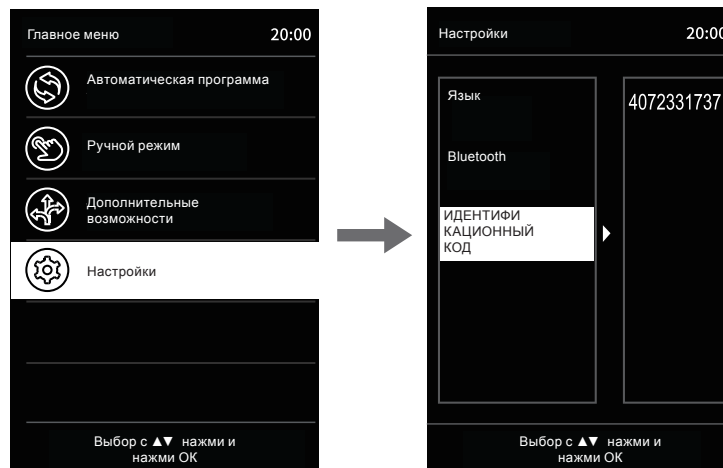


6. Инструкция по эксплуатации

4. Регулировка массажа

В интерфейсе нажмите кнопку «Влево» или «Вправо», чтобы выбрать кнопку настройки массажа, затем нажмите кнопку «ОК», чтобы войти в интерфейс настройки массажа.

Имеется 7 функций настройки массажа: скорость массажа спины, интенсивность 3D, зона массажа, ширина массажа, интенсивность воздушного массажа, скорость ролика, время массажа и т. д.

После входа в интерфейс настройки массажа нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать нужную настройку. Нажмите кнопку «Вправо», чтобы отрегулировать уровень массажа, затем нажмите кнопку «ОК» после выбора настройки массажа. Нажмите кнопку «Влево», чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу меню.

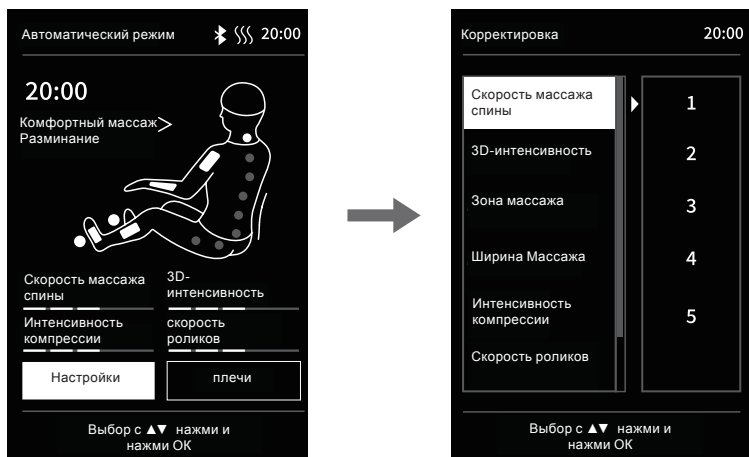

функция	Описание
Скорость массажа спины	5 уровней скорости
3D-интенсивность	Интенсивность регулируется на 5 уровнях.
Зона массажа	Выберите один из пяти режимов: точечный, частичный, полный, верхний и нижний.
Ширина Массажа	Ширина регулируется на 3 уровнях.
Интенсивность компрессии	Интенсивность регулируется на 5 уровнях.
Скорость роликовкомпресси	Доступны четыре режима, включая «выкл» и уровни с 1 по 3.
Контроль времени	На выбор есть четыре режима: +10 минут, +5 минут, -5 минут и -10 минут.

6. Инструкция по эксплуатации

Обратите внимание, что доступное время массажа может варьироваться в зависимости от оставшейся продолжительности. Если отображаемое время не позволяет складывать или вычитать определенный интервал времени, соответствующая операция недоступна. Например, если на пульте дистанционного управления отображается 39 минут, диапазон настройки доступного времени массажа ограничен -5 минутами или -10 минутами. Невозможно выбрать +10 минут или +5 минут.

Невесомость (Zero-gravity)

Нажмите кнопку «Невесомость», чтобы отрегулировать положение угла невесомости. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать различные положения угла невесомости. Для первого уровня нажмите кнопку один раз. Для второго уровня нажмите кнопку дважды. Для третьего уровня нажмите кнопку три раза. Для возврата в исходное состояние кнопку необходимо нажать четыре раза.



Вкус	Описание
	Кнопка «Невесомость» позволяет пользователю установить положение рамы голени и рамы спинки в положение невесомости, а также выбрать один из трех режимов невесомости и режим опускания кресла, которые являются циклическими попеременно.

5. Кнопка регулировки наклона кресла.

Положение	Описание
	Чтобы поднять спинку, нажмите и удерживайте кнопку подъема сиденья, пока не будет достигнута желаемая высота. Чтобы опустить ножную секцию, нажмите и удерживайте кнопку, пока ножная секция не займет нужное положение. Чтобы остановить подъем или опускание ножной секции, отпустите кнопку.
	Чтобы медленно опустить спинку сиденья, нажмите и удерживайте кнопку опускания сиденья. Чтобы медленно поднять подножку, нажмите и удерживайте кнопку подъема подножки. Чтобы прекратить опускание спинки или подъем подножки, отпустите соответствующую кнопку.

6. Инструкция по эксплуатации

Воспроизведение музыки через динамики и Bluetooth



1. Кнопка Bluetooth: чтобы включить или выключить соединение Bluetooth, нажмите кнопку «Bluetooth»: .
2. В меню смарт-устройства откройте «Настройки» и выберите «Bluetooth». Откройте «Bluetooth», и он автоматически выполнит поиск нового устройства Bluetooth.
3. Интеллектуальное устройство выполнит поиск соответствующей модели Bluetooth (IMCM-XXXX). Нажмите кнопку «Соединить», когда вас спросят.
4. Включите музыкальный проигрыватель смарт-устройства и выберите песню для воспроизведения.


6. Инструкция по эксплуатации

Завершение массажа

Чтобы отключить функции массажа во время использования, просто нажмите кнопку включения/выключения на пульте дистанционного управления. При этом также сбрасываются настройки положения спинки и подножки кресла.

Также, таймер массажа автоматически отключает все функции по истечении установленного времени массажа, но положение спинки и подножки массажного кресла остаются в том же положении.

Чтобы выключить устройство, выключите главный выключатель питания.

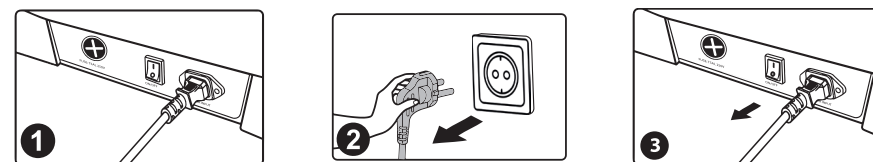

7. Чистка и уход за изделием

Очистите детали из искусственной кожи и пластика.
Для протирания кожи используйте мягкую сухую ткань.

- Не очищайте изделие химическими веществами, такими как растворитель, бензин, спирт и т. д.
- Если вы используете коммерческие средства по уходу за кожей, следуйте инструкциям по использованию.

Если искусственная кожа сильно загрязнена, протрите ее следующими способами.

1. Окуните мягкую ткань в воду или горячую воду с 3–5 % нейтральным моющим средством и тщательно отожмите.
 2. Протрите кожаную поверхность мягкой тканью, упомянутой выше.
 3. Удалите чистящий раствор тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.
 4. Просушите кожу отжатой мягкой тканью.
 5. Затем дайте ему высохнуть на воздухе.
- Если пятна трудно удалить, мы рекомендуем окунуть ткань в раствор нейтрального моющего средства и протереть им массажное кресло.
 - Не используйте фен для сушки поверхности.
 - Обратите внимание, что цвет ткани может остаться на коже при уходе. Поэтому лучше не использовать ткань от старых джинсов или цветные ткани. Используйте специальные салфетки для ухода за кожаными изделиями.
 - Обратите внимание, что длительный контакт между этими деталями и пластиком может привести к изменению цвета.
 - Обратите внимание, что искусственная кожа может обесцветиться под воздействием краски для волос. Чтобы избежать проблем, рекомендуем при окрашивании волос закрывать поверхность соприкосновения полотенцем.



8. Устранение возможных неполадок

Проблема	Когда механизм спинки и подножки достигают определенного положения, положение больше не будет меняться при нажатии нужной кнопки регулировки.
Решение	Из-за конструкции продукта и требований эргономики этот продукт имеет ограничение безопасности при регулировке положения. При этом при достижении предела звучит звуковой сигнал.

Проблема	После включения кресла некоторые функции не работают.
Решение	После включения аппарата нажатием кнопки питания программу автоматического массажа или другое рабочее состояние необходимо выбрать вручную. Если выбор не сделан, устройство автоматически выключается через 20 минут. Если выбран ручной режим работы, автоматические функции деактивированы и необходимо установить режим работы вручную.

Проблема	При смене положения устройство издает шум, похожий на трение кожи.
Решение	В этом изделии используется высококачественная устойчивая к истиранию синтетическая кожа, отвечающая требованиям защиты окружающей среды. Благодаря особым свойствам кожаных материалов при трении и движении в соответствующей области возникает небольшой шум. Это нормальное явление. Примечание. Если во время работы вы слышите шум, напоминающий рвущуюся ткань или кожу, немедленно прекратите работу и обратитесь к специалисту.


Проблема	Массажные головки не доходят ни до плеч, ни до шеи.
Решение	Если только вы не пропустили сканирование тела перед массажем, вам придется установить положение плеч вручную в главном меню. Если этого недостаточно и голова не касается подушки для головы или спина не касается спинки, положение плеч может быть ниже фактического положения во время определения формы тела. Сядьте в самое нижнее положение сиденья, положите голову на подголовник и начните сканирование заново.
Проблема	Устройство повреждено. Адаптер питания или вилка питания необычно горячие.
Решение	Немедленно прекратите использование устройства и отключите питание. Во избежание несчастных случаев обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно этого продукта, пожалуйста, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

9. Технические данные

Модель:	BetaSonic III
Вес брутто:	95 кг
Вес нетто:	80 кг
Напряжение:	220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность:	220 Вт
Давление воздуха:	0.022-0.03МПа
Уровень шума:	≤60дБ
Класс безопасности:	Класс I
Длительность массажа:	20 минут
Сертификаты:	CE EAC X
braintronics®:	21 минута

Размеры изделия:	
В вертикальном положении:	50 x 76 x 116 см
Лежа:	95 x 156 x 185 см

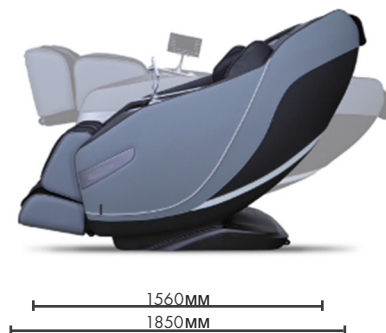

10. Специальные функции



МАССАЖ В ОДНОЙ ТОЧКЕ

Массажные ролики могут проводить массаж в конкретной точке тела.



РАЗМИНАНИЕ

Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.



ПОКОЛАЧИВАНИЕ

При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи ребра ладони или кулака. Это стимулирует приток крови к коже и расслабляет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то это способствует растворению слизи в легких.



ШИАЦУ

Шиatsu (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника воздействия на биоактивные точки. Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов. Целью шиatsu является стимулирование отдельных точек на теле и обеспечение подвижности мышц.



КОМПРЕССИЯ

Воздушные подушки наполняются воздухом и сдуваются, сжимают и разжимают мышцы. Такой массаж снимает тяжесть с ног, выводит лишнюю жидкость из тела и омолаживает.



РАЗМИНАНИЕ И ПОКОЛАЧИВАНИЕ

Техники разминания и постукивания сочетаются для того, чтобы одновременно снять напряжение и стимулировать кровообращение.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию нагрева, при желании.



МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ

индивидуально подстраивается под анатомические особенности пользователя.



УГЛЕРОДНО – ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ

Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус понижается. Кроме того, этот режим обладает крайне благоприятным воздействием на нервные клетки, которые ответственны за донесение импульсов боли до головного мозга.



МАССАЖ СТОП

Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегулировать.



ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Массаж с воздушной подушкой для всего тела – различные зоны можно контролировать индивидуально.



BLUETOOTH

Беспроводная передача данных.



НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Попеременно расслабляет и напрягает мышцы, успокаивает и снимает напряжение. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.



РАЗМИНАТЬСЯ И ПОРХАТЬ

Массаж, сочетающий разминание и поколачивание.



ФЛАТТЕРЫ

Легкие постукивания ладонью способствуют циркуляции крови в мышцах и подтягивают соединительные ткани, одновременно снимая напряжение.



L-ОБРАЗНАЯ ФОРМА

Глубоко проникающий массаж всего тела от шеи до ягодиц.



S-LINE

В этой автоматической программе массажные головки, расположенные особенно близко к телу, массируют всю спину вплоть до ягодиц. S-образный механизм смоделирован с учетом естественной анатомии позвоночника.



ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!



2D-МАССАЖ

2D-массажный механизм позволяет массажному креслу измерить вашу спину, а также распознать точное положение отделов позвоночника.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП

Подставку для стоп можно удлинять, поэтому ее можно приспособить к разным размерам тела.



РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ

Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения тела еще более удобным.



BRAINTRONICS®

Технология Braintronics® синхронизирует мозговые волны с помощью аудиостимуляции. В сочетании со специально разработанной программой массажа тело, подверженное стрессу, расслабляется. Хотите ли вы расслабиться, пометать или поучиться - все возможно.



РЕГУЛИРОВКА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ

Массажные головки в области плеч можно перемещать вверх и вниз.



ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННО-ГО МАССАЖА

Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.



3D-МАССАЖ

Благодаря этой новейшей технологии массажный робот двигается не только вверх и вниз по спине, но и в мышцы и обратно.



МАССАЖ ПЛЕЧ

Целенаправленное разминание области плеч и шеи – идеальное решение при проблемах в этой части тела.



СКОРОСТЬ

Регулируемая скорость массажа.



ШИРИНА

Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и широкий).



МУЗЫКА

Функция музыки для дополнительного расслабления и наслаждения.



РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ

Ножной массаж рефлексорных зон восстанавливает мускулатуру ног и гармонично воздействует почти на все органы тела.



ОЩУЩЕНИЕ МАССАЖА ВРУЧНУЮ

При выборе этой настройки специально разработанные массажные головки имитируют движение рук массажиста. Они могут выдвигаться на 6,5 см с максимальным углом в 41 градус и способны массировать шейные, грудные и поясничные мышцы эффектом ручного массажа.



БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Кнопки быстрого запуска на подлокотнике обеспечивают быстрый и простой доступ к наиболее важным функциям.



ДВОЙНОЙ ДАТЧИК СКАНИРОВАНИЯ ТЕЛА

Массажное кресло выполняет сканирование тела, чтобы рассчитать размеры пользователя и основные напряженные зоны, чтобы обеспечить оптимальное давление на протяжении сеанса массажа. Технология сканирования определяет высоту плеч, длину шеи, высоту туловища. Эти настройки можно изменить после сканирования, если это необходимо.

11. Юридические вопросы

11.1 Декларация соответствия ЕС

Соответствует европейским директивам EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU и RoHS.

11.2 Гарантийные обязательства

Продавец предоставляет установленный законом гарантийный срок на изделие, описанное в приведенной ниже таблице. Гарантия действует с даты покупки. Дата покупки должна быть подтверждена документами, подтверждающими покупку. Продавец бесплатно отремонтирует или заменит все изделия, на которые распространяется гарантия в Германии, и которые окажутся неисправными. Это не относится к быстроизнашивающимся деталям, таким как тканевые чехлы. Условием для этого является отправка неисправного прибора с доказательством покупки до истечения гарантийного срока.

Гарантия недействительна, если после обнаружения неисправности она возникла, например, из-за внешних воздействий или в результате ремонта или модификации, выполненных не производителем или не уполномоченным дилером. Гарантия дилера ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не принимает на себя никаких дополнительных обязательств и не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по эксплуатации и/или неправильным использованием изделия.

Если в результате проверки изделия производителем выясняется, что гарантийная претензия относится к дефекту, на который не распространяется гарантия, или что гарантийный срок истек, расходы на проверку и ремонт несет заказчик.

Юридическое уведомление: Ни одно из содержащихся здесь утверждений не является целительным. Диагностика и лечение заболеваний и других физических расстройств требуют обращения к врачам, альтернативным практикам или терапевтам. Информация носит исключительно информационный характер и не должна использоваться в качестве замены медицинского лечения. Каждый пользователь должен сам определить, насколько полезно применение в конкретном случае, путем тщательного обследования и, при необходимости, после консультации со специалистом. Любое применение или терапия осуществляются на собственный риск пользователя. Мы дистанцируемся от любых заявлений и обещаний о лечении.

Casada Deutschland GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.de
www.casada.de

Авторское право Изображения и тексты являются объектом авторского права компании CASADA Deutschland GmbH и не могут быть использованы без специального подтверждения. copyright © 2023 CASADA Deutschland GmbH.
все права защищены. A2-SK3-EN1023



CASADA
HEALTHCARE