

time**to**relax



# ATLAS



## < timetorelax

CASADA bestaat al sinds 2000 en we hebben een reputatie opgebouwd voor het maken van eerste klas producten voor uw wellness- en fitnessbehoeften.

Onze CASADA apparaten zijn nu over de hele wereld verkrijgbaar! We zijn altijd aan het innoveren en onze ontwerpen zijn even uniek als effectief. Maar bij CASADA gaat het niet alleen om het maken van geweldige producten - we gaan ook om het verbeteren van uw leven, stap voor stap.

## Proficiat!

Door deze massagestoel te gebruiken, heeft u uw gezondheidsbewustzijn aangetoond.

Om van de voordelen van dit apparaat te genieten, vragen wij u de veiligheidsinstructies zorgvuldig te lezen en op te volgen.

Wij wensen u veel plezier met het gebruik van de **Atlas** van Casada.

## Inhoudsopgave

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Veiligheidsinstructies .....            | 74 |
| Contra-indicaties .....                 | 75 |
| Technische gegevens .....               | 75 |
| Installatie onderdelen .....            | 76 |
| Massagestoel plaatsen .....             | 77 |
| Structuur van het product .....         | 80 |
| Gebruiksaanwijzing .....                | 82 |
| Reiniging en onderhoud .....            | 83 |
| Probleemoplossing .....                 | 84 |
| EU-Verklaring van overeenstemming ..... | 85 |
| Garantievoorwaarden .....               | 85 |

# Veiligheidsinstructies



Lees voordat u uw massagestoel gebruikt de volgende instructies aandachtig door om een goede werking en optimale prestaties te garanderen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats!

- De massagestoel voldoet aan de erkende principes van techniek en de huidige veiligheidsvoorschriften
- De massagestoel is onderhoudsvrij. Eventuele noodzakelijke reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel.
- Bij oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde reparaties vervalt de garantie.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan.
- Vermijd contact van de massagestoel met water, hoge temperaturen en direct zonlicht.
- Gebruik de massagestoel niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals een badkamer.
- Gebruik de massagestoel niet als deze is opgesloten of op een plaats is geplaatst waar de ventilatoren zijn afgedekt en er geen goede ventilatie is gegarandeerd.
- Om het risico op kortsluiting te voorkomen, koppelt u de massagestoel los van het elektriciteitsnet als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik geen beschadigde stekkers, kabels, losse stopcontacten of natte elektrische kabels.
- Beschadigde stekkers/kabels moeten worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel.
- In geval van storing onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
- Verkeerd gebruik of onjuist gebruik sluit aansprakelijkheid voor schade uit.
- Om overbelasting van spieren en zenuwen te voorkomen, mag u de aanbevolen dagelijkse massage-duur van 30 minuten niet overschrijden.
- Gebruik nooit scherpe of puntige voorwerpen om beschadiging van uw massagestoel te voorkomen.
- Om het risico op kortsluiting of brand te verminderen, gebruikt u altijd stopcontacten die bij de stekker passen en zorgt u ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
- Koppel uw massagestoel na gebruik en voor het schoonmaken altijd los van het elektriciteitsnet.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 14 jaar.
- In geval van een onverwachte stroomstoring tijdens gebruik, schakelt u deze onmiddellijk uit en haalt u de stekker uit het stopcontact om schade aan uw massagestoel te voorkomen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar, mensen met een handicap of kwetsbare personen in de buurt van of gebruik van de massagestoel moeten onder toezicht staan.
- Gebruik de massagestoel niet direct na een maaltijd of onder invloed van alcohol.
- Gebruik het product alleen voor het doel dat wordt beschreven in de gebruikershandleiding.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd.
- Ga niet op de voetensteun staan, zitten of springen om schade te voorkomen.
- Ga niet op de armleuningen of rugleuning zitten om schade en zelfverwonding te voorkomen.
- Houd uw massagestoel regelmatig schoon en voorkom dat er vreemde voorwerpen in de spleten van de massagestoel vallen.
- Trek niet rechtstreeks aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er zich bij het verplaatsen geen voorwerpen, vooral kinderen, onder de voetensteun of rugleuning bevinden.
- Als het flexibele netsnoer beschadigd is, moet een vervanging worden verkregen bij de fabrikant of een servicecentrum.

# Contra-indicaties

Als u niet zeker weet of u de massagestoel kunt gebruiken, raadpleeg dan altijd uw arts.

- Massages tijdens de zwangerschap of als u een van de volgende aandoeningen heeft in zijn verboden: verse verwondingen, trombotische aandoeningen, ontstekingen en zwellingen van welke aard dan ook, evenals kanker. Raadpleeg tijdens de behandeling van kwalen en aandoeningen uw arts voor een massage.
- Voor personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of personen met onvoldoende ervaring en kennis, is het gebruik van de massagestoel alleen toegestaan onder toezicht en instructie van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
- Om ongemak of gevaren bij het gebruik van de massagestoel te voorkomen, vragen we de volgende personen om voor gebruik een arts te raadplegen:
  - Bedlegerige personen
  - Personen die een medische behandeling ondergaan
  - Rugpatiënten, mensen met problemen met de wervelkolom of krommingen
  - Mensen met pacemakers
- Als u pijn voelt tijdens de massage, stop dan onmiddellijk met de behandeling.
- In geval van letsel tijdens het gebruik, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Masseer geen rode, gezwollen of ontstoken delen van de huid.
- Deze massagestoel is alleen voor uw wellnessmassage thuis, het is geen medisch product en kan daarom geen specialistische medische behandeling vervangen.
- We raden een dagelijkse toepassing van 30 minuten aan.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.



# Technische gegevens

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | CMS-301                                                                                                                                                                         |
| Naam:                 | Atlas                                                                                                                                                                           |
| Dimensies:            | Rechtopstaand: 79 x 142 x 123,5 cm<br>Achterover leunend: 79 x 158,5 x 112 cm                                                                                                   |
| Gewicht:              | 86,5 kg                                                                                                                                                                         |
| Spanning:             | 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| Nominaal vermogen:    | 80 W                                                                                                                                                                            |
| Veiligheidsstructuur: | Klasse I                                                                                                                                                                        |
| Runtime:              | 20 minuten (massagetijd volgens betalingsbedrag)                                                                                                                                |
| Certificaten:         | ERC   |



## Installatie onderdelen

### Installatie-instructies of vervangingsmethoden voor de kaartlezer


1. Verwijder de vier verzonken veiligheidsschroeven met een schroevendraaier en verwijder vervolgens het deksel van het bedieningspaneel (Figuur 1 - Figuur 2).

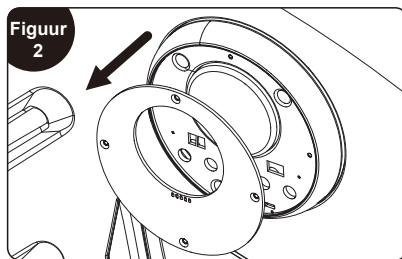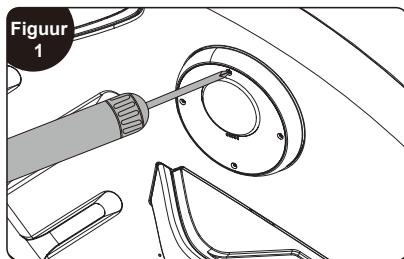

2. Verwijder de drie kruiskopschroeven met een schroevendraaier en verwijder vervolgens het bedieningspaneel (Figuur 3 - Figuur 4).

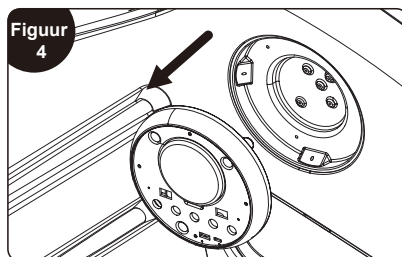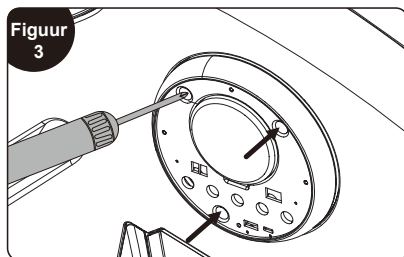

3. Installeer het Nayax-apparaat dat u hebt gekocht (Afbeelding 5).

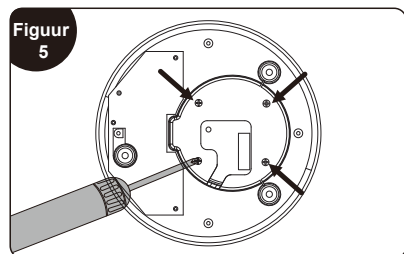


## Massagestoel plaatsen

### Plaatsing

**Zorg ervoor dat er minimaal 5 cm ruimte achter de stoel is zodat de stoel gekanteld kan worden.**

Bescherm de stoel tegen te hoge kamertemperatuur. Plaats de stoel om direct zonlicht te vermijden en om voldoende afstand tot verwarmingsapparaten te garanderen. Om de vloer tegen beschadiging te beschermen, raden wij een geschikte ondervloer aan (bijv. een mat).

  
**VOORZICHTIGHEID**

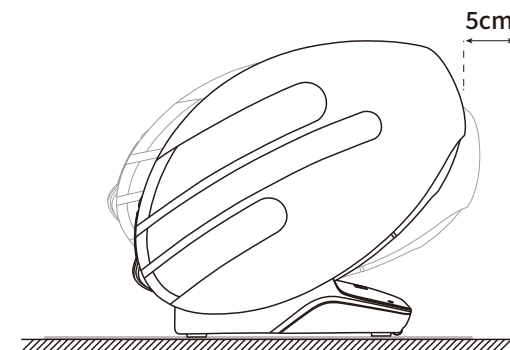


### Verhogen van de stoel

**Om verwondingen te voorkomen, is het noodzakelijk om hulp te hebben bij het optillen en verplaatsen van de stoel.**


  
**VOORZICHTIGHEID**

Til de massagestoel op wanneer u deze verplaatst op gevoelige oppervlakken zoals houten vloeren. Wanneer de stoel wordt opgetild en naar de beoogde positie wordt verplaatst, zorg er dan voor dat uw handen en voeten niet bekneld raken. Laat de stoel pas los als deze rechtop staat. Om schade aan de vloer te voorkomen, raden wij aan om beschermmatten of iets dergelijks op de vloer te leggen.


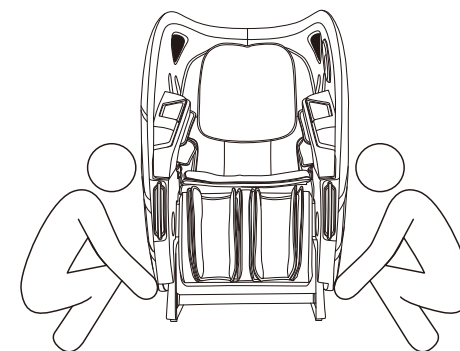




## Massagestoel plaatsen

| De massagestoel verplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Gebruik de zwenkwielen aan de achterkant om de massage stoel te verplaatsen. Verplaats de stoel door hem ongeveer 45° naar achteren te kantelen (zie afbeelding). <b>Opmerking: Overmatige kracht zorgt ervoor dat de stoel kantelt en beschadigd raakt.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Voorzichtigheid</b></p>  |
| <p>Voordat u de stoel verplaatst, dient u deze te laten zakken en de stroomtoevoer uit te schakelen bij het bereiken van de basispositie. Verplaats de stoel alleen als deze leeg is (mensen, huisdieren of voorwerpen mogen niet op de stoel blijven liggen). Duw de stoel niet over obstakels hoger dan 2 mm of openingen breder dan 5 mm. Bij het verplaatsen van dit product met behulp van de rollen is een enkele continue beweging niet mogelijk; Als de afstand meer dan 50 meter is, verplaats het product dan langzaam en soepel om schade te voorkomen.</p> |                                                                                                                 |
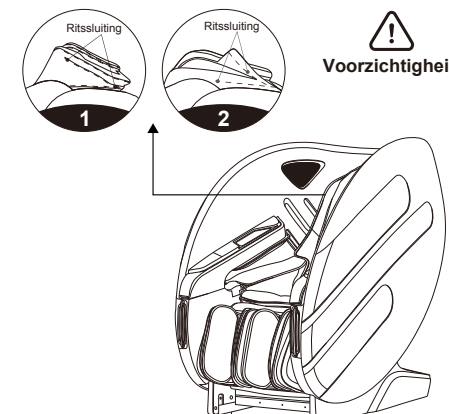
| Demonteer de hoofdsteun en het rugleuningkussen                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>De kneedintensiteit van de massage in het gebied van de nek en schouders kan worden verlicht door het kussen te gebruiken. We raden u aan het kussen te gebruiken.</p> <p>Het rugkussen en de rugleuning (1), evenals het hoofdkussen en het rugleuningkussen (2) zijn met een ritssluiting verbonden.</p> | <p><b>Voorzichtigheid</b></p>  |

## Massagestoel plaatsen

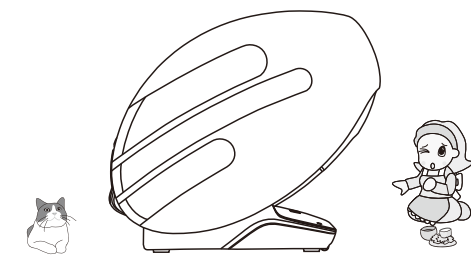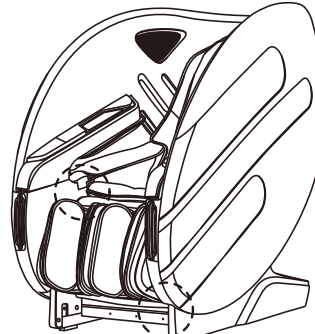
| Rondkijken                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Voorzichtigheid</b></p> | <p>Zorg ervoor dat er zich geen mensen, huisdieren of andere voorwerpen in de buurt van het apparaat bevinden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Voorzichtigheid</b></p> | <p>Voordat u met de massage begint, moet u ervoor zorgen dat er geen vreemde voorwerpen in de benen of voeten, enz. blijven haken. Hand, voeten of hoofd mogen in geen geval in de ruimte komen tussen het onderbeenmechanisme en het hoofdgedeelte, of tussen de armleuning en het apparaat. Laat uw handen, voeten of hoofd nooit onder de stof of lederen bekleding van het massagegebied komen.</p>  |
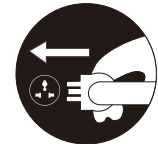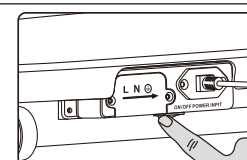
| Schakel de stroom in          |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Voorzichtigheid</b></p> |   |
| <p>Schema aansluitmethode</p> | <p>Druk op de aan/uit-schakelaar onder de powerbox</p>                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Waarschuwing</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer voor gebruik het netsnoer en de stekker op beschadigingen.</li> <li>Voorzie dit product van stroom volgens de gespecificeerde stroomvereisten.</li> <li>Gebruik geen andere voeding dan de voor dit product bestemde.</li> <li>Sluit geen niet-geautoriseerde stroomconversieapparaten aan om dit product van stroom te voorzien.</li> </ul> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Structuur van het product


### Beschrijving van de componenten

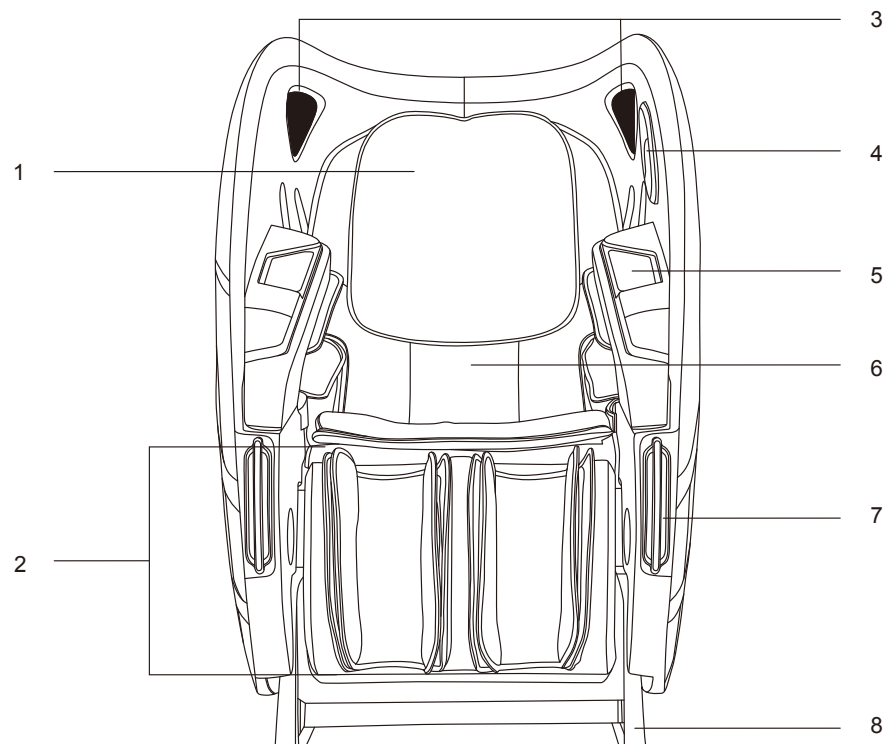

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Hoofdkussen      | 5. Draadloos opladen |
| 2. Been mechanisme  | 6. Rugkussen         |
| 3. Luidspreker      | 7. Omgevingslicht    |
| 4. Bedieningspaneel | 8. Zijdeksel         |


## Structuur van het product

### Schematische weergave van de functionele verdeling

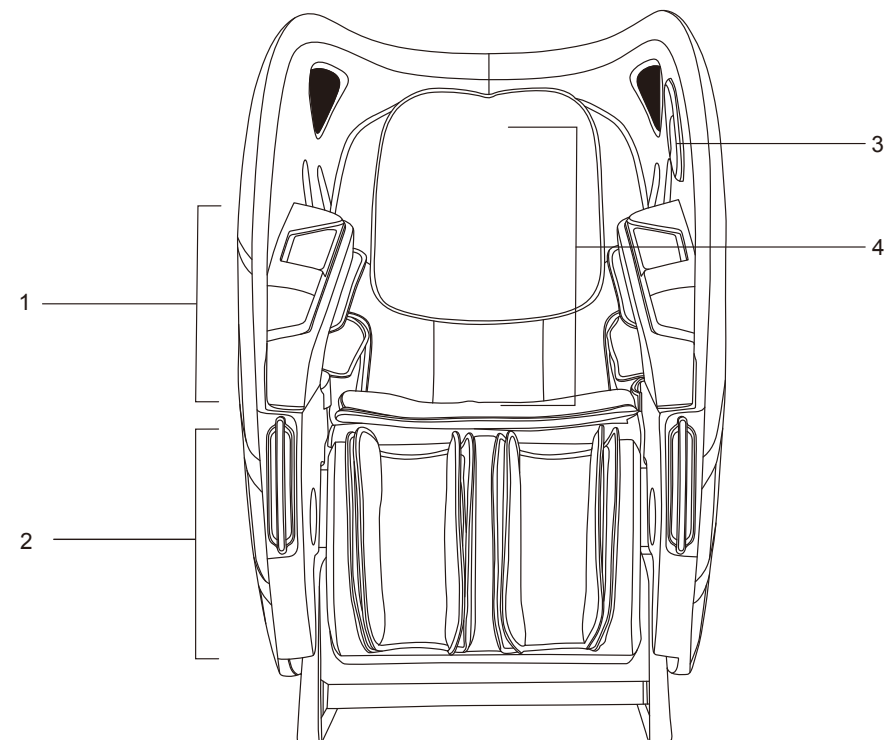

- |                                 |
|---------------------------------|
| 1. Hand Airbag                  |
| 2. Been Airbag                  |
| 3. Luidspreker                  |
| 4. Massage van het bovenlichaam |

# Gebruiksaanwijzing

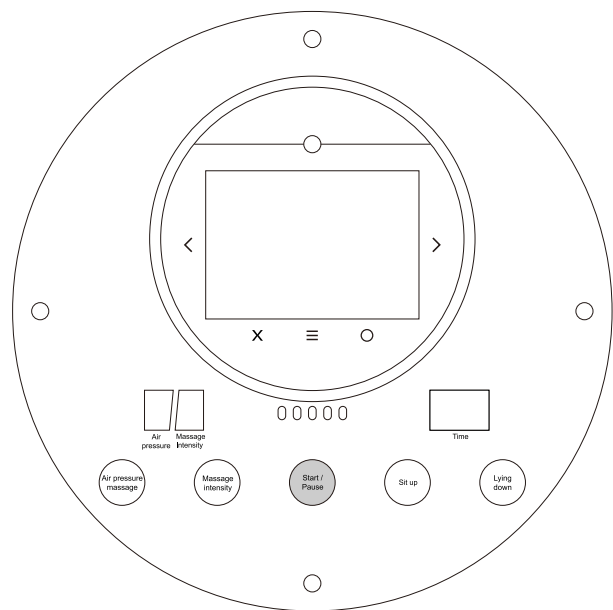

## Start/Pauze

Kort indrukken om de massage te pauzeren of om de pauzmassage te verlaten.

## Intensiteit van de luchtdruk

Pas de functie voor de intensiteit van de luchtdruk aan. Het apparaat is in staat om luchtdrukintensiteiten te genereren op één, twee of drie niveaus, waarbij het laagste niveau de zwakste intensiteit vertegenwoordigt en het hoogste niveau het sterkste. De huidige intensiteit wordt hierboven weergegeven.

## Massage intensiteit

Pas de massage-intensiteitsfunctie aan. Het apparaat is in staat tot verschillende massage-intensiteiten op één, twee of drie niveaus, waarbij het laagste niveau de zwakste intensiteit vertegenwoordigt en het hoogste niveau de sterkste. De huidige intensiteit wordt hierboven weergegeven.

## Ga rechtop zitten

Druk op deze toets, het mechanisme van de rugleuning gaat langzaam omhoog en druk vervolgens nogmaals om te stoppen.

## Vaststelling

Druk op deze toets en het mechanisme van de rugleuning gaat langzaam naar beneden en druk dan nogmaals om te stoppen.

## Tijd


Toont de resterende tijd van de huidige massage

# Reiniging en onderhoud

## Reinigen van synthetisch leer en kunststof onderdelen

Veeg het leer af met een zachte, droge doek.

- Gebruik geen chemicaliën zoals verdunner, benzine, alcohol, enz. om het apparaat schoon te maken.
- Volg bij het gebruik van in de handel verkrijgbare leerverzorgingsproducten (vodden) de gebruiksaanwijzing.
- Als synthetisch leer bijzonder vuil is, veeg het dan op de volgende manier af:
  - Dompel een zachte doek onder in water of heet water met 3% tot 5% neutraal wasmiddel en wring deze vervolgens grondig uit.
  - Gebruik de bovenstaande zachte doek om het lederen oppervlak af te vegen.
  - Veeg de reinigingsoplossing af met een doek gedrenkt in schoon water en grondig uitgewrongen.
  - Veeg af met een uitgewrongen, zachte doek.
  - Laat het op natuurlijke wijze in de lucht drogen.
- Als het moeilijk is om vlekken te verwijderen, dompel dan in de handel verkrijgbaar melamine-schuim onder in een neutraal schoonmaakmiddel en veeg de machine ermee schoon.
- Gebruik geen föhn om het oppervlak te drogen.
- Wees voorzichtig bij het afvegen van de machine met denim en gekleurde stoffen, omdat de kleur van de stof vlekken maakt op het oppervlak van het synthetische leer.
- Houd deze onderdelen niet te lang in contact met plastic, dit zorgt voor verkleuring.
- Synthetisch leer kan verkleurd zijn, dus als je haarverf gebruikt, bedek het aangeraakte deel dan met een handdoek.

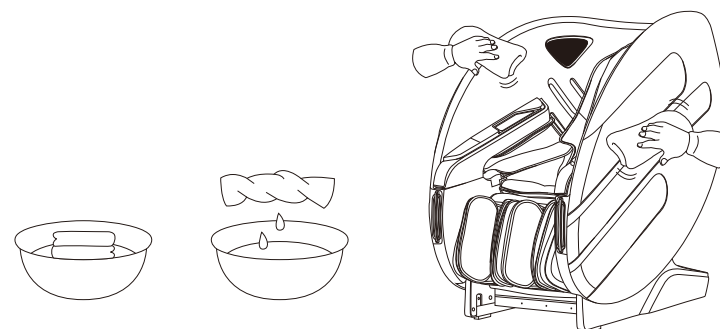

## Probleemoplossing

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleem  | Wat moet ik doen als ik een continu "piep, piep"-geluid hoor tijdens het verstellen van het kuitmechanisme of de rugleuning?                                                                                                                         |
| Oplossing | Vanwege het ontwerp van de productstructuur en ergonomische vereisten heeft dit product een beperkt beschermingsontwerp voor de limiettoestand van houdingsaanpassing. Tegelijkertijd klinkt er een herinneringsgeluid wanneer de limiet is bereikt. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleem  | De machine maakt een leerwrijvend geluid bij het aanpassen van zijn houding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oplossing | Dit product maakt gebruik van hoogwaardig corrosiewerend leer dat voldoet aan de eisen voor milieubescherming. Vanwege de inherente eigenschappen van leermaterialen zal er een normaal licht geluid zijn bij het wrijven bij de relatieve beweging, wat een normaal verschijnsel is. Opmerking: Als u een scheurend geluid van stof of leer hoort wanneer de machine in werking is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en zoek professioneel onderhoud. |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleem  | Het massagewiel bereikte de schouders of nek niet.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oplossing | Als het hoofd het hoofdkussen niet raakt of als de rug de rugleuning niet raakt, kan de schouderpositie lager zijn dan de werkelijke positie tijdens het detectieproces van de lichaamsvorm. Ga in de diepste positie van de stoel zitten, laat uw hoofd op de hoofdsteun rusten en begin opnieuw vanaf het begin. |

|           |                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Probleem  | Het apparaat is beschadigd. Het netsnoer of de stekker is abnormaal heet.                                                                         |
| Oplossing | Zet de stoel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Om ongelukken te voorkomen, moet u contact opnemen met een geautoriseerd servicecentrum. |

U bent van harte welkom om contact op te nemen met het aangewezen servicepersoneel voor vragen of twijfels over dit product.

## EU-Verklaring van overeenstemming

Voldoet aan de Europese regelgevingsnormen EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU en RohS-voorschriften.

## Garantievoorwaarden

De winkelier garandeert een wettelijke garantietermijn voor het op de achterzijde beschreven product. De garantie is geldig vanaf de datum van aankoop. De aankoopdatum moet worden gedocumenteerd met een aankoopbewijs. De winkelier zal defecte producten die in Duitsland zijn geregistreerd, gratis repareren of vervangen. Dit geldt niet voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals stoffen bekledingen. Dit vereist dat het defecte apparaat vóór het verstrijken van de garantieperiode met een aankoopbewijs wordt opgestuurd.

De garantie vervalt als er een defect is opgetreden, bijv. door invloeden van buitenaf of als gevolg van een reparatie of wijziging die niet door de fabrikant of een geautoriseerde dealer is uitgevoerd. De garantie van de verkoper is beperkt tot reparatie of vervanging van het product. Onder deze garantie is de fabrikant of de winkelier niet verder aansprakelijk en is hij niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of onjuist gebruik van het product.

Als de fabrikant na onderzoek van het product vaststelt dat de garantieclaim geen betrekking heeft op een defect dat onder de garantie valt of dat de garantieperiode is verstreken, is de klant verantwoordelijk voor de kosten van de inspectie en reparatie.

Juridische mededeling: Geen van de inhoud heeft enige helende waarde. De diagnose van en therapie voor ziekten en andere lichamelijke aandoeningen vereist behandeling door een arts, alternatieve behandelaar of therapeut. De verklaringen zijn uitsluitend informatief en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor medische behandeling. Elke gebruiker wordt geïnstrueerd om zijn situatie zorgvuldig te beoordelen en, indien nodig, een arts te raadplegen om te bepalen of het gebruik van het product in zijn eigen unieke geval wordt aangemoedigd. Elk gebruik of elke therapie gebeurt op eigen risico van de gebruiker. We distantiëren ons van alle helende eigenschappen of verplichtingen.

Casada Deutschland GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn  
Duitsland  
info@casada.de  
www.casada.de

Copyright Afbeeldingen en teksten vallen onder het auteursrecht van CASADA Deutschland GmbH en mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming.  
Copyright © 2024 CASADA Deutschland GmbH. Alle rechten voorbehouden.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

